

Klemme med påføringspincett 10 mm



Artikkelnummer

LP371-001	LP371-002	LP371-003
LP371-004	LP371-005	LP371-010
LP371-020	LP371-030	LP371-040
LP371-050	LP371-100	LP371-101
RU 0365-00/08	RU 0365-00/10	RU 0365-00/12
RU 0365-00/19	RU 0365-00/20	RU 0365-00/21
RU 0365-00/22	RU 0365-00/23	RU 0365-00/24
RU 0365-00/25	RU 0365-00/26	RU 0365-00/27
RU 0365-00/41	RU 0365-00/42	RU 0365-00/43
RU 0365-00/44	RU 0365-00/45	RU 0365-00/46
RU 0365-00/47	RU 0365-00/80	RU 0365-00/81

Tiltent bruk

- Det er brukerens beslutning om dette medisinske produktet er egnet eller ikke. Vi påtar oss intet ansvar for konsekvenser av feil bruk og klargjøring.

Funksjonstest

- Etter levering og før hver bruk må nye instrumenter gjennomgå en grundig visuell undersøkelse og testes for funksjonalitet. Hvis instrumentene viser tegn på ytre feil (riper, brudd, sprekker, hakk, skadet isolasjon, bøyde deler eller stivhet) eller hvis de ikke fungerer som beskrevet, må du umiddelbart informere oss som produsent eller våre salgspartnere.

Advarsler og forholdsregler

- Ikke bruk skadede instrumenter.
- Les denne informasjonen nøye og i sin helhet. Feil bruk og feil vedlikehold samt feil håndtering kan føre til tidligere slitasje på kirurgiske instrumenter. Personer som bruker dette instrumentet, bør ha kunnskap om bruk og håndtering av kirurgiske instrumenter, tilbehør og tilhørende utstyr.

Første bruk av nye instrumenter

- Det splitter nye instrumentet må tas ut av polyetylenposen for å unngå kondens og må oppbevares rent, tørt (maks. luftfuktighet på 75 % RH) og luftet i en beskyttende beholder ved romtemperatur inntil første klargjøring.
- Klemmen leveres ikke-steril. Instrumentene må rengjøres grundig og steriliseres før første bruk og før hver gjenbruk.
- Klemmesaksene er utviklet for sterilisering i autoklav, en steriliseringstype med lang og velprøvd historie. Du kan også bruke lavtemperaturprosedyrer, f.eks. STERRAD.


Sikkerhetsråd for vedlikehold

- Alle kirurgiske instrumenter skal håndteres med største forsiktighet under transport, rengjøring, vedlikehold, sterilisering og oppbevaring. Dette gjelder spesielt for blader og fine kjever, som er svært delikate deler.


Montering/demontering




Koble fra håndtak og skaft

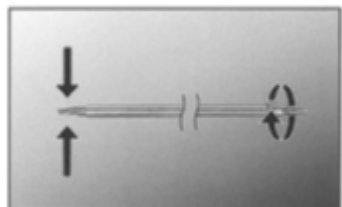

Skru ut innsatsen

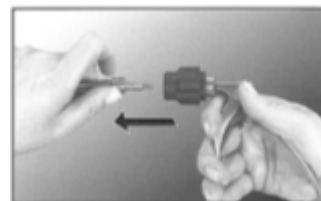


Trekk skaftet ut av koblingen

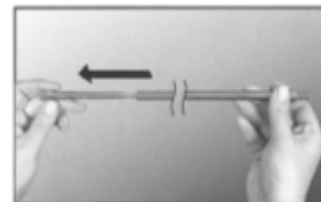


Trekk innsatsen ut av akselen

Detaljvisning av kjeve

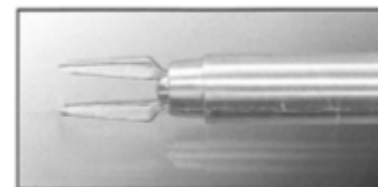

Åpne kjeve

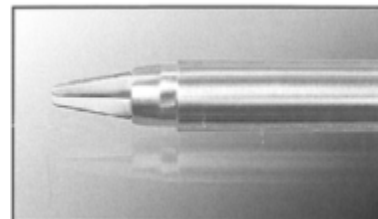

Kjeve lukket

Klemme påføringspincett 10 mm

Klargjøring

- Alle kirurgiske instrumenter må desinfiseres og rengjøres grundig etter hver bruk. Rengjør, sjekk og test hvert instrument nøye. Steriliser alle instrumenter før bruk. En passende rengjørings- og vedlikeholdsprosedyre vil øke instrumentenes levetid. Vær spesielt nøye med spor, låser, lukninger, rør og andre deler som er vanskelige å nå. Endoskopisk klemme for påføring av klemmer bør rengjøres i demontert tilstand (se Montering/demontering). Klemme til åpne operasjoner skal åpnes helt (lås opp fjæren/åpne ringene helt).

Viktig

- Ikke bruk etsende eller ripende rengjøringsmidler (kun myk børste). Rengjøringsmidler med nøytral pH-nivå (7,0) er best egnet.
- Instrumentet er egnet for ultralydrenngjøring.
- Skyll forsiktig med destillert vann
- Oppbevar og steriliser på riktig måte
- Etter rengjøring og skylling må instrumentene tørkes forsiktig. Rørene må blåses ut.
- Standard steriliseringsteknikker
- Det anbefales å sterilisere instrumentene i autoklav.
- Ikke steriliser med varm luft.
- Autoklav Standard sykluser:
Dampsterilisering 134 °C/243 °F i 15 minutter.
Du kan også bruke andre tider og temperaturer, men du bør validere dem først. (Merk: produsenten av autoklaven din må bekrefte temperaturer og steriliseringstider.) Temperaturene i autoklaven bør ikke overstige 137 °C/280 °F.



Merk:

- Følg våre instruksjoner for klargjøring nr. 462 for gjenbrukbare endoskopiinstrumenter (varmebestandige). Hvis du ikke har dem, kan du be om å få dem tilsendt.

Tilbehør og reservedeler

LP371-200	Ethic. Ligaturklemme for klemmesett, rustfritt stål; fargekode: blå; klemstørrelse: liten; emballasje: 36-magasin med 6 klemmer.
LP371-201	Ethic. Ligaturklemme for klemmeapplikator, rustfritt stål; fargekode: hvit; klemstørrelse: medium; emballasje: magasin med 36 stk.
LP371-202	Ethic. Ligaturklips for klipsapplikator, rustfritt stål; fargekode: grønn; klipsstørrelse: mellomstor; emballasje: magasin med 18 klips
LP371-203	Ethic. Ligaturklips for klipsapplikator i rustfritt stål; fargekode: gul; klipsstørrelse: stor; emballasje: magasin med 18 stk. med 6 klips.
LP371-210	Ethic. Ligaturklips for klipsapplikator i titan; fargekode: blå; klipsstørrelse: liten; emballasje: magasin med 36 stk. Med 6 klips
LP371-211	Ethic. Ligaturklips for klipsapplikator i titan; fargekode: blå; klipsstørrelse: liten; pakning: 15 magasiner med 20 klips
LP371-212	Ethic. Ligaturklemme for påsetting av klemme. Pincett i titan; fargekode: hvit; klemstørrelse: medium; emballasje: magasin med 36 stk. Med 6 klemmer
LP371-213	Ethic. Ligaturklemme for påføring av klemmer, titan; fargekode: hvit; klemstørrelse: medium; emballasje: magasin med 15 stk. Med 20 klemmer
LP371-214	Ethic. Ligaturklips for påføring av klips, titan; fargekode: grønn; klipsstørrelse: medium-stor; emballasje: magasin med 18 stk. Med 6 klips
LP371-215	Ethic. Ligaturklips for klipsapplikator i titan; fargekode: gul; klipsstørrelse: stor; pakning: magasin med 18 klips.

Reparasjoner

- Selv når de brukes som forutsatt, utsettes kirurgiske instrumenter for mer eller mindre alvorlig slitasje, avhengig av hvor intensivt de brukes. Denne slitasjen kan ikke unngås av tekniske årsaker.
- Vennligst ikke utfør reparasjoner selv. Service og reparasjoner må kun utføres av oss – produsenten – eller av andre personer vi har autorisert.
- Kirurgiske instrumenter som skal sendes tilbake for reparasjon, må være rengjort, desinfisert og sterilisert.

Symboler og forklaringer

	Følg bruksanvisningen
REF	Bestillingsnummer
	Ikke-sterilt
	Produsent
	Manglende overholdelse av advarsler og forholdsregler kan føre til død eller alvorlig skade
	Partinummer
	CE-merking, nummer på det utpekte organet