

Kleszcze do zakładania klipsów 10 mm



Numerы artykułów

LP371-001	LP371-002	LP371-003
LP371-004	LP371-005	LP371-010
LP371-020	LP371-030	LP371-040
LP371-050	LP371-100	LP371-101
RU 0365-00/08	RU 0365-00/10	RU 0365-00/12
RU 0365-00/19	RU 0365-00/20	RU 0365-00/21
RU 0365-00/22	RU 0365-00/23	RU 0365-00/24
RU 0365-00/25	RU 0365-00/26	RU 0365-00/27
RU 0365-00/41	RU 0365-00/42	RU 0365-00/43
RU 0365-00/44	RU 0365-00/45	RU 0365-00/46
RU 0365-00/47	RU 0365-00/80	RU 0365-00/81

Przeznaczenie

- Decyzja o tym, czy ten produkt medyczny jest odpowiedni, należy do użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego użycia i przygotowania.

Test działania

- Po dostawie i przed każdym użyciem nowe instrumenty muszą zostać poddane dokładnej kontroli wzrokowej oraz testowi sprawności. Jeśli instrumenty wykazują jakiegokolwiek wady zewnętrzne (zadrapania, pęknięcia, rysy, nacięcia, uszkodzoną izolację, wygięte części lub sztywność) lub jeśli nie działają w opisany sposób, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas jako producenta lub naszych partnerów handlowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie należy używać uszkodzonych narzędzi.
- Prosimy o uważne i dokładne zapoznanie się z niniejszą informacją. Niewłaściwe użytkowanie i pielęgnacja, a także nieprawidłowa obsługa mogą spowodować przedwczesne zużycie narzędzi chirurgicznych. Osoby korzystające z tego narzędzia powinny posiadać wiedzę na temat użytkowania i

obsługi narzędzi chirurgicznych, akcesoriów i powiązanych urządzeń.

Pierwsze użycie nowych narzędzi

- Zupełnie nowy instrument należy wyjąć z worka polietylenowego, aby uniknąć kondensacji, i przechowywać w czystym, suchym (maksymalna wilgotność atmosferyczna 75% RH) i przewiewnym pojemniku w temperaturze pokojowej do momentu pierwszego przygotowania.
- Kleszcze do zakładania klipsów są dostarczane w stanie niesterylnym. Instrumenty należy dokładnie wyczyścić i wysterylizować przed pierwszym użyciem oraz przed każdym ponownym użyciem.
- Kleszcze do zakładania klipsów zostały opracowane z myślą o sterylizacji w autoklawie; ten rodzaj sterylizacji ma sprawdzoną historię. Można również stosować procedury niskotemperaturowe, np. STERRAD.


Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa konserwacji

- Wszystkie narzędzia chirurgiczne należy obchodzić się z najwyższą ostrożnością podczas transportu, czyszczenia, konserwacji, sterylizacji i przechowywania. Dotyczy to w szczególności ostrzy i cienkich szczęk, które są bardzo delikatnymi elementami.


Montaż / demontaż




Odłączyć uchwyt od trzonka

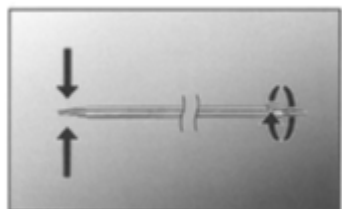

Odkręć wkładkę

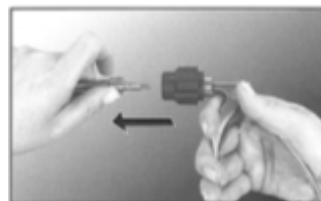


Wyciągnąć trzonek z złącza

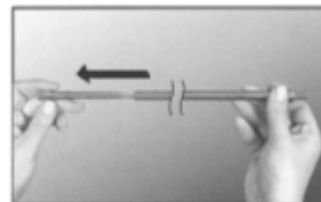


Wyciągnąć wkładkę z wału

Widok szczegółowy szczęki

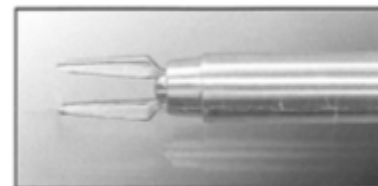

Otwarte szczęki

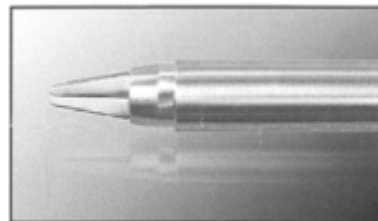

Szczęki zamknięte



Uwaga:

- Prosimy o przestrzeganie naszych instrukcji dotyczących przygotowania nr 462 dla instrumentów endoskopowych wielokrotnego użytku (odpornych na wysoką temperaturę). Jeśli ich nie posiadasz, poproś o nie.

Kleszcze do zakładania klipsów 10 mm

Przygotowanie

- Każdy instrument chirurgiczny musi być dezynfekowany i dokładnie czyszczony po każdym użyciu. Należy dokładnie wyczyścić, sprawdzić i przetestować każdy instrument. Przed użyciem należy wysterylizować wszystkie instrumenty. Odpowiednia procedura czyszczenia i konserwacji wydłuży żywotność instrumentów. Należy zwrócić szczególną uwagę na szczeliny, zamki, zamknięcia, rurki i inne trudno dostępne części. Kleszcze do zakładania klipsów endoskopowych należy czyścić w stanie rozmontowanym (patrz Montaż / Demontaż). Kleszcze do zakładania klipsów do chirurgii otwartej należy całkowicie otworzyć (odblokować sprężynę/całkowicie otworzyć pierścienie).

Uwaga

- Nie należy używać środków czyszczących o działaniu korozyjnym lub rysujących (tylko miękkie szczotki). Najbardziej odpowiednie są środki czyszczące o neutralnym pH (7,0).
- Instrument nadaje się do czyszczenia ultradźwiękowego.
- Dokładnie przepłukać wodą destylowaną
- Przechowywać i sterylizować w odpowiedni sposób
- Po wyczyszczeniu i wypłukaniu instrumenty należy dokładnie wysuszyć. Rurki należy przedmuchać.

- Standardowe techniki sterylizacji
- Zaleca się sterylizację instrumentów w autoklawie.
- Nie sterylizować gorącym powietrzem.
- Standardowe cykle autoklawu:
Sterylizacja parowa 134°C/243°F przez 15 min.
Można również stosować inne czasy i temperatury, ale należy je najpierw zweryfikować. (Uwaga: producent autoklawu musi potwierdzić temperatury i czasy sterylizacji). Temperatura w autoklawie nie powinna przekraczać 137°C/280°F.

Akcesoria i części zamienne

LP371-200	Ethic. Ligaturclip do kleszczyków do zakładania klipsów, stal nierdzewna; kod koloru: niebieski; rozmiar klipsa: mały; opakowanie: magazynek na 36 sztuk z 6 klipsami.
LP371-201	Ethic. Klips do kleszczyków do zakładania klipsów, stal nierdzewna; kod koloru: biały; rozmiar klipsa: średni; opakowanie: magazynek na 36 sztuk z 6 klipsami
LP371-202	Ethic. Klips do kleszczyków do zakładania klipsów, stal nierdzewna; kod koloru: zielony; rozmiar klipsa: średni-duży; opakowanie: magazynek na 18 sztuk z 6 klipsami
LP371-203	Ethic. Klips do kleszczyków do zakładania klipsów ze stali nierdzewnej; kod koloru: żółty; rozmiar klipsa: duży; opakowanie: kaseta na 18 sztuk z 6 klipsami.
LP371-210	Ethic. Klips do kleszczyków do zakładania klipsów, tytan; kod koloru: niebieski; rozmiar klipsa: mały; opakowanie: magazynek na 36 sztuk z 6 klipsami
LP371-211	Ethic. Klips do kleszczyków do zakładania klipsów, tytan; kod koloru: niebieski; rozmiar klipsa: mały; opakowanie: kaseta na 15 sztuk z 20 klipsami
LP371-212	Ethic. Klips do zakładania klipsów. Kleszcze tytanowe; kod koloru: biały; rozmiar klipsa: średni; opakowanie: magazynek na 36 sztuk z 6 klipsami
LP371-213	Ethic. Ligaturclip do zakładania klipsów; kleszcze tytanowe; kod koloru: biały; rozmiar klipsa: średni; opakowanie: magazynek na 15 sztuk; z 20 klipsami
LP371-214	Ethic. Klips do kleszczyków do zakładania klipsów; kod koloru: zielony; rozmiar klipsa: średni-duży; opakowanie: kaseta na 18 sztuk z 6 klipsami

LP371-215	Ethic. Klips do kleszczyków do zakładania klipsów, tytan; kod koloru: żółty; rozmiar klipsa: duży; opakowanie: kaseta na 18 sztuk. Z 6 klipsami
-----------	---

Naprawy

- Nawet przy prawidłowym użytkowaniu narzędzia chirurgiczne ulegają mniej lub bardziej znacznemu zużyciu, w zależności od intensywności użytkowania. Zużycia tego nie da się uniknąć ze względów technicznych.
- Prosimy nie przeprowadzać żadnych napraw samodzielnie. Serwisowanie i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez nas – producenta – lub przez inne osoby, które upoważniłimy.
- Instrumenty chirurgiczne, które mają zostać odesłane do naprawy, muszą być oczyszczone, zdezynfekowane i wysterylizowane.

Symbole i objaśnienia

	Należy przestrzegać instrukcji użytkowania
REF	Numer zamówienia
	Nesterylne
	Producent
	Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i środków ostrożności może spowodować śmierć lub poważne obrażenia
LOT	Numer partii
	Numer jednostki notyfikowanej oznaczenia CE



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Niemcy
Tel. +49 7463 9956-0
Faks +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com