

Pinça para aplicação de cliques 10 mm

Pinça para aplicar cliques de 10 mm



Números de artigo

LP371-001	LP371-002	LP371-003
LP371-004	LP371-005	LP371-010
LP371-020	LP371-030	LP371-040
LP371-050	LP371-100	LP371-101
RU 0365-00/08	RU 0365-00/10	RU 0365-00/12
RU 0365-00/19	RU 0365-00/20	RU 0365-00/21
RU 0365-00/22	RU 0365-00/23	RU 0365-00/24
RU 0365-00/25	RU 0365-00/26	RU 0365-00/27
RU 0365-00/41	RU 0365-00/42	RU 0365-00/43
RU 0365-00/44	RU 0365-00/45	RU 0365-00/46
RU 0365-00/47	RU 0365-00/80	RU 0365-00/81

Utilização prevista

- Cabe ao utilizador decidir se este produto médico é adequado ou não. Não assumimos qualquer responsabilidade pelas consequências de uma utilização e preparação incorretas.

Teste de funcionamento

- Após a entrega e antes de cada utilização, os instrumentos novos devem ser submetidos a uma inspeção visual minuciosa e a um teste de funcionalidade. Se os instrumentos apresentarem quaisquer defeitos externos (arranhões, quebras, fissuras, entalhes, isolamento danificado, peças dobradas ou rigidez) ou se não funcionarem da forma descrita, informe-nos imediatamente, enquanto fabricante, ou aos nossos parceiros de vendas.

Advertências e precauções

- Não utilize instrumentos danificados.
- Leia estas informações com atenção e na íntegra. A utilização indevida e os cuidados inadequados, bem como o manuseamento incorreto, podem causar uma degradação precoce dos instrumentos cirúrgicos. As pessoas que utilizam este instrumento devem ter conhecimentos sobre a utilização e o manuseamento

de instrumentos cirúrgicos, acessórios e dispositivos associados.

Primeira utilização de instrumentos novos

- O instrumento novo deve ser retirado da sua embalagem de polietileno para evitar condensação e deve ser armazenado limpo, seco (humidade atmosférica máxima de 75% HR) e arejado num recipiente à temperatura ambiente até à primeira preparação.
- As pinças de aplicação de cliques são fornecidas não esterilizadas. Os instrumentos devem ser cuidadosamente limpos e esterilizados antes da primeira utilização e antes de cada reutilização.
- As pinças de aplicação de cliques foram desenvolvidas para esterilização em autoclave, sendo que este tipo de esterilização tem um historial comprovado. Também pode utilizar procedimentos a baixa temperatura, por exemplo, STERRAD.

Conselhos de segurança para a manutenção

- Todos os instrumentos cirúrgicos devem ser manuseados com o máximo cuidado durante o transporte, limpeza, manutenção, esterilização e armazenamento. Especialmente no caso das lâminas e mandíbulas finas, que são peças muito delicadas.


Montagem / Desmontagem




Desligue o cabo e a haste



Desaparafuse o inserto

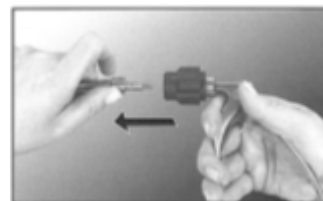


Puxe a haste para fora do acoplamento

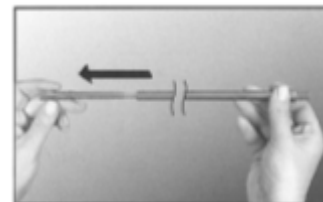


Retire o inserto do eixo

Vista detalhada da garra

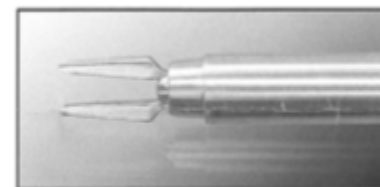

Mandíbulas abertas

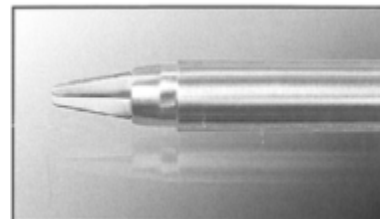

Mandíbulas fechadas

Preparação

- Todos os instrumentos cirúrgicos devem ser desinfetados e limpos cuidadosamente após cada utilização. Limpe, verifique e teste cada instrumento cuidadosamente. Esterilize todos os instrumentos antes da utilização. Um procedimento adequado de limpeza e manutenção aumentará a vida útil dos instrumentos. Tenha especial cuidado com ranhuras, fechos, tubos e outras partes de difícil acesso. As pinças de aplicação de cliques endoscópicos devem ser limpas desmontadas (ver Montagem/Desmontagem). As pinças de aplicação de cliques para cirurgia aberta devem ser abertas completamente (desbloqueie a mola/abertura total dos anéis).

Atenção

- Não utilize produtos de limpeza corrosivos ou abrasivos (apenas escovas macias). Os produtos de limpeza com pH neutro (7,0) são os mais adequados.
- O instrumento é adequado para limpeza por ultrassons.
- Enxague cuidadosamente com água destilada
- Armazene e esterilize adequadamente
- Após a limpeza e o enxaguamento, os instrumentos devem ser cuidadosamente secos. Os tubos devem ser soprados.
- Técnicas de esterilização padrão
- Recomenda-se a esterilização dos instrumentos em autoclave.
- Não esterilize com ar quente.
- Ciclos padrão da autoclave:
Esterilização a vapor a 134 °C/243 °F durante 15 min. Também pode utilizar outros tempos e temperaturas, mas deve validá-los primeiro. (Nota: o fabricante da sua autoclave deve confirmar as temperaturas e os tempos de esterilização.) As temperaturas na autoclave não devem exceder 137 °C/280 °F.



Nota:

- Por favor, siga as nossas instruções de preparação n.º 462 para instrumentos endoscópicos reutilizáveis (resistentes ao calor). Caso não as tenha, solicite-as.

Acessórios e peças sobressalentes

LP371-200	Ethic. Clipe de ligadura para pinça de aplicação de cliques, aço inoxidável; código de cor: azul; tamanho do clipe: pequeno; embalagem: cartucho de 36 com 6 cliques.
LP371-201	Ethic. Clipe de ligadura para pinça de aplicação de cliques, aço inoxidável; código de cor: branco; tamanho do clipe: médio; embalagem: cartucho de 36 com 6 cliques
LP371-202	Ethic. Clipe de ligadura para pinça de aplicação de cliques em aço inoxidável; código de cor: verde; tamanho do clipe: médio-grande; embalagem: cartucho de 18 com 6 cliques
LP371-203	Ethic. Clipe de ligadura para pinça de aplicação de cliques em aço inoxidável; código de cor: amarelo; tamanho do clipe: grande; embalagem: cartucho de 18 com 6 cliques.
LP371-210	Ethic. Clipe de ligadura para pinça de aplicação de cliques em titânio; código de cor: azul; tamanho do clipe: pequeno; embalagem: cartucho de 36 com 6 cliques
LP371-211	Ethic. Clipe de ligadura para pinça de aplicação de cliques em titânio; código de cor: azul; tamanho do clipe: pequeno; embalagem: cartucho de 15 com 20 cliques
LP371-212	Ethic. Clipe de ligadura para aplicação de cliques. Pinça de titânio; código de cor: branco; tamanho do clipe: médio; embalagem: cartucho de 36 com 6 cliques
LP371-213	Ethic. Clipe de ligadura para pinça de aplicação de cliques em titânio; código de cor: branco; tamanho do clipe: médio; embalagem: cartucho de 15 com 20 cliques

LP371-214	Ethic. Clipe de ligadura para pinça de aplicação de cliques em titânio; código de cor: verde; tamanho do clipe: médio-grande; embalagem: cartucho de 18 com 6 cliques
LP371-215	Ethic. Clipe de ligadura para pinça de aplicação de cliques em titânio; código de cor: amarelo; tamanho do clipe: grande; embalagem: cartucho de 18. Com 6 cliques

Reparações

- Mesmo quando utilizados conforme previsto, os instrumentos cirúrgicos estão sujeitos a um desgaste mais ou menos grave, dependendo da intensidade da sua utilização. Este desgaste não pode ser evitado por razões técnicas.
- Por favor, não efetue quaisquer reparações por conta própria. A manutenção e as reparações só podem ser realizadas por nós – o fabricante – ou por outras pessoas por nós autorizadas.
- Os instrumentos cirúrgicos que devam ser devolvidos para reparação devem ser limpos, desinfetados e esterilizados.

Símbolos e explicações

	Siga as instruções de utilização
REF	Número de encomenda
	Não esterilizado
	Fabricante
	O não cumprimento das advertências e precauções pode resultar em morte ou ferimentos graves
LOT	Número de lote
CE	Número do organismo notificado da marcação CE