

Kliešte na upevňovanie spôn 10 mm



Číslo výrobkov

LP371-001	LP371-002	LP371-003
LP371-004	LP371-005	LP371-010
LP371-020	LP371-030	LP371-040
LP371-050	LP371-100	LP371-101
RU 0365-00/08	RU 0365-00/10	RU 0365-00/12
RU 0365-00/19	RU 0365-00/20	RU 0365-00/21
RU 0365-00/22	RU 0365-00/23	RU 0365-00/24
RU 0365-00/25	RU 0365-00/26	RU 0365-00/27
RU 0365-00/41	RU 0365-00/42	RU 0365-00/43
RU 0365-00/44	RU 0365-00/45	RU 0365-00/46
RU 0365-00/47	RU 0365-00/80	RU 0365-00/81

Určené použitie

- Rozhodnutie o vhodnosti použitia tohto zdravotníckeho výrobku je na užívateľovi. Nezodpovedáme za následky nesprávneho použitia a prípravy.

Funkčná skúška

- Po dodaní a pred každým použitím musia nové nástroje prejsť dôkladnou vizuálnou kontrolou a musia byť otestované z hľadiska funkčnosti. Ak nástroje vykazujú akékoľvek vonkajšie chyby (škrabance, zlomeniny, praskliny, zárezy, poškodenú izoláciu, ohnuté časti alebo tuhosť) alebo ak nefungujú spôsobom, ktorý je popísaný, informujte o tom prosím ihneď nás ako výrobcu alebo našich obchodných partnerov.

Upozornenia a bezpečnostné opatrenia

- Nepoužívajte poškodené nástroje.
- Tieto informácie si prosím pozorne a v celom rozsahu prečítajte. Nesprávne používanie a starostlivosť, ako aj nesprávna manipulácia môžu spôsobiť predčasné opotrebovanie chirurgických nástrojov. Osoby, ktoré používajú tento nástroj, by mali mať znalosti o

používaní a manipulácii s chirurgickými nástrojmi, príslušenstvom a súvisiacimi zariadeniami.

Prvé použitie nových nástrojov

- Zcela nový nástroj je potrebné vybrať z polyetylénového vrečka, aby sa zabránilo kondenzácii, a až do prvého použitia ho je potrebné uchovávať v čistom, suchom (max. vlhkosť vzduchu 75 % RH) a vetranom ochrannom obale pri izbovej teplote.
- Kliešte na aplikáciu spôn sa dodávajú nesterilné. Nástroje musia byť pred prvým použitím a pred každým ďalším použitím dôkladne vyčistené a sterilizované.
- Kliešte na aplikáciu spôn boli vyvinuté pre sterilizáciu v autokláve, tento druh sterilizácie má overenú históriu. Môžete použiť aj postupy pri nízkych teplotách, napr. STERRAD.


Bezpečnostné pokyny pre údržbu

- So všetkými chirurgickými nástrojmi sa musí zaobchádzať s najväčšou opatnosťou počas prepravy, čistenia, starostlivosti, sterilizácie a skladovania. Platí to najmä pre čepele a jemné čeľuste, ktoré sú veľmi citlivé časti.


Montáž / demontáž




Odpojte rukoväť a hriadeľ

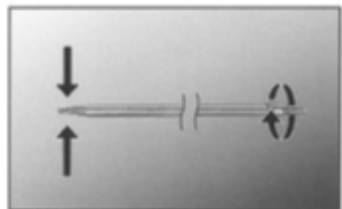

Odskrutkujte vložku

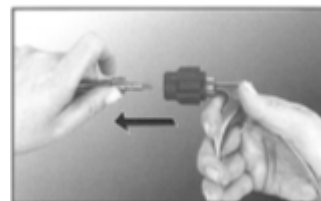


Vytiahnite hriadeľ zo spojky

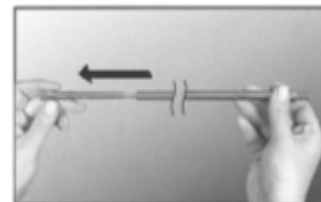


Vytiahnite vložku z hriadeľa

Detailný pohľad na čeľusť

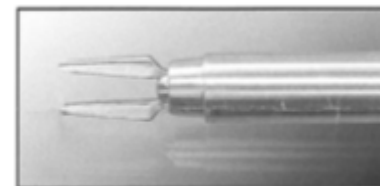

Otvorené čeľuste

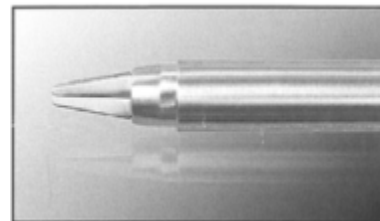

Zatvorené čeľuste

Príprava

- Každý chirurgický nástroj musí byť po každom použití dezinfikovaný a dôkladne vyčistený. Každý nástroj starostlivo vyčistite, skontrolujte a otestujte. Pred použitím všetky nástroje sterilizujte. Vhodný postup čistenia a údržby predlži životnosť nástrojov. Venujte osobitnú pozornosť drážkam, zámkom, uzáverom, trubicam a iným ťažko dostupným častiam. Endoskopické kliešte na aplikáciu svoriek by sa mali čistiť v rozobratom stave (pozri Montáž / Demontáž). Kliešte na aplikáciu spôn pre otvorenú chirurgiu by mali byť úplne otvorené (odblokuje pružinu/úplné otvorenie krúžkov).

Upozornenie

- Nepoužívajte žiadne korozívne alebo škrabacie čistiace prostriedky (len mäkké kefy). Najvhodnejšie sú čistiace prostriedky s neutrálnym pH (7,0).
- Nástroj je vhodný na čistenie ultrazvukom.
- Opatrne opláchnite destilovanou vodou
- Skladujte a sterilizujte primerane
- Po vyčistení a opláchnutí musia byť nástroje starostlivo vysušené. Trubice musia byť vyfúkané.
- Štandardné sterilizačné techniky
- Odporúča sa sterilizovať nástroje v autokláve.
- Nesterilizujte v horúcom vzduchu.
- Štandardné cykly v autokláve:
Sterilizácia parou pri 134 °C/243 °F po dobu 15 minút. Môžete použiť aj iné časy a teploty, ale najskôr ich musíte overiť. (Poznámka: výrobca vášho autoklávu musí potvrdiť teploty a časy sterilizácie.) Teploty v autokláve by nemali prekročiť 137 °C/280 °F.

 Poznámka:	- Dodržiavajte naše pokyny pre prípravu č. 462 pre opakovane použiteľné endoskopické nástroje (tepelne odolné). Ak ich nemáte, požiadajte o ne.
---------------	---

Príslušenstvo a náhradné diely

LP371-200	Ethic. Ligaturclip pre kliešte na aplikáciu spôn, nerezová ocel'; farebný kód: modrý; veľkosť spony: malá; balenie: zásobník na 36 kusov s 6 sponami.
LP371-201	Ethic. Ligaturclip pre kliešte na aplikáciu spôn, nerezová ocel'; farebný kód: biela; veľkosť spony: stredná; balenie: zásobník na 36 kusov s 6 sponami
LP371-202	Ethic. Ligaturclip pre kliešte na aplikáciu spôn, nerezová ocel'; farebný kód: zelená; veľkosť spony: stredne veľká; balenie: zásobník na 18 kusov s 6 sponami
LP371-203	Ethic. Ligatúrna sponka pre kliešte na aplikáciu sponiek z nehrdzavejúcej ocele; farebný kód: žltá; veľkosť sponky: veľká; balenie: zásobník na 18 kusov s 6 sponkami.
LP371-210	Ethic. Ligaturclip pre kliešte na aplikáciu spôn z titánu; farebný kód: modrý; veľkosť spony: malá; balenie: zásobník na 36 kusov s 6 sponami
LP371-211	Ethic. Ligaturclip pre kliešte na aplikáciu spôn z titánu; farebný kód: modrý; veľkosť spony: malá; balenie: zásobník na 15 kusov s 20 sponami
LP371-212	Ethic. Ligatúrna sponka na aplikáciu sponiek. Titánové kliešte; farebný kód: biela; veľkosť sponky: stredná; balenie: zásobník na 36 kusov s 6 sponkami
LP371-213	Ethic. Ligaturclip na aplikáciu sponiek titánové kliešte; farebný kód: biela; veľkosť sponky: stredná; balenie: zásobník na 15 kusov S 20 sponkami
LP371-214	Ethic. Ligaturclip pre kliešte na aplikáciu spôn; farebný kód: zelená; veľkosť spony: stredná až veľká; balenie: zásobník na 18 kusov S 6 sponami

LP371-215	Ethic. Ligaturclip pre titánové kliešte na aplikáciu spôn; farebný kód: žltá; veľkosť spony: veľká; balenie: zásobník s 18 kusmi. S 6 sponami
-----------	---

Opravy

- Aj pri správnom používaní sú chirurgické nástroje vystavené viac či menej silnému opotrebeniu, v závislosti od intenzity používania. Toto opotrebenie nie je možné z technických dôvodov zabrániť.
- Prosím, nevykonávajte žiadne opravy sami. Servis a opravy smie vykonávať iba naša spoločnosť – výrobca – alebo iné osoby, ktoré sme poverili.
- Chirurgické nástroje, ktoré sa majú zaslať na opravu, musia byť vyčistené, dezinfikované a sterilizované.

Symbody a vysvetlivky

	Dodržiavajte návod na použitie
REF	Objednávacie číslo
	Nesterilné
	Výrobca
	Nedodržanie varovaní a bezpečnostných opatrení môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie
LOT	Číslo šarže
CE	Číslo notifikovaného orgánu pre označenie CE



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Nemecko
Tel. +49 7463 9956-0
Fax +49 7463 9956-56
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com