

Klips Takma Pensi 10 mm



Ürün numaraları

LP371-001	LP371-002	LP371-003
LP371-004	LP371-005	LP371-010
LP371-020	LP371-030	LP371-040
LP371-050	LP371-100	LP371-101
RU 0365-00/08	RU 0365-00/10	RU 0365-00/12
RU 0365-00/19	RU 0365-00/20	RU 0365-00/21
RU 0365-00/22	RU 0365-00/23	RU 0365-00/24
RU 0365-00/25	RU 0365-00/26	RU 0365-00/27
RU 0365-00/41	RU 0365-00/42	RU 0365-00/43
RU 0365-00/44	RU 0365-00/45	RU 0365-00/46
RU 0365-00/47	RU 0365-00/80	RU 0365-00/81

Kullanım Amacı

- Bu tıbbi ürünün uygun olup olmadığına karar vermek kullanıcının sorumluluğundadır. Yanlış kullanım ve hazırlamadan doğacak sonuçlar konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

İşlev testi

- Teslimattan sonra ve her kullanımdan önce yeni aletler kapsamlı bir görsel incelemeye tabi tutulmalı ve işlevsellik açısından test edilmelidir. Aletlerde herhangi bir dış kusur (çizik, kırık, çatlak, çentik, hasarlı yalıtım, bükülmüş parçalar veya sertlik) görülürse veya aletler açıklanan şekilde çalışmazsa, lütfen üretici olarak bizi veya satış ortaklarımızı derhal bilgilendiriniz.

Uyarılar ve önlemler

- Hasarlı aletleri kullanmayın.
- Lütfen bu bilgileri dikkatlice ve eksiksiz olarak okuyun. Yanlış kullanım ve bakım ile uygunsuz kullanım, cerrahi aletlerin erken aşınmasına neden olabilir. Bu aleti kullanan kişiler, cerrahi aletlerin, aksesuarların ve ilgili cihazların kullanımı ve bakımı konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

Yeni aletlerin ilk kullanımı

- Yoğuşmayı önlemek için yepyeni alet polietilen torbasından çıkarılmalı ve ilk hazırlık işlemine kadar temiz, kuru (maks. %75 bağıl nem) ve havalandırılmış bir kaptaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
- Klips uygulama forsepsleri steril olmayan şekilde teslim edilir. Aletler, ilk kullanımdan önce ve her yeniden kullanımdan önce iyice temizlenmeli ve sterilize edilmelidir.
- Klips uygulama forsepsleri otoklavda sterilizasyon için geliştirilmiştir; bu tür sterilizasyonun kanıtlanmış bir geçmişi vardır. STERRAD gibi düşük sıcaklık prosedürlerini de kullanabilirsiniz.


Bakım ve güvenlik tavsiyeleri

- Tüm cerrahi aletler, taşıma, temizlik, bakım, sterilizasyon ve depolama sırasında azami özenle kullanılmalıdır. Özellikle bıçaklar ve ince çeneler gibi çok hassas parçalar için.


Montaj / Demontaj




Sapı ve şaftı ayırın

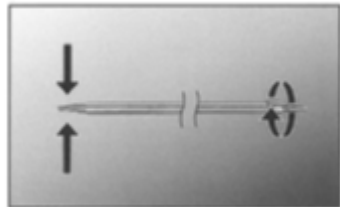

Ek parçayı sökün

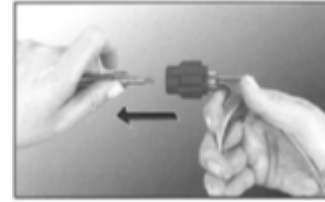


Şaftı bağlantı parçasından dışarı çekin

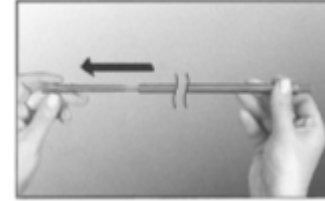


Ek parçayı şafttan çıkarın

Detay görünümü Çene

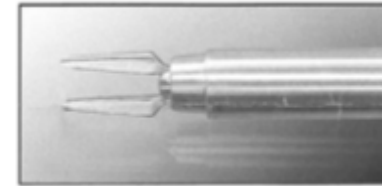

Açılmış çeneler

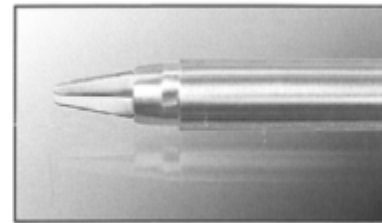

Çeneler kapalı

Hazırlık

- Her cerrahi alet, her kullanımdan sonra dezenfekte edilmeli ve özellikle temizlenmelidir. Her aleti dikkatlice temizleyin, kontrol edin ve test edin. Kullanmadan önce tüm aletleri sterilize edin. Uygun bir temizlik ve bakım prosedürü, aletlerin ömrünü uzatacaktır. Yuvalara, kilitlere, kapaklara, tüplere ve ulaşılması zor diğer parçalara özel dikkat gösterin. Endoskopik klips uygulama forsepsleri, parçalarına ayrılmış olarak temizlenmelidir (bkz. Montaj / Demontaj). Açık cerrahi için klips uygulama forsepsleri tamamen açılmalıdır (yay kilidini açın/halkaları tamamen açın).

Dikkat

- Aşındırıcı veya çizici temizleyiciler kullanmayın (sadece yumuşak fırça ile temizleyin). Nötr pH seviyesine (7,0) sahip temizleyiciler en uygundur.
- Alet ultrasonik temizliğe uygundur.
- Damıtılmış suyla dikkatlice durulayın
- Uygun şekilde saklayın ve sterilize edin
- Temizlik ve durulamadan sonra aletler dikkatlice kurutulmalıdır. Tüpün içi üflenerek boşaltılmalıdır.
- Standart sterilizasyon teknikleri
- Aletlerin otoklavda sterilize edilmesi önerilir.
- Sıcak hava ile sterilize etmeyin.
- Otoklav Standart döngüler: Buhar sterilizasyonu 134°C/ 243°F, 15 dakika. Başka süre ve sıcaklıklar da kullanabilirsiniz, ancak bunları önce doğrulamanız gerekir. (Not: Otoklavınızın üreticisi, sıcaklıkları ve sterilizasyon sürelerini onaylamalıdır.) Otoklavdaki sıcaklıklar 137°C/280°F'yi geçmemelidir.

	Not:
	- Yeniden kullanılabilir endoskopi aletleri (ısıya dayanıklı) için #462 numaralı hazırlık talimatlarımıza uyun. Bu talimatlara sahip değilseniz, lütfen talep edin.

Aksesuarlar ve yedek parçalar

LP371-200	Ethic. Klips uygulama forseps için ligatür klipsi, paslanmaz çelik; renk kodu: mavi; klips boyutu: küçük; ambalaj: 6 klipsli 36'lık şarjör.
LP371-201	Ethic. Klips uygulama forseps için Ligaturclip, paslanmaz çelik; renk kodu: beyaz; klips boyutu: orta; ambalaj: 6 klipsli 36'lık şarjör
LP371-202	Ethic. Klips uygulama forseps için Ligaturclip, paslanmaz çelik; renk kodu: yeşil; klips boyutu: orta-büyük; ambalaj: 6 klipsli 18'lik şarjör
LP371-203	Ethic. Paslanmaz çelik klips uygulama forseps için Ligaturclip; renk kodu: sarı; klips boyutu: büyük; ambalaj: 18'lik şarjör, 6 klipsli.
LP371-210	Ethic. Klips uygulama forseps için ligatür klipsi titanyum; renk kodu: mavi; klips boyutu: küçük; ambalaj: 36'lık kutu 6 klips ile birlikte
LP371-211	Ethic. Klips uygulama forseps için titanyum ligatür klipsi: renk kodu: mavi; klips boyutu: küçük; ambalaj: 15'lik kutu, 20 klips ile
LP371-212	Ethic. Klips takma için ligatür klipsi. Titanyum forseps; renk kodu: beyaz; klips boyutu: orta; ambalaj: 36'lık şarjör, 6 klipsli
LP371-213	Ethic. Klips takma forseps titanyum; renk kodu: beyaz; klips boyutu: orta; ambalaj: 15'lik şarjör 20 klips ile birlikte
LP371-214	Ethic. Klips uygulama forseps için ligatür klipsi; renk kodu: yeşil; klips boyutu: orta-büyük; ambalaj: 18'lik şarjör 6 klips ile birlikte
LP371-215	Ethic. Klips uygulama forseps için titanyum ligatür klipsi; renk kodu: sarı; klips boyutu: büyük; ambalaj: 18'lik şarjör. 6 klips ile birlikte

Onarım

- Amacına uygun olarak kullanıldığında bile cerrahi aletler, kullanım yoğunluğuna bağlı olarak az ya da çok aşınmaya maruz kalır. Bu aşınma, teknik nedenlerden dolayı kaçınılmazdır.
- Lütfen onarımları kendiniz yapmayınız. Bakım ve onarımlar sadece biz (üretici) veya yetkilendirdiğimiz kişiler tarafından yapılabilir.
- Onarım için geri gönderilecek cerrahi aletler temizlenmeli, dezenfekte edilmeli ve sterilize edilmelidir.

Semboller ve açıklamalar

	Kullanım talimatlarına uyun
REF	Sipariş numarası
	Steril değildir
	Üretici
	Uyarı ve önlemlere uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilir
LOT	Lot numarası
CE	CE işareti onaylanmış kuruluş numarası

