



Ηλεκτρική σκούπα για το ταλαντούμενο πριόνι για γύψο STANDARD με προαιρετικά εξαρτήματα



RUDOLF Medical GmbH + Co KG
Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen an der Donau,
Γερμανία
Τηλ. +49 7463 9956-0
sales@RUDOLF-med.com
www.RUDOLF-med.com

D0661 / Rev F / ACR01110 / 2026-06-19



ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΪΟΝ

Αυτές οι οδηγίες χρήσης αναφέρονται στις ηλεκτρικές σκούπες RUDOLF Medical που προορίζονται για χρήση με τα πριόνια γύψου RUDOLF Medical «STANDARD». Έχετε στην κατοχή σας ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, η σωστή χειρισμός και χρήση του οποίου περιγράφεται παρακάτω.

Μόνο για επαγγελματική χρήση: Τα εργαλεία προορίζονται για χρήση μόνο από επαγγελματίες χρήστες (χειρουργούς, νοσηλευτές χειρουργείου, τεχνικούς επανεπεξεργασίας ιατρικών συσκευών).



Οι ηλεκτρικές σκούπες RUDOLF Medical για ταλαντευόμενα πριόνια γύψου διατίθενται μη αποστειρωμένες. Η ηλεκτρική σκούπα και τα εξαρτήματά της πρέπει να καθαρίζονται μετά από κάθε χρήση.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Η ηλεκτρική σκούπα προορίζεται για την απορρόφηση της σκόνης που παράγεται από το πριόνι γύψου κατά την αφαίρεση του γύψου από τον χώρο εργασίας.

Πληθυσμός ασθενών: Δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τον πληθυσμό των ασθενών. Αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια και την εμπειρία του ιατρικού επαγγελματία να αποφασίσει εάν το όφελος υπερτερεί του κινδύνου στον συγκεκριμένο πληθυσμό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Μην καρφώνετε ή βιδώνετε ετικέτες ή πινακίδες στη συσκευή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην προστατευτική μόνωση. Συνιστάται η χρήση αυτοκόλλητων ετικετών.
- Χρησιμοποιείτε μόνο βύσματα και καλώδια που δεν έχουν υποστεί ζημιά. Ελέγχετε τα καλώδια και τα βύσματα τακτικά.
- Η τάση της ηλεκτρικής σκούπας πρέπει να ταιριάζει με την τάση του δικτύου και την τάση του πριονιού για γύψο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα.
- Φοράτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας, όπως προστατευτικά γυαλιά, προστασία ακοής και γάντια.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα με κίνδυνο έκρηξης.
- Τα φίλτρα πρέπει να είναι πάντα τοποθετημένα κατά τη διάρκεια της αναρρόφησης.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ: ΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ελέγξτε τα εξής:

- Εξωτερικές φθορές (π.χ. ελαττωματικό καλώδιο, παραμορφωμένο βύσμα, βαθουλώματα, ρωγμές)
- Σωστή λειτουργία
- Δακτύλιος στεγανοποίησης για ρωγμές και παραμορφώσεις

Δείτε επίσης την ενότητα «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ».


ΣΚΟΥΠΑ ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΠΡΙΟΝΙ ΓΙΑ ΓΥΨΟ ΤΥΠΟΥ STANDARD

Περιεχόμενα συσκευασίας:

RU 6220-60	Ηλεκτρική σκούπα μόνο για το ταλαντευόμενο πριόνι γύψου STANDARD, περιλαμβάνει: 1 καλάθι φίλτρου 1 φίλτρο Eco από φλιν 1 σακούλα φίλτρου από φλιν
D0661	Οδηγίες χρήσης (online)

ΕΝΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΑΚΟΎΥΛΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ


	Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
①	Ξεκλειδώστε την κεφαλή αναρρόφησης και αφαιρέστε την. Αφαιρέστε το καλάθι φίλτρου.
②	Τοποθετήστε τη σακούλα φίλτρου.
③	Τοποθετήστε το καλάθι φίλτρου.
	Τοποθετήστε ξανά την κεφαλή αναρρόφησης στη βάση της ηλεκτρικής σκούπας και ασφαλίστε την στη θέση της. Θα ακούσετε την κεφαλή αναρρόφησης να κλειδώνει στη θέση της.

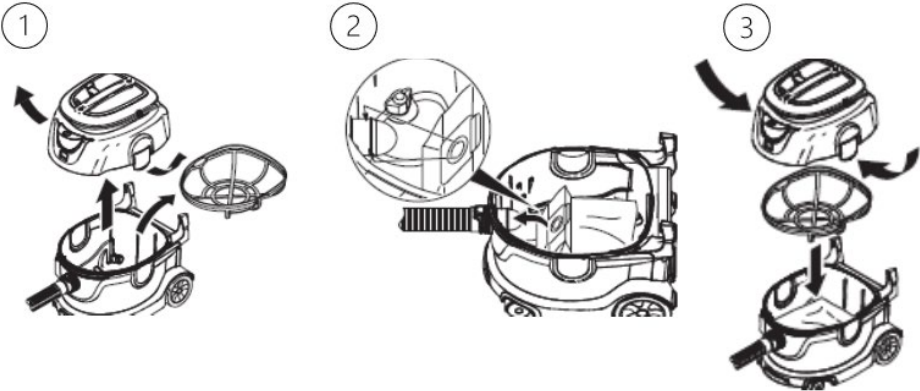

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


Θέστε σε λειτουργία χειροκίνητα

①	Συνδέστε τον σωλήνα αναρρόφησης, ο οποίος πρέπει να ακουστεί να κλειδώνει στη θέση του.
②	Συνδέστε το φις τροφοδοσίας.
③	Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία.

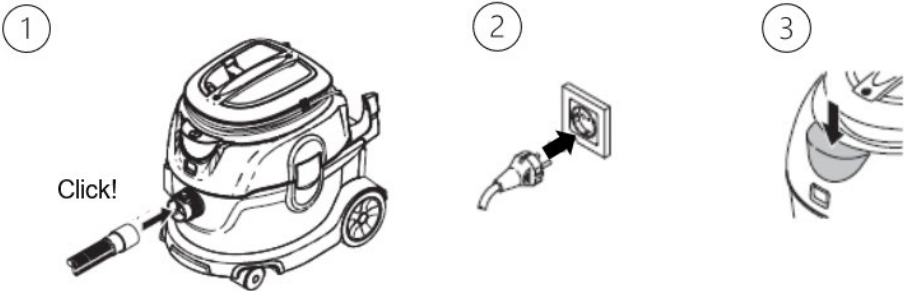

Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ηλεκτρικής σκούπας

- (Α) Συνδέστε το φις τροφοδοσίας του ταλαντευόμενου πριονιού σοβά στη σκούπα.
- (Β) Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα.
- (C) Η ενδεικτική λυχνία ανάβει και η ηλεκτρική σκούπα ενεργοποιείται για περίπου 8 δευτερόλεπτα για έλεγχο. Η ηλεκτρική σκούπα βρίσκεται πλέον σε κατάσταση αναμονής.

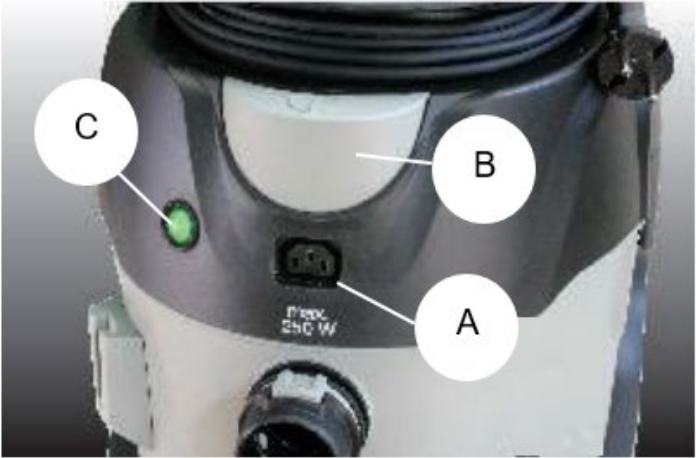


Σημειώσεις:

- Η ηλεκτρική σκούπα ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτόματα όταν το παλμικό πριόνι γύψου βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
- Εάν η ηλεκτρική σκούπα ενεργοποιηθεί ξανά σε λιγότερο από 4 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίησή της από το πριόνι γύψου, το σύστημα αναρρόφησης θα συνεχίσει να λειτουργεί συνεχώς.
- Η ηλεκτρική σκούπα έχει χρόνο υπερκίνησης έως 8 δευτερόλεπτα για να διασφαλιστεί ότι ο σωλήνας αναρρόφησης έχει αδειάσει εντελώς.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΦΙΛΤΡΟΥ (REF RZ6220-14, RZ6220-63, RZ6220-64)




①	Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα.
②	Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
③	Ξεκλειδώστε την κεφαλή αναρρόφησης και αφαιρέστε την. Αφαιρέστε το καλάθι του φίλτρου.
④	Αλλάξτε τη σακούλα φίλτρου. A = Αφαιρέστε τη γεμάτη σακούλα φίλτρου B = Τοποθετήστε νέο σάκο φίλτρου
⑤	Τοποθετήστε το καλάθι φίλτρου. Τοποθετήστε ξανά την κεφαλή αναρρόφησης στη βάση της ηλεκτρικής σκούπας και ασφαλίστε την στη θέση της. Θα ακούσετε την κεφαλή αναρρόφησης να κλειδώνει στη θέση της.

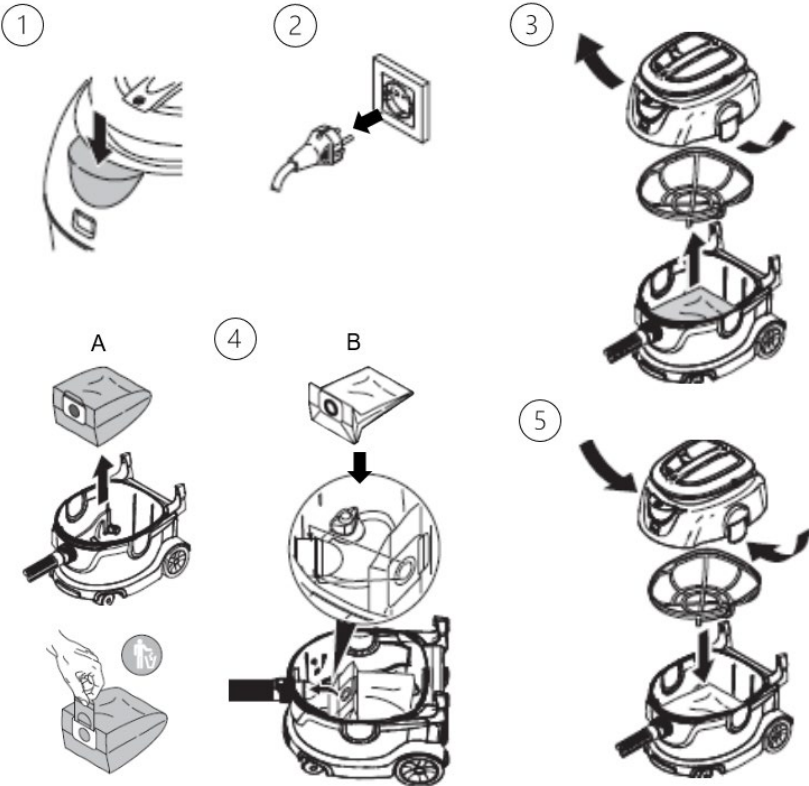

ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ (φίλτρο από φλιν REF RZ6220-12, RZ6220-13)




①	Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα.
②	Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
③	Αφήστε την ηλεκτρική σκούπα να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά, εάν ήταν προηγουμένως σε λειτουργία.
④	Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου. Αντικαταστήστε το φίλτρο εξαγωγής αέρα. Κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου, το οποίο πρέπει να ακουστεί να κλειδώνει στη θέση του.

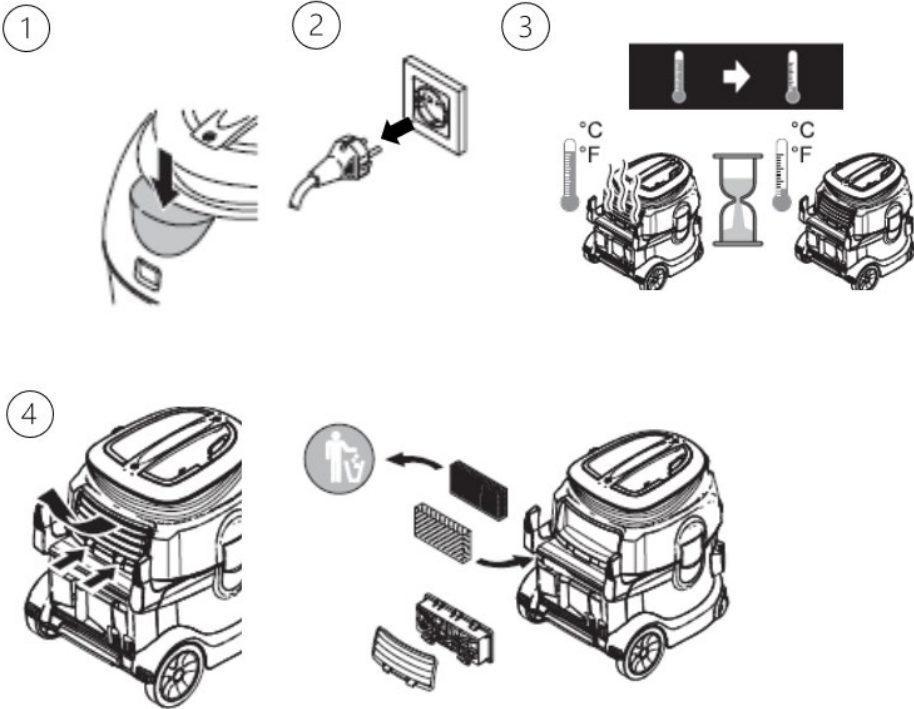

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (REF RZ6220-15)



1	Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα.
2	Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
3	Αφήστε τη σκούπα να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά, εάν ήταν προηγουμένως σε λειτουργία.
4	1. Ξεκλειδώστε την κεφαλή αναρρόφησης και αφαιρέστε την. a) Αφαιρέστε το φίλτρο προστασίας κινητήρα από την κεφαλή αναρρόφησης και απορρίψτε το σύμφωνα με τις οδηγίες. b) Τοποθετήστε το νέο φίλτρο προστασίας κινητήρα στην κεφαλή αναρρόφησης.
5	Τοποθετήστε το καλάθι φίλτρου. Τοποθετήστε ξανά την κεφαλή αναρρόφησης στη βάση της ηλεκτρικής σκούπας και ασφαλίστε την στη θέση της. Θα ακούσετε την κεφαλή αναρρόφησης να κλειδώνει στη θέση της.

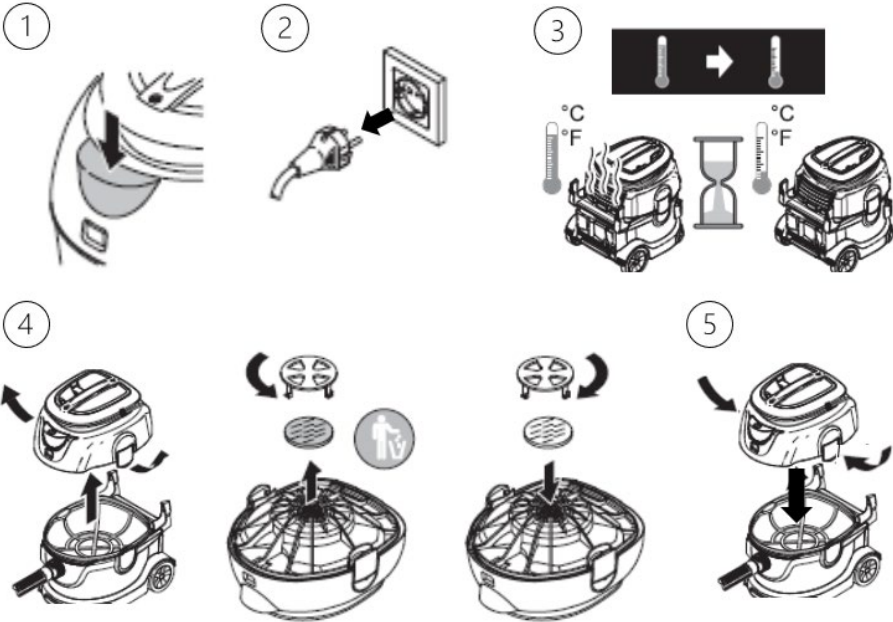

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δυσλειτουργία	Λύση
Η τουρμπίνα αναρρόφησης δεν λειτουργεί.	– Ελέγξτε το καλώδιο, το βύσμα, την ασφάλεια και την πρίζα. – Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Η τουρμπίνα αναρρόφησης σβήνει.	Αδειάστε το δοχείο
Η τουρμπίνα αναρρόφησης δεν επανεκκινείται μετά την εκκένωση του δοχείου.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε 5 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιήστε την ξανά μετά από 5 δευτερόλεπτα.
Η ισχύς αναρρόφησης μειώνεται.	– Απομακρύνετε την απόφραξη από τη μονάδα απομάκρυνσης σκόνης, τον σωλήνα αναρρόφησης ή το φίλτρο. – Αντικαταστήστε τον χαρτίνο σάκο φίλτρου / το φίλτρο από φλιν. – Τοποθετήστε σωστά το κάλυμμα του φίλτρου στη θέση του – Αντικαταστήστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα. – Αντικαταστήστε το φίλτρο εξερχόμενου αέρα.
Διαφυγή σκόνης κατά την αναρρόφηση	– Ελέγξτε αν το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά. – Αντικαταστήστε το φίλτρο προστασίας κινητήρα. – Αντικαταστήστε το φίλτρο εξαγωγής αέρα.

ΣΕΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΠΡΙΟΝΙ ΓΙΑ ΓΥΨΟ STANDARD


Με το kit αναβάθμισης, μια συσκευή αναρρόφησης σκόνης τοποθετείται στο ταλαντευόμενο πριόνι γύψου STANDARD και συνδέεται με την ηλεκτρική σκούπα.

Περιεχόμενα συσκευασίας:

RZ6220-61	Σετ αναβάθμισης για το παλμικό πριόνι γύψου STANDARD, που αποτελείται από: 1 ηλεκτρική σκούπα (RU 6220-60) 1 εύκαμπτος σωλήνας (RZ6220-62) 1 μονάδα απομάκρυνσης σκόνης (RZ6220-68) 1 στήριγμα σωλήνα (RZ6220-70) 1 καλώδιο προσαρμογέα (RZ6220-73) 1 κλειδί Torx με λαβή T (RZ6220-06) 1 κλειδί καρυδάκι με λαβή T, 11 mm (RZ6220-71) 1 σωληνάριο με ειδικό λιπαντικό γράσο 2 δακτύλιοι στεγανοποίησης (O-rings), για σωλήνα
D0661	Οδηγίες χρήσης (online)


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

⚠️ Αποσυνδέστε το φως τροφοδοσίας του πριονιού γύψου πριν από τη συναρμολόγηση.

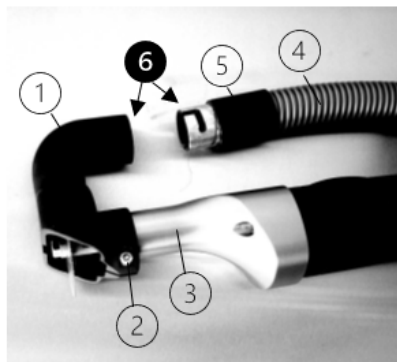

Τοποθέτηση της μονάδας απομάκρυνσης σκόνης

1. Συνδέστε τη μονάδα απομάκρυνσης σκόνης (1) στο σώμα του πριονιού γύψου (3) και βιδώστε την σφιχτά με μια βίδα torx (2).
2. Τοποθετήστε τον δακτύλιο στεγανοποίησης (5) στον εύκαμπτο σωλήνα (4).
3. Λιπάνετε το κλείδωμα τύπου μπαγιονέτ στο εξωτερικό και τη σύνδεση της μονάδας απομάκρυνσης σκόνης στο εσωτερικό (6).
4. Συνδέστε τη μονάδα απομάκρυνσης σκόνης (1) στον εύκαμπτο σωλήνα (4) και στον δακτύλιο στεγανοποίησης (5) χρησιμοποιώντας το κλείδωμα μπαγιονέτ.

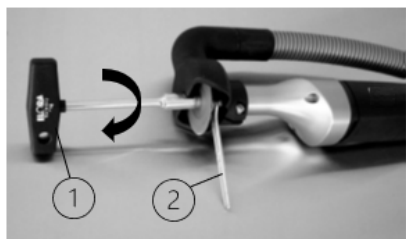

Τοποθέτηση της λεπίδας πριονιού

1. Τοποθετήστε τη λεπίδα πριονιού και σφίξτε ελαφρά τη βίδα με το χέρι.
2. Τοποθετήστε το κλειδί με ανοιχτό άκρο (2) στον άξονα για να τον ασφαλίσετε.
3. Χρησιμοποιήστε το κλειδί καρυδάκι (1) για να σφίξετε τη βίδα που συγκρατεί τη λεπίδα πριονιού.



Χρησιμοποιείτε πάντα και τα δύο κλειδιά όταν αλλάζετε τη λεπίδα πριονιού

- Κλειδί καρυδάκι με πείρο (RZ6220-71) για το σφίξιμο και
- Κλειδί με ανοιχτό άκρο (RZ6220-02, παρέχεται με το πριόνι γύψου) για την αντίσταση στη βίδα.

Τοποθέτηση της βάσης σωλήνα

1. Στερεώστε τη βάση στήριξης σωλήνα στην αυλάκωση στερέωσης της ηλεκτρικής σκούπας.
2. Τοποθετήστε τον σωλήνα της ηλεκτρικής σκούπας στη διχάλα του στηρίγματος σωλήνα.

Τοποθέτηση του καλωδίου προσαρμογέα

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του πριονιού γύψου στην πρίζα του καλωδίου προσαρμογέα.
2. Στη συνέχεια, εισάγετε το βύσμα του καλωδίου προσαρμογέα στην υποδοχή της ηλεκτρικής σκούπας.

ΣΕΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΟ ΠΡΙΟΝΙ ΣΟΒΑ STANDARD ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Η εικόνα του παραδείγματος δείχνει μια πλήρη διαμόρφωση με προαιρετικά εξαρτήματα:

- (1) Ηλεκτρική σκούπα
- (2) Σωλήνας
- (3) Βάση σωλήνα
- (4) Ράφι, μαγνητική βάση για την αποθήκευση εργαλείων, προαιρετικό
- (5) Μονάδα απομάκρυνσης σκόνης
- (6) Ανάρτηση με λαβή, ρυθμιζόμενη σε ύψος, για τη συγκράτηση του πριονιού γύψου με τοποθετημένη μονάδα απομάκρυνσης σκόνης και για την εύκολη ώθηση της συσκευής, προαιρετική
- (7) Πριόνι γύψου με ταλάντωση STANDARD, προαιρετικό
- (8) Υποδοχή για καλώδιο προσαρμογέα
- (9) Καλώδιο προσαρμογέα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 **Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σκούπα από το δίκτυο πριν τον καθαρισμό.**

- Απομακρύνετε τη βαριά ρύπανση αμέσως μετά τη χρήση
- Καθαρίστε τη σκούπα και τα εξαρτήματά της μετά τη χρήση. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, χωρίς χνούδια πανί και ένα καθαριστικό με τιμή pH μεταξύ 9 και 10.
- Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικές βούρτσες ή καθαριστικά με λειαντικά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

 **Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σκούπα από το δίκτυο πριν από τη συντήρηση.**

- Τηρήστε τους ελέγχους ασφαλείας σύμφωνα με τους τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς για φορητές συσκευές επαγγελματικής χρήσης.
- Αντικαταστήστε το φίλτρο του προστατευτικού καλύμματος του κινητήρα κάθε 3 μήνες, διαφορετικά ενδέχεται να μειωθεί η ισχύς αναρρόφησης ή να προκληθεί βλάβη στον στροβίλο αναρρόφησης.
- Αντικαταστήστε το φίλτρο εξαγωγής αέρα μία φορά το χρόνο.
- Το κλειδωμα τύπου μπαγιονέτ μεταξύ της μονάδας απομάκρυνσης σκόνης και του σωλήνα αναρρόφησης πρέπει να καθαρίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να λιπαίνεται εκ νέου με ειδικό γράσο. Πρέπει πάντα να είναι ελαφρώς λιπασμένο.
- Ο δακτύλιος στεγανοποίησης πρέπει να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για ρωγμές και παραμορφώσεις. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα χωρίς τον δακτύλιο στεγανοποίησης.
- Μετά τον καθαρισμό, η ηλεκτρική σκούπα πρέπει να υποβάλλεται σε οπτικό και λειτουργικό έλεγχο. Η ηλεκτρική σκούπα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ορατά υπολείμματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις οπές αέρα και στα στοιχεία ελέγχου. Βλ. επίσης «ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ: ΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ».
- Τα ελαττωματικά προϊόντα πρέπει να καθαρίζονται πριν επιστραφούν για επισκευή ή καταγγελία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Αποθηκεύστε την ηλεκτρική σκούπα σε ξηρό και καθαρό περιβάλλον σε θερμοκρασία 5 – 40 °C.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

- Ανακυκλώστε τη συσκευασία, τις χρησιμοποιημένες συσκευές και τα εξαρτήματα με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες από τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπο.
- Τα προϊόντα μπορούν να απορριφθούν σωστά μόνο μετά από επιτυχή καθαρισμό.
- Κατά την απόρριψη ή την ανακύκλωση του προϊόντος ή των εξαρτημάτων του, πρέπει να τηρούνται οι εθνικοί κανονισμοί.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

- Μην πραγματοποιείτε ποτέ επισκευές μόνοι σας. Η συντήρηση και οι επισκευές επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την RUDOLF Medical ή το τμήμα ιατρικής τεχνολογίας σας εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτό το θέμα.
- Τα ελαττωματικά προϊόντα πρέπει να καθαρίζονται πριν από την επιστροφή τους για επισκευή ή καταγγελία.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΣΥΜΒΑΝΤΑ

- Ο χρήστης πρέπει να αναφέρει όλα τα προβλήματα με τα προϊόντα της RUDOLF Medical στον αντίστοιχο εξειδικευμένο αντιπρόσωπο.
- Σε περίπτωση σοβαρών συμβάντων με τα προϊόντα, ο χρήστης πρέπει να τα αναφέρει στην RUDOLF Medical ως κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει ο χρήστης.

ΕΓΓΥΗΣΗ

- Παρέχουμε εγγύηση για τις ηλεκτρικές σκούπες της RUDOLF Medical για ταλαντευόμενα πριόνια γύψου σύμφωνα με τους νόμιμους και ειδικούς για κάθε χώρα κανονισμούς (απόδειξη με τιμολόγιο ή δελτίο παράδοσης). Η περίοδος εγγύησης είναι δύο έτη.
- Σε περίπτωση ελαττωμάτων υλικών ή κατασκευής, θα επισκευάσουμε τη συσκευή δωρεάν. Η αξίωση εγγύησης λήγει εάν επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση, υπερφόρτωση ή φυσιολογική φθορά εξαιρούνται από την εγγύηση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.
- Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης ή επισκευής, παρακαλούμε να επισυνάψετε μαζί με τη συσκευή ένα αντίγραφο του τιμολογίου ή του δελτίου παράδοσης.
- Εάν η συσκευή τροποποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, η παρούσα δήλωση καθίσταται άκυρη και η εγγύηση λήγει.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνδεση δικτύου	220 - 240 Volt, 50/60 Hz
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	1300 Watt
Κενό	244 mbar
Χωρητικότητα δοχείου	περίπου 15 λίτρα
Βάρος	8,0 kg
Όγκος αέρα	61 L
Απόδοση φίλτρου	99,97 % > 0,5 µm
Κατηγορία προστασίας	II 
Βαθμός προστασίας (IP)	IP2X
Επίπεδο θορύβου (A-σταθμισμένο)	59 dB (A)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Εικόνα	ΑΝΑΦ.	Περιγραφή προϊόντος
	RZ6220-14	Σακούλα φίλτρου από φλιν, συσκευασία 5 τεμαχίων
	RZ6220-63	Σακούλα φίλτρου από χαρτί, συσκευασία των 10 τεμαχίων
	RZ6220-64	Σακούλα φίλτρου υγρού τύπου, συσκευασία των 5 τεμαχίων
	RZ6220-12	Φίλτρο από οικολογικό φλιν, συσκευασία των 3 τεμαχίων
	RZ6220-13	Φίλτρο HEPA από οικολογικό φλιν
	RZ6220-15	Φίλτρο προστασίας κινητήρα
	RU 6220-51-02	Καλάθι φίλτρου, για ηλεκτρική σκούπα RU 6220-60
	RZ6220-62	Εύκαμπτος σωλήνας, 2 m
	RZ6220-70	Βάση σωλήνα
	RZ6220-68	Μονάδα απομάκρυνσης σκόνης

Εικόνα	REF	Περιγραφή προϊόντος
	RZ6220-73	Καλώδιο προσαρμογέα για τη σύνδεση πριονιού γύψου και ηλεκτρικής σκούπας
	RZ6220-71	Υποδοχή τύπου πείρου με λαβή T, 11 mm
	RZ6220-06	Κλειδί Torx με λαβή T
	RZ6220-02	Κλειδί ανοιχτού τύπου, 11 mm
	RZ6220-03	Βίδα συγκράτησης για πριονωτή λεπίδα για πριόνι γύψου RU 6220-20
	RZ6220-04	Δακτύλιος στερέωσης με αυλακώσεις για πριόνι γύψου RU 6220-20
	RZ6220-11	Δακτύλιος στερέωσης με πείρους οδήγησης για πριόνι γύψου RU 6220-20
	RZ6220-69	Ανάρτηση με λαβή, ρυθμιζόμενη σε ύψος για ηλεκτρική σκούπα RU 6220-60, για τη συγκράτηση του παλμικού πριονιού γύψου RU 6220-20
	RZ6220-72	Μαγνητική βάση για πριονόλαμες και εργαλεία (Προσαρμογή στην ανάρτηση RZ6220-69)

ΣΥΜΒΟΛΑ

	Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης
	Αριθμός παρτίδας
	Αριθμός είδους
	Αριθμός ανά συσκευασία
	Μη αποστειρωμένο
	Προσοχή
	Κατασκευαστής
	Ημερομηνία κατασκευής
	Σήμα CE σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (MDR)
	Σήμανση WEEE
	Ιατρική συσκευή