



Ryksuga fyrir STANDARD sveiflandi gipsög með valfrjálsum aukahlutum



RUDOLF Medical GmbH + Co KG
Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen an der Donau,
Þýskaland
Sími +49 7463 9956-0
sales@RUDOLF-med.com
www.RUDOLF-med.com

D0661 / Rev F / ACR01110 / 2026-06-19



 **Vinsamlegast lestu áður en þú notar og geymdu á öruggan stað**

VARA

Þessar notkunarleiðbeiningar varða RUDOLF Medical ryksugur sem á að nota með RUDOLF Medical gipsögum "STANDARD". Þú ert að fá hágæða vöru, og rétt meðferð og notkun hennar er lýst hér að neðan.

Aðeins til faglegs notkunar: Tækin eru ætluð eingöngu fagnotendum (skurðlæknum, skurðstofu hjúkrunarfræðingum, tæknimönnum í vinnslu lækningatækja).



RUDOLF Medical ryksugur fyrir sveiflandi gipsögur eru afhentar ósterílar. Ryksugan og aukahlutir skulu hreinsaðir eftir hverja notkun.

ÁÆTLAÐUR NOTKUNARHÆTTIR

Ryksugnan er ætluð til að sjúga upp rykið sem myndast við notkun gipssögsins þegar gipsið er fjarlægð.

Sjúklingahópur: Engar takmarkanir gilda um sjúklingahópinn. Læknirinn getur metið, út frá eigin reynslu og fagþekkingu, hvort ávinningurinn vegur þyngra en áhættan í viðkomandi sjúklingahópi.



VIÐVÖRUNARMERKI OG VARÚÐARRÁÐSTAFANIR

- Ekki nagla eða skrúfa merkimiða eða skilti á tækið. Þetta getur skemmt varnarísoleringuna. Mælt er með límmiðum.
- Notaðu eingöngu skemmdarlausar tengjar og kapla. Skoðaðu kapla og tengjar reglulega.
- Spennugildi ryksugunnar verður að samræmast rafmagnsspennu og spennugildi sveifluborðs fyrir gips.
- Notaðu eingöngu upprunalega aukahluti.
- Notaðu persónuhlífðarbúnað, svo sem öryggisglæraugu, heyrnarvörn og hanska.
- Tækið má ekki nota í hugsanlegri sprengihættu.
- Síur skulu alltaf vera settar í við ryksugun.

ÁÐUR EN NOTKUN: SÝNIS- OG STARFSHÆFNIATHUGUN

Athugaðu eftirfarandi:

- Ytri skemmdir (t.d. gölluð snúra, afmyndaður stungi, inndjúp, sprungur)
- Rétt virkni
- Þéttingarhringur fyrir sprungur og aflögun

Sjá einnig kafla "VIÐHALD, STÝRING OG EFTIRLIT".


RYKSUGARI FYRIR HRELLANDI PLÖSTURSAG STANDARD

Afhendingarsvið:

RU 6220-60	Ryksuga eingöngu fyrir STANDARD sveiflandi gipsög, þar á meðal: 1 síukörfa 1 Eco-flísasí 1 loðfilterpoki
D0661	Notkunarleiðbeiningar (á netinu)

SETJA INN SÍUPOKA


	Slökkvið ryksuguna og takið hana úr sambandi.
①	Læstu op sugnuhausinn og taktu hann af. Taktu út síuvögguna.
②	Settu síupoka inn.
③	Settu síukörfuna á sinn stað.
	Settu suðuhausinn aftur á botn ryksugunnar og læstu honum á sinn stað. Þú ættir að heyra smell þegar suðuhausinn fer á sinn stað.

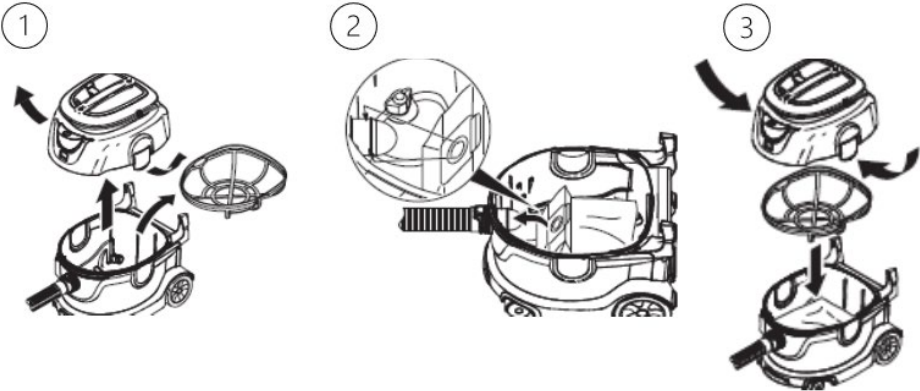

SETJA Í NOTKUN


Kveikja handvirkt

①	Tengdu sogslönguna, sem á að heyrast smellast að fullu á sinn stað.
②	Settu inn rafmagnstengið.
③	Kveikja á tækinu. Tækið er tilbúið til notkunar.

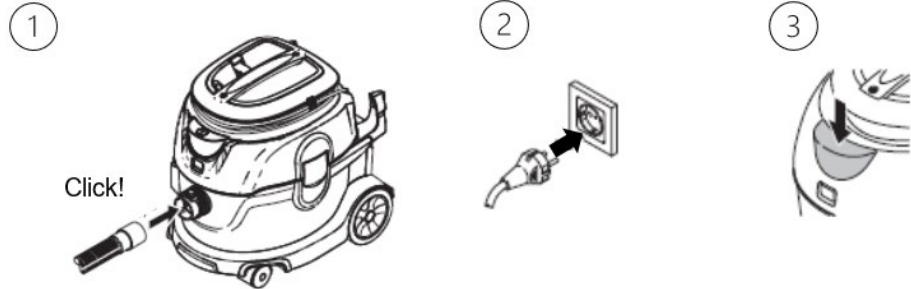

Sjálfvirk kveiking og slökkun ryksugunnar

- (A) Tengdu innstungu rafmagnssnúrunnar á sveiflandi múrssögina við ryksuguna.
(B) Kveikja ryksuguna.
(C) Ljósið kviknar og ryksugan kveiknar stuttlega í um það bil 8 sekúndur til athugunar. Ryksugan er nú í biðham.

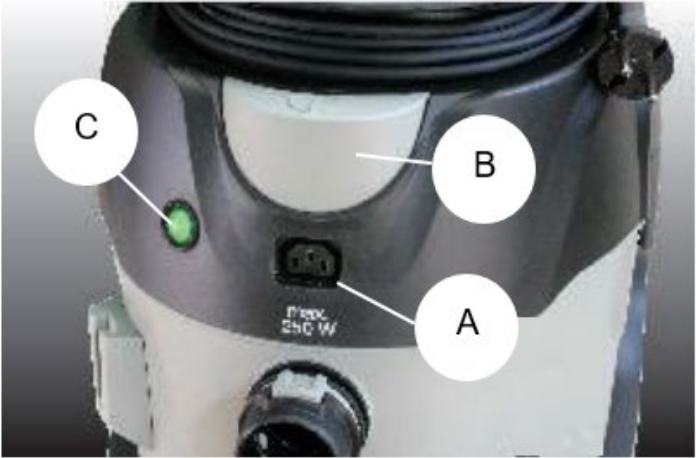


Athugasemdir:

- Ryksugnan kveikist og slökknist sjálfkrafa með sveiflandi gipsögni í biðham.
- Ef ryksugan er kveikt aftur innan 4 sekúnda eftir að hún var slökkt af gífsöginni, mun sogkerfið halda áfram að keyra óslitið.
- Ryksugunni tekur allt að 8 sekúndum að fara í gegnum yfirferðarferil til að tryggja að sogslöngunni sé alveg tæmd.

BREYTA SÍUPOKANUM (REF RZ6220-14, RZ6220-63, RZ6220-64)




①	Slökkvaðu á ryksuganum.
②	Tengdu rafmagnssnúruna frá.
③	Læstið soghausinn og takið hann af. Taktu út síubunkann.
④	Skiptu um síupoka. A = Taktu út fulla síupoka B = Settu inn nýjan síupoka
⑤	Settu síukörfuna á. Settu soghausinn aftur á botn ryksugunnar og læstu honum á sinn stað. Þú ættir að heyra hann smella á sinn stað.

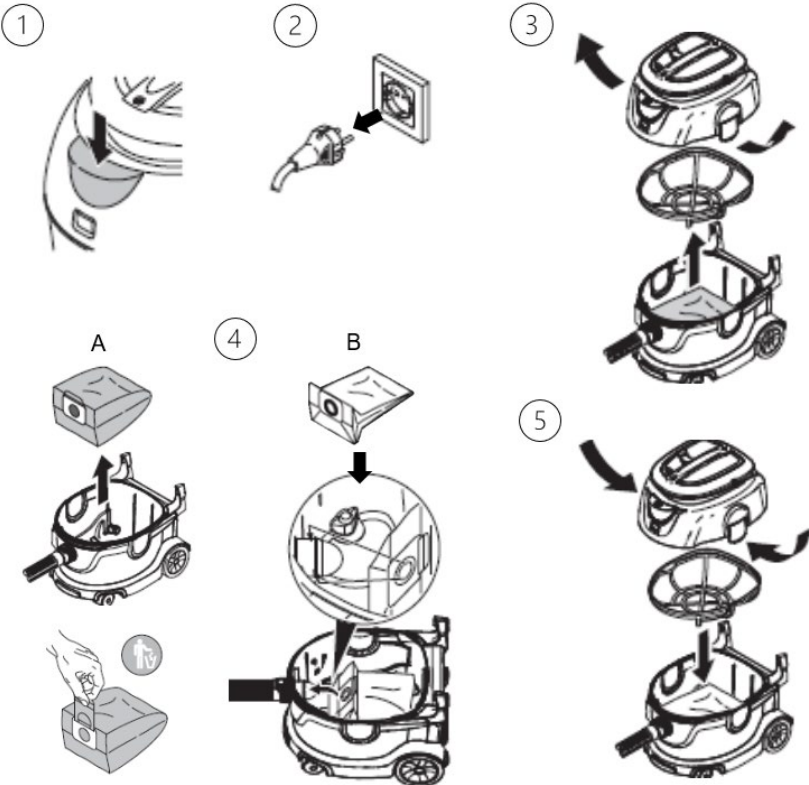

SKIPTA ÚT ÚDLFILTERI (fleece-síu REF RZ6220-12, RZ6220-13)




①	Slökkva á ryksuganum.
②	Tengdu rafmagnssnúruna úr innstungunni.
③	Láttu ryksuguna kólna í um það bil 30 mínútur ef hún var áður í notkun.
④	Opnaðu sílukápuna. Skiptu um útblástursloftsíu. Lokaðu síluhúsinu, sem á að heyrast smellast að fullu á sinn stað.

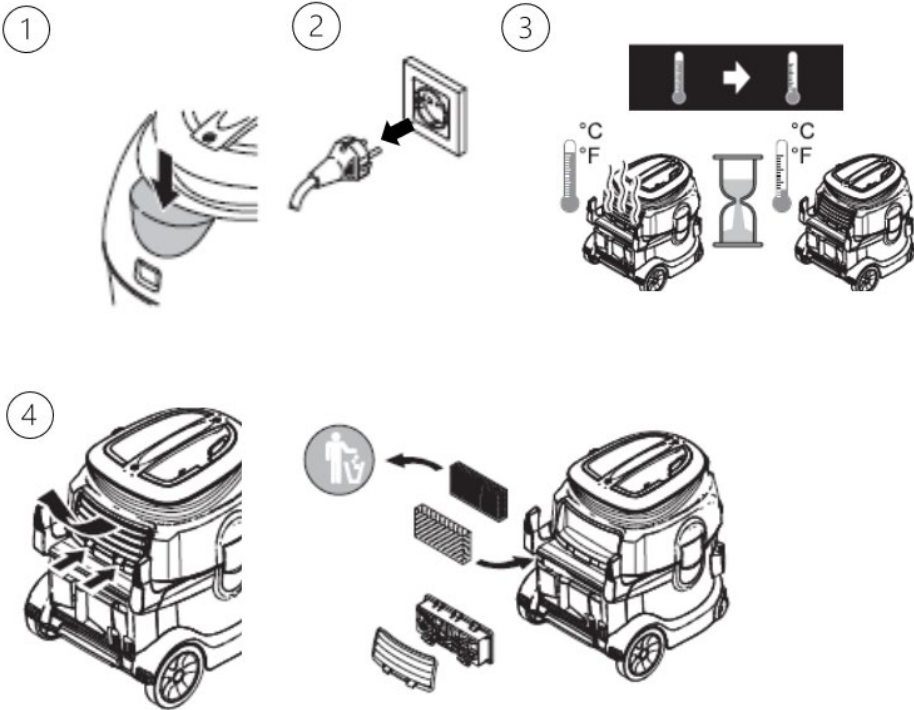

SKIPTA ÚT SÍU Í MOTORVERND (REF RZ6220-15)



①	Slökkvið ryksuguna.
②	Tengdu rafmagnssnúrustunguna frá.
③	Láttu ryksuguna kólna í um það bil 30 mínútur ef hún var áður í notkun.
④	1. Læstu opunarhnappinum á soghausnum og taktu hann af. a) Taktu viftuvörnarsíuna úr soghausnum og hentuðu henni í samræmi við reglur. b) Settu nýja vélavörnarsíuna á soghöfuðið.
⑤	Settu síubasketinn á. Settu suðuhausinn aftur á undirstöðu ryksugunnar og læstu honum á sinn stað. Þú ættir að heyra suðuhausinn smella á sinn stað.

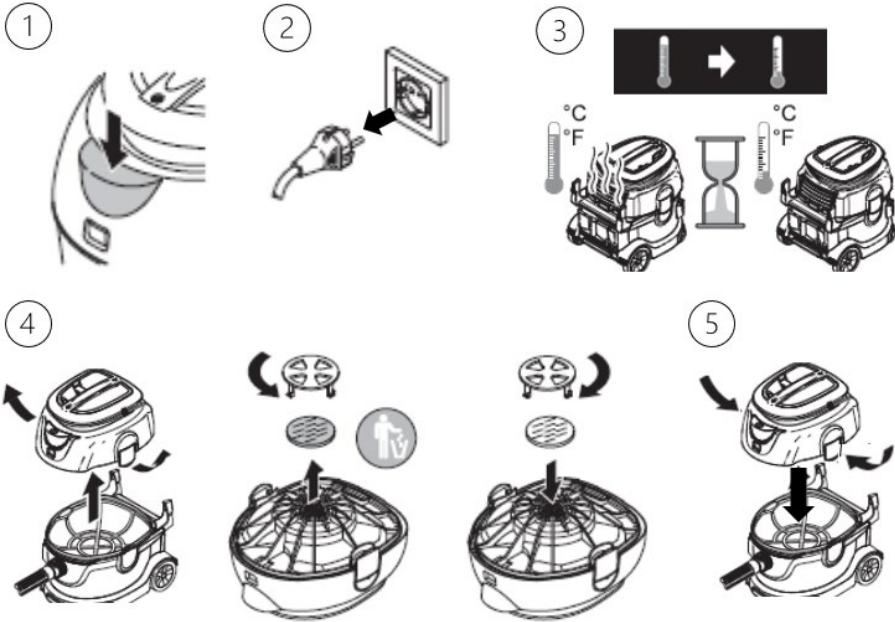

ATHUGIÐ VARÐANDI GALLAR

Bilun	Úrræði
Sogturbínan er ekki að virka.	– Athugaðu snúruna, innstunguna, trylluna og rafmagnsinnstunguna. – Kveikja á tækinu.
Sogturbínan slokknar.	Túma ílátið
Sogturbínan ræsist ekki aftur eftir að ílátinu hefur verið tæmt.	Slökkvið á tækinu og bíðið í 5 sekúndur; kveikið aftur eftir 5 sekúndur.
Sogkraftur minnkar.	– Fjarlægjið stífluna úr ryksöfnunareiningunni, sogslöngunni eða síunni. – Skiptu um pappírssiúpoka / ullarsíu. – Settu síluhulstrið rétt á sinn stað – Skiptu um síu í vélavörminni. – Skiptu um útblástursloftsíu.
Ryk lekur út þegar ryksugað er	– Athugaðu rétt uppsetningarstaðsíð síunnar. – Skiptu um síu vörnabúnaðar vélarinnar. – Skiptu um loftsíu útblásturslofts.

UPPFÆRSLUSETT FYRIR STANDARD SVEIFLU MÚRSKURÐARÖXINA


Með viðbótarbúnaðinum er ryksogstæki fest við STANDARD sveiflandi gipsöguborvél og tengt ryksugu.

Afhendingarsvið:

RZ6220-61	Uppfærslusett fyrir STANDARD sveiflandi gipsög, sem samanstendur af: 1 ryksuga (RU 6220-60) 1 sveigjanlegur slöngur (RZ6220-62) 1 ryksogueining (RZ6220-68) 1 slönguhaldari (RZ6220-70) 1 millistykkiarsnúra (RZ6220-73) 1 Torx-lykill með T-handfangi (RZ6220-06) 1 stiftalykill með T-handfangi, 11 mm (RZ6220-71) 1 rör með sérsmurðri fitu 2 þéttingarhringir (O-hringir), fyrir slöngu
D0661	Notkunarleiðbeiningar (á netinu)


SAMSETNING

 Tengdu af rafmagnssnúru gipssögsins áður en þú setur hann saman.

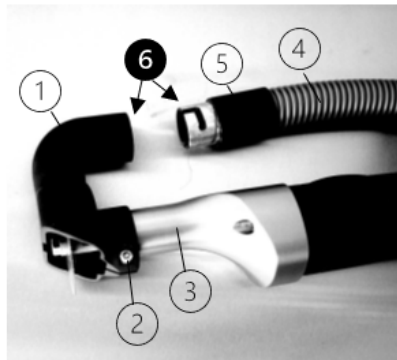

Uppsetning ryksöfnunareiningar

1. Festu ryksöfnunareininguna (1) við grind gipsagarsins (3) og skrufaðu hana þétt með Torx-skruðu (2).
2. Settu þéttingarhringinn (5) á slönguna (4).
3. Smyrðu bajonettlæsinguna að utan og tengið ryksugueiningarinnar að innan (6).
4. Tengdu ryksugueininguna (1) við slönguna (4) og þéttingarhringinn (5) með bajonettlæsingunni.

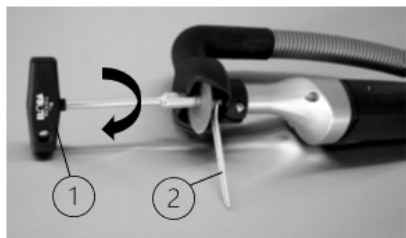

Setja upp sögublaðið

1. Settu sagarblaðið á og herðið skrúfuna varlega með höndunum.
2. Settu opna lykilinn (2) á ásinn til að læsa honum.
3. Notaðu pinnafestingarlykilinn (1) til að herða skrúfuna sem festir sagarblaðið.



Notaðu alltaf báða lykla þegar þú skiptir um sögublað

- Stiftnagli (RZ6220-71) til að herða og
- Opna lykillinn (RZ6220-02, fylgir með gipsagursöginni) til að móta skrúfuna.

Að setja slönguhaldarann

1. Festu slönguhaldarann í festingarás ryksugunnar.
2. Settu slönguna á ryksugunni í gaffann á slönguhaldaranum.

Setja tengikabelinn

1. Tengdu rafmagnssnúruna á gipsagri við tengið á millistykkinu.
2. Settu síðan inntennina á millistykkinu í innstunguna á ryksugunni.

UPPFÆRSLUSETT FYRIR STANDARD SVEIFLASÖG FYRIR GIPS MEÐ VALFRJÁLSUM AUKAHLUTUM



Dæmismyndin sýnir fullkomna uppsetningu með valfrjálsum aukahlutum:

- (1) Ryksuga
- (2) Slanga
- (3) Slanguhaldari
- (4) Hilla, segulfesting til geymslu verkfæra, valkvæð
- (5) Rykfrárennsliseining
- (6) Hengingargrind með handfangi, hæðarstillanleg, til að halda gipsöguborinu með uppsettri ryksugueiningu og til að auðvelda þrýsting á tækið, valkvætt
- (7) Ósveiflandi gipsög STANDARD, valkvætt
- (8) Tengi fyrir millistykki
- (9) Miðlægur tengikáblur

HREINGERÐ

 **Taktu ryksuguna úr rafmagninu áður en þú hreinsar.**

- Fjarlægðu mikla mengun strax eftir notkun
- Hreinsið ryksuguna og íhluti hennar eftir notkun. Notið mjúkan, hreinan, loðfrjálsan klút og hreinsiefni með pH-gildi á bilinu 9 til 10.
- Ekki nota málmbursta né slípiefni.

VIÐHALD, STÝRING OG SKOÐUN

 **Taktu ryksuguna úr rafmagninu áður en viðhald er framkvæmt.**

- Fylgdu öryggisathugunum samkvæmt gildandi staðbundnum reglum um færanleg tæki sem notuð eru í atvinnuskyni.
- Skiptu um síu á vélarvörninni á þriggja mánaða fresti, annars getur það leitt til taps á sogkrafti eða valdið skemmdum á sogtúrbínunni.
- Skiptu um útblástursloftsú einu sinni á ári.
- Bayonetlásinn milli ryksugueiningarinnar og sogslöngunnar skal hreinsa reglulega og endurgreasa með sérstökum smurolíu. Hann skal alltaf vera létt smurður.
- Þéttingarhringurinn skal reglulega athugaður fyrir sprungur og aflögun. Aldrei skal nota ryksuguna án þéttingarhringsins.
- Eftir hreinsun skal ryksugan gangast undir sjónræna og virkniseftirlit. Ryksugan skal vera laus við sýnilega leifar. Sérstaklega skal huga að loftopum og stýrieiningum. Sjá einnig "ÁÐUR EN NOTAÐ ER: SJÓNRAEN OG VIRKNISEFTIRLIT".
- Gallaðar vörur skulu hreinsaðar áður en þær eru sendar til viðgerðar eða vegna kvörtunar.

GEYMSLA

- Geymið ryksuguna á þurrum og hreinum stað við 5–40 °C.

ÚTFÖRUN

- Endurvinnið umbúðir, notaðan búnað og aukahluti á umhverfisvænan hátt. Frekari upplýsingar fáið þið hjá sérfræðisólum.
- Vörur má aðeins farga á réttan hátt eftir árangursríka hreinsun.
- Þegar vara eða íhlutir hennar eru fargaðir eða endurunnir skal fara eftir landsreglum.

VIÐGERÐIR OG SKILAR

- Aldrei framkvæma viðgerðir sjálfur. Þjónustu og viðgerðir má aðeins framkvæma af þjálfuðu og hæfu starfsfólki. Vinsamlegast hafið samband við RUDOLF Medical eða tæknideild læknisfræðinnar ef þið hafið einhverjar spurningar í þessu sambandi.
- Gallaðar vörur skulu hreinsaðar áður en þær eru sendar til viðgerðar eða vegna kvörtunar.

VANDAMÁL / ATBURÐIR

- Notandi skal tilkynna öll vandamál með vörur frá RUDOLF Medical til viðkomandi sérsöluaðila.
- Ef alvarlegir atburðir tengdir vörunum verða, skal notandi tilkynna það til RUDOLF Medical sem framleiðanda og til viðeigandi yfirvalda í aðildarríki þar sem notandinn er staðsettur.

ÁBYRGÐ

- Við veitum ábyrgð á RUDOLF Medical ryksugum fyrir sveiflandi gipsögur í samræmi við lögbundnar og landstengdar reglugerðir (sönnun með reikningi eða afhendingarseðli). Ábyrgðartíminn er tvö ár.
- Við efnis- eða framleiðslugalla munum við gera við tækið án endurgjalds. Ábyrgðarkrafa fellur niður ef þú reynir að gera við tækið sjálfur.
- Skipti falla ekki undir ábyrgðina. Vinsamlegast hafið samband við þjónustuver okkar.
- Ef krafa vegna ábyrgðar eða viðgerðar kemur upp, vinsamlegast fylgdu afriti af reikningi eða afhendingarnótu með tækinu.
- Ef tækið er breytt af óviðkomandi aðilum fellur þessi yfirlýsing niður og ábyrgðin rennur út.

TÆKNILÝSING

Rafmagnstenging	220 - 240 volt, 50/60 Hz
Nafnbirt orkunotkun	1300 watta
Tóm	244 mbar
Innihald ílátsins	um það bil 15 lítrar
Þyngd	8,0 kg
Loftmagn	61 L
Síunarframmistaða	99,97 % > 0,5 µm
Varnarflokkur	II 
Varnarflokkur (IP)	IP2X
Hávaðastig (A-vogun)	59 dB (A)

AUKABÚNAÐUR / VARAHLUTIR

Myndskreyting	REF	Lýsing á vöru
	RZ6220-14	Filtusíupoki, pakki með 5 stykki
	RZ6220-63	Pappírssíupoki, pakki af 10 stykki
	RZ6220-64	Vot síupoki, pakki af 5 stykki
	RZ6220-12	Eco fleece síuvörður, pakki af 3 stykki
	RZ6220-13	HEPA eco-fleece síu
	RZ6220-15	síu til vörn mótór
	RU 6220-51-02	Síubassi fyrir ryksugu RU 6220-60
	RZ6220-62	Slanga, sveigjanleg, 2 m
	RZ6220-70	Slanguhaldari
	RZ6220-68	Ryksugueining

Myndskreyting	REF	Lýsing á vöru
	RZ6220-73	Miðlunarkáblur til tengingar gipssögs og ryksugu
	RZ6220-71	Stiftatengi með T-handfangi, 11 mm
	RZ6220-06	Torx-lykill með T-handfangi
	RZ6220-02	Opinn lykill, 11 mm
	RZ6220-03	Festiskruða fyrir sagarblað fyrir gipsög RU 6220-20
	RZ6220-04	Festingarhringur með rillum fyrir gipsög RU 6220-20
	RZ6220-11	Festingarhringur með drifsnúðum fyrir múrсаag RU 6220-20
	RZ6220-69	Hengispenna með handfangi, hæðarstillanleg fyrir ryksugu RU 6220-60, til að halda sveiflandi múrssög RU 6220-20
	RZ6220-72	Segulfesting fyrir sagarblað og verkfæri (Festing við upphengingu RZ6220-69)

TÁKN

	Sjá notkunarleiðbeiningar
	Lotunúmer
	Vörunúmer
	Stk. í pakka
	Ósýklalyf
	Varúð
	Framleiðandi
	Framleiðsludagur
	CE-merki samkvæmt Reglugerð (ESB) 2017/745 um lækningatæki (MDR)
	WEEE-merking
	Lækningatæki