


HEMMORÓIDABINDARI

Hemorrhoidabindi

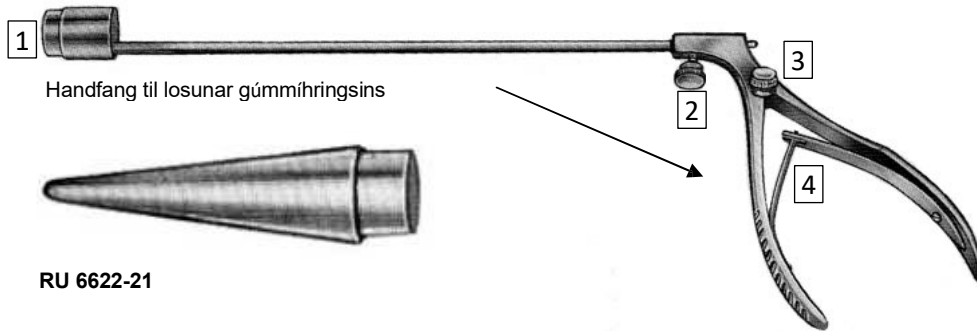

RU 6622-21

Vörunúmer

RU 6622-21	RU 6621-00
RU 6622-00	RU 6621-01
RU 6622-05	

Viðbending

Endurnýtanlegir ligatórhringir til meðferðar endaparmshnútum eru notaðir til að setja ligatórhring um grunn endaparmshnútsins til að stöðva blóðflæði til endaparmshnútsvefsins.

Roðinn blóðflæði mun valda þurrkun og hverfi hæmróta.

Mótefni

Ekki er heimilt að nota endaparmshnútabönd ef

- Fyrir stórar endaparmshnútar (stig IV)
- Sjúklingurinn notar blóðþynningarlyf
- Sýkingar í endaparmssvæðinu eru til staðar
- Öfvað endaparmspappila og
- Langvinn endaparmsslit

Lýsing

1. Setjið O-hring án latex í ligatorinn með hleðslukúpunni. Setjið hleðslukúpuna á ligatorhylkið og rúllið O-hringnum niður á odd hleðslukúpnar þar til hann situr jafnt um endann á ligatorhylkinu í sem mestri útpenslu. Takið hleðslukúpuna af.
2. Grípið endaparmshnúttinn með gripum um það bil 1 sentimetra fyrir ofan tönnótta línuna og togað hann inn í trommu ligatorsins. Ef sjúklingurinn tilkynnir verki skal velja nánari staðsetningu fyrir bandligatúrinn.
3. Þegar endaparmshnúttinn er dreginn þétt í gegnum trommu ligatorsins og ligatorinn þrýstur að grunni hans, skal kreista kveikjuna til að setja þéttingarhringinn utan um grunn endaparmshnútsins.

Lífstími

Nýstími tækisins er takmarkaður við meðferð tækisins. Beygja eða ofálag veldur skemmdum. Varkár endurvinnsla og auðveld meðferð tryggja yfir 1000 aðgerðir.

Athugun á virkni

Eftir afhendingu og fyrir hverja notkun skulu ný tæki gangast undir ítarlega sjónræna skoðun og virkni þeirra skulu prófuð.

Ef tækið sýnir áberandi galla (rifur, brot, sprungur, inndjúp, beygð hluti eða erfiðleikar við notkun/þröngt gangverk) eða það virkar ekki eins og lýst er í þessum leiðbeiningum, tilkynnið okkur, þ.e. framleiðanda eða dreifingaraðila okkar, strax.

Samsetning / Sundurliðun

Tækið samanstendur af 7 hlutum:

2 handföng, 2 þumalskrúfur, 1 ytri hulstur, 1 stimplur og 1 hleðslukónus



Rif

1. Taktu kúpuna af stimplinum
2. Ljúktu upp þumalskrúfuna og dragðu varlega út innri stimplinn og ytri hulstur



3. Ljúktu upp þumalskrúfuna og tengdu handföngin. Þetta gæti krafist nokkurrar krafta
4. Hakkaðu af tveimur gormum



Samsetning

1. Hengdu tvö gormana í hvoru öðru
2. Ýttu innri lið aftari handfangsins inn í ytri lið framhandfangsins þar til þráðholurnar eru samstilltar. Settu þumalskrúfuna aftur á.



3. Stingdu inn innri mölinu í ytri hulstrinu og settu það í opnunina í handfanginu. Festu hulstrið með þumalskrúfunni

4. Settu kúpuna í stimplinn



Varnar- og varúðarráð: Meðhöndlun

- Ekki nota skemmd tæki.
- Tækið hefur aðeins takmarkaða stöðugleika. Of mikil þrýstingur getur valdið skemmdum og neikvætt hefur áhrif á virkni þess.
- Könnur eru afar viðkvæmar og beygjast með litlum endurheimt. Skaddaðar kanylur má ekki nota lengur.
- Ný, steril kanyla skal alltaf nota þegar vökva er tekinn upp.
- Til að forðast að stimplinn festist, togaðu hann alltaf örlítið til baka eftir notkun.
- Einstök hlutar sprautunnar mega ekki verða óhreindir við samsetningu. (innan sílinders/lokans, stimplur, kanyla, sprautaukahlutur)

Fyrsta notkun nýrra tækja

- Tækið er afhent ósterilt. Það skal hreinsa og sótthreinsa áður en það er notað í fyrsta sinn.

Varnir og varúðarráðstafanir: Hreinsun

- Við undirbúning má hitastigið sem hefur áhrif á tækið ekki fara yfir 137 °C,
- Sjálfvirk hreinsun og sótthreinsun ætti að kjósa fram yfir handvirka hreinsun og sótthreinsun. Sjálfvirk ferlið er mun öruggara.
- Aldrei nota málmbursta/málmþunga eða slípandi hreinsiefni við handhreinsun.
- Aðeins hreint tæki og tæki með lágu örveruframkvæmdum gera kleift að framkvæma árangursríka stöðvun.
- Ef tækin skemmast skulu þau gangast undir alla endurvinnsluferlið áður en þau eru send aftur til framleiðanda til viðgerðar.
- Aldrei skal nota hreinsiefni með hvíttunarefnum, svo sem natriumhypoklóríti, þar sem það veldur alvarlegri tæringu.

Undirbúningur fyrir þrif

- Eftir notkun skulu tækin undirbúin eins fljótt og auðið er.
- Fjarlægjið leifar og bletti á tækinu strax eftir notkun með einnota klúti eða vefjar.
- Ekki nota föstunarefni eða heitt vatn (>40°C) þar sem það getur valdið föstun leifanna sem getur haft áhrif á niðurstöðu endurvinnsluferlisins.
- Geymið þau helst á þurrum stað.

- Skolið tækin sem fyrst eftir notkun. Fylgið öðrum hreinsunar- og skulunarvenjum sem við eiga.
- Látið tækin liggja í upplausn með hentugri blöndu af hreinsiefnum og sótthreinsiefnum. Vinsamlegast fylgið leiðbeiningum framleiðenda hreinsiefna og sótthreinsiefna.
- Setjið tækin í hentugar vírkörfur.
- Takið tækin í sundur eins mikið og mögulegt er

Flutningur

- Örugð geymsla og flutningur í lokuðu íláti til vinnslusvæðis til að koma í veg fyrir skemmdir á tækjunum og mengun umhverfisins.

Undirbúningur

	Vinsamlegast skoðið almennar undirbúningsleiðbeiningar okkar A0462 fyrir endurnýtanleg tæki (hitapolin). Ef þið eiðið ekki þessar leiðbeiningar, vinsamlegast biðið um þær hjá okkur.
--	---

Hreinsun

Vélræn hreinsun

- Hreinsið og sótthreinsið tækið eingöngu í hentugum þvott- og sótthreinsitækjum (WD) og með aðferð/forriti sem hefur verið staðfest fyrir WD-ið og tækið í samræmi við EN ISO 15883.
- Hentar sótthreinsivélar eru búnar sérstökum hreinsikörfum/innskotvögnum fyrir viðkvæm tæki.
- Forðist skugga við skulun þegar tæki eru hlaðin inn í innskotakerri WD til að tryggja fullkominn skulunarþrýsting á allt tækið. Gefið sérstaka athygli kjálkunum.
- Ekki ofhlaða innsláttarkörfum WD og ekki stafla þeim.
- Vinsamlegast fylgið leiðbeiningum um notkun og hleðslutíðskiptun framleiðanda WD.
- Við val á viðeigandi hreinsiefnum skaltu skoða viðeigandi lista og ráðleggingar frá Robert Koch-stofnuninni (RKI), DGHM Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (þýska félaginu um hreinlætisaðgerðir og örverufræði) og taka tillit til efnis og eiginleika tækisins. Sjá frekari upplýsingar í leiðbeiningum um undirbúning.

Hreinsiefni fyrir sjálfvirka hreinsun í WD:

Framleiðandi	Vörumerki
Dr. Weigert GmbH & Co. KG	Neodisher FA
Borer Switzerland	Deconex 23 Neutrazym

*Hentarleiki hreinsiefnisins sem og aðferðarinnar sem lýst er hér á eftir hefur verið sýndur fram á með fyrirklinískum prófunum / staðfestingu hjá RUDOLF Medical.

A - Þrifaátatlun (Miele G 7735):

- 1 mín. forhreinsun með köldu vatni
- Losa um vatn
- 3 mín. forhreinsun með köldu vatni
- Losa vatn
- 5 mín. hreinsun við 55°C með 0,5% alkalískum þvottaefni
- eða 5 mín. hreinsun við 45 °C með 0,5 % ensímhreins
- Losa um
- 3 mínútna hlutleysing með volgum vatni (>40°C) og hlutleysingarefni
- Losa um
- 2 mín. skulun með volgum krana vatni (>40°C)
- Losa

Viðhald, stýring og skoðun

- Eftir hreinsun og sótthreinsun skulu tækin skoðuð sjónrænt til að ganga úr skugga um að þau séu hrein. Þau skulu vera makroskopískt hrein (engin sjáanleg leifar/óhreinindi). Sérstaklega skal huga að rillum, hakki, lokunum og öðrum erfiðlega aðgengilegum svæðum.
- Ef enn eru sjáanlegir leifar eða vökví, endurtakið hreinsunar- og sótthreinsunarferlið.
- Áður en nokkur sótthreinsun fer fram skal setja tækin saman og skoða þau hvað varðar virkni, slitaskemmdir og skemmdir, og ef þörf krefur skulu þau skipt út.

Þökkun

- Hentug umbúð fyrir stöðvun samkvæmt ISO 11607 og EN 868.
- Almenn skal stilla aukahluti til sótthreinsunar og sterilísingarámbúðir í samræmi við innihald umbúðatækisins og sótthreinsunarferlið.
- Vinsamlegast fylgið leiðbeiningum framleiðanda stöðluins.

Sterilun

- Sterilun skal fara fram með gufu-sterilunarferli sem staðfest er samkvæmt DIN EN ISO 13060 / ISO 17665 (skammtað tómarúmsferli) í sterilunartæki í samræmi við EN 285, DIN 58946.
- 3 for-tómarútskeiðar með að minnsta kosti 60 mbar þrýstingi
- 134°C - 5 mínútur eða 132°C - 4 mínútur.
- Þurrkunartími: lágmark 10 mín.
- Vinsamlegast fylgja leiðbeiningum framleiðanda sterilísatorsins.

Geymsla

- Endurunnin tæki skulu geymd í viðeigandi og endurnýtanlegum sótthreinsunarkössum í samræmi við DIN EN 868-1 og DIN EN 868-8 og skulu geymd þar til notkun í samræmi við DIN 58953-9.
- Geymslugámurinn ætti að vera hannaður þannig að tækið sé örugglega fest og verndað gegn skemmdum.

- Geymsla sterileraðra tækja í þurrku, dimmu, lítið örverufengnu, hreinu og rykfríu umhverfi við hóflegan hita, 5°C til 40°C.
- Geymsluhæðin skal vera laus við hitastigsfluktu--ásjónir.

Viðbótarleiðbeiningar

- Ef lýst efnafræði og vélar eru ekki tiltækar, er notandans skylda að staðfesta ferlið sitt.
- Notandinn ber ábyrgð á að tryggja að endurvinnsluferlar, þar með talið úrræði, efni og starfsfólk, séu færir um að ná tilskildum árangri. Nýjustu þekking og oft þjóðleg lög krefjast þess að þessir ferlar og tilheyrandi úrræði séu vottaðir og viðhaldnir á réttan hátt. Á sama hátt skal meta allar breytingar sem endurvinnsluaðili gerir frá gefnum leiðbeiningum hvað varðar virkni og mögulegar neikvæðar afleiðingar.

Viðgerðir

- Jafnvel þegar skurðtæki eru notuð eins og til er ætlast verða þau fyrir meiri eða minni slit, allt eftir notkunarálagi. Þennan slit er ekki hægt að forðast af tæknilegum ástæðum.
- Vinsamlegast framkvæmið ekki viðgerðir sjálf. Viðhald og viðgerðir má eingöngu framkvæma hjá okkur – framleiðandanum – eða af öðrum aðilum sem við höfum heimilað.
- Skurðtæki sem á að senda til viðgerðar þarf að hreinsa, sótthreinsa og stöðva örveruvöxt.



Varúð!

Vanræksla á að fylgja viðvörðunum og varúðarráðstöfunum getur leitt til dauða eða alvarlegra meiðsla.

Tákn og skýringar

	Vinsamlegast lesið þessar leiðbeiningar vandlega áður en vara er notuð í fyrsta sinn. Fylgið alltaf leiðbeiningunum í þessari handbók. Geymið þessar leiðbeiningar á öruggan stað.
	Lotunúmer
	Vörunúmer
	Ósteril
	Vísar til hugsanlegrar hættu fyrir fólk eða eignir
	CE-merking
	Táknið fyrir framleiðanda