

## ISTRUZIONI PER L'USO (IT)

### **PINZA PER BIOPSIA, PINZA PER CORPO ESTRANEO, PINZA DA PRESA E FORBICI PER ISTEROSCOPIA**



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG  
Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen an der Donau,  
Germania  
Tel. +49 7463 9956-0  
Fax +49 7463 9956-56  
[sales@RUDOLF-med.com](mailto:sales@RUDOLF-med.com)  
[www.RUDOLF-med.com](http://www.RUDOLF-med.com)



D0819 / Rev. C / ACR00413 / 04.08.2023

### **LEGGERE PRIMA DI PROCEDERE AL RITRATTAMENTO E CONSERVARE IN UN LUOGO SICURO**

#### **PRODOTTO**

La presente istruzione per l'uso si riferisce al montaggio e allo smontaggio delle pinze per biopsia, pinze per corpo estraneo e pinze da presa della ditta RUDOLF Medical come anche per le forbici, destinate alla rimozione di tessuto durante l'isteroscopia.

Ricevete un prodotto di alta qualità, la cui corretta gestione e utilizzo sono descritti di seguito.



La seguente istruzione si riferisce allo smontaggio dello strumento dopo l'intervento e al montaggio dopo il processo di pulizia e disinfezione.

Le istruzioni dettagliate per il ritrattamento sono riportate nella IFU D0462:




Lo strumentario della ditta RUDOLF Medical viene fornito non sterili e deve essere pulito, disinfettato e sterilizzato prima del primo utilizzo e immediatamente dopo ogni utilizzo. I tappi protettivi e gli imballaggi per il trasporto devono essere rimossi prima.

Si consiglia di trattare le parti meccaniche dello strumento con un lubrificante prima della sterilizzazione.


Prima di ogni utilizzo è necessario eseguire un controllo funzionale e visivo approfondito.

#### **SMONTAGGIO**

1. Allentare la vite (1) in senso antiorario e rimuoverla (2).
2. Allentare il dado zigrinato dall'impugnatura (1) in senso antiorario e rimuoverlo.

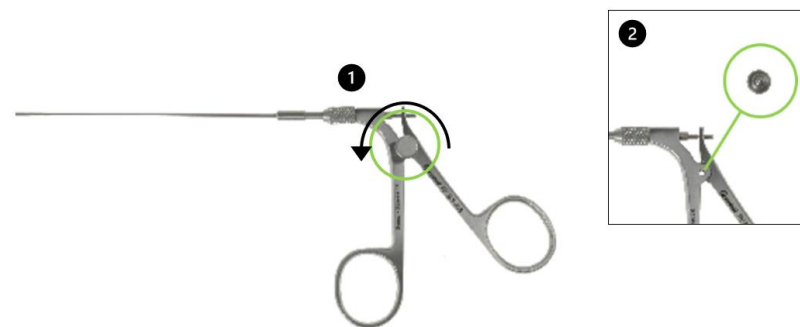


3. Rimuovere l'impugnatura per il pollice (2) ed estrarre l'inserto dall'impugnatura (3).

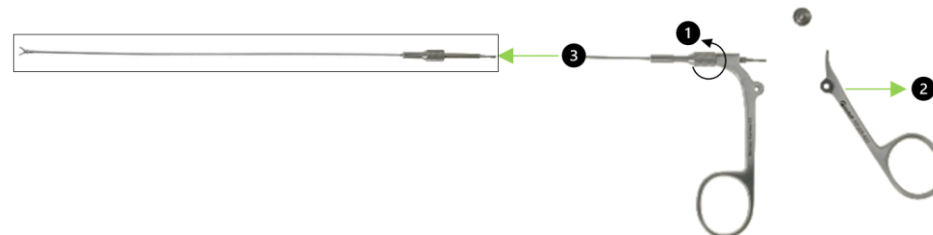

## MONTAGGIO

1. Inserire l'inserto (1) nell'apertura dell'impugnatura anteriore e avvitare il dado zigrinato in senso orario (2).
2. Posizionare il morso (3) prima di fissare la vite.
3. Inserire la parte dell'impugnatura per il pollice (4) con il gancio nella scanalatura (5) dell'inserto e nella chiusura per vite (6).

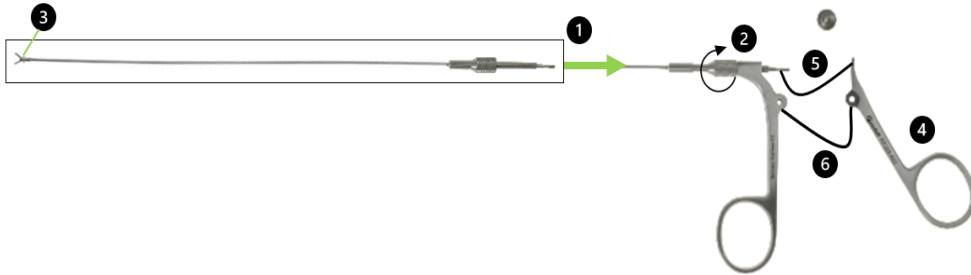

2. Fissare la vite sull'impugnatura in senso orario.



## SIMBOLI

	Consultare le istruzioni per l'uso.
	Codice del lotto
	Numero di catalogo
	Quantità in una confezione
	Non sterile
	Attenzione
	Produttore
	Data di produzione
	Marchio CE secondo la direttiva EG 93/42/EWG
	Lubrificare con olio medicale bianco senza silicone e biocompatibile, approvato per la sterilizzazione a vapore.
	Dispositivo medico