


NOTKUNARLEIÐBEININGAR (IS) AFTURFESTANLEG VERKFÆRI: PROCLEAN KERFI OG PEACOCK-EYE LÆSING



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen an der Donau,
Þýskaland
Símar +49 7463 9956-0
Fax +49 7463 9956-56
sales@RUDOLF-med.com
www.RUDOLF-med.com

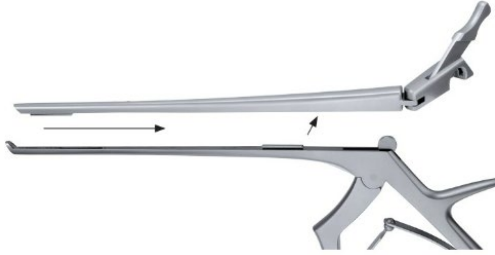

D0820 / Rev C / ACR00390 / 2026-03-20

VINSAMLEGAST LESIÐ ÁÐUR EN ENDURVINNSLA OG GEYMIÐ Á ÖRUGGUM STAÐ

Þessar leiðbeiningar um notkun gilda um RUDOLF Medical ProClean-tæki og um sundanlegan grip og skæri.

Þú ert að fá hágæða vöru, og rétt meðferð og notkun hennar er lýst hér að neðan.

Aðeins til faglegs notkunar: Tækin eru ætluð eingöngu faglegum notendum (skurðlæknum, skurðstofuhjúkrunarfræðingum og tæknimönnum sem endurmeðhöndla lækningatæki).

Sjúklingahópur: Engar takmarkanir gilda um sjúklingahópinn. Læknirinn getur metið, út frá sinni reynslu og fagþekkingu, hvort ávinningurinn vegur þyngra en áhættan í viðkomandi sjúklingahópi.



Eftirfarandi leiðbeiningar varða sundurliðun eftir skurðaðgerð og samsetningu eftir þrif og sótthreinsun.

Nákvæmar leiðbeiningar um endurvinnslu má finna í IFU D0462:



RUDOLF Medical tæki eru afhent ósteríl og þarf að þrifa, sótthreinsa og sterilísera fyrir fyrstu notkun og strax eftir hverja notkun. Verndarhettur og flutningsumbúðir skulu fjarlægðar fyrirfram.

Áður en sótthreinsun er ráðlagt að meðhöndla vélræna hluta tækisins með viðhaldsolíu.

Alhliða sjónræn og virknileg skoðun á tækjunum skal fara fram fyrir hverja notkun.

ÆTLAÐ NOTKUNARMARKMIÐ

Kjarna- og skurðtæki, húðskurðtæki, beinröngtæki, skeiðtöng og septumtöng eru ætluð til að skera í gegnum húð, slímhúð, brjósk eða beinefni og fjarlægja það af skurðsvæðinu.

Töng, hringlaga gafflar, flatir gafflar, samhliða flatir gafflar og vírgafflar eru ætlaðir til að halda og meðhöndla skurðtæki eða víra.

Saksar eru ætlaðir til að skera og meðhöndla húð, vefi og æðar, sem og til að skera saumefni og plástra.

Töng er ætluð til að grípa, meðhöndla og fjarlægja líffæri, bein, vefi og æðar.

MÓTSÖGN

Lækningatækin eru ekki ætluð til notkunar á miðtaugakerfi og blóðrásarkerfi.

ÁÐUR EN HVERRRI NOTKUN: SJÓNÆN OG STARFSHEILDARKOUN

Athuga:

- Ytri skemmdir (t.d. afmyndaður skaftur, inndjúp, burrar, sprungur eða skarpar brúnir)
- Rétt virkni (t.d. liðir, hengsl, hreyfanleiki)
- Leifar hreinsiefnis eða sótthreinsiefnis

AÐSKILJANLEG PRÓCLEAN TÆKI

- Afturkunnandi ProClean-tæki hafa hengd og afturkunnandi rennihásar.
- Tvær gerðir af ProClean-kerfinu eru til:
 - a) tæki með færanlegri rennihás og kjálka (rongeurs) sem situr á neðri föstu hásum
 - b) tæki með algerlega færanlegum rennihás og kjálka (skurðtæki).

Mynd: Dæmi 1 um ProClean-tæki með færanlegri rennihás og kjálka (rongeur) sem situr eftir á neðri föstu hásum.



RIFTAKÖRF


1. Snúðu opunarhandfanginu upp.



2. Losaðu opunarhandfangið úr páfuglsaugalæsingunni með því að ýta því til hægri.



3. Opnaðu efri rennihásinn og losaðu hann úr pinnatenginu (A) á kjálkanum.

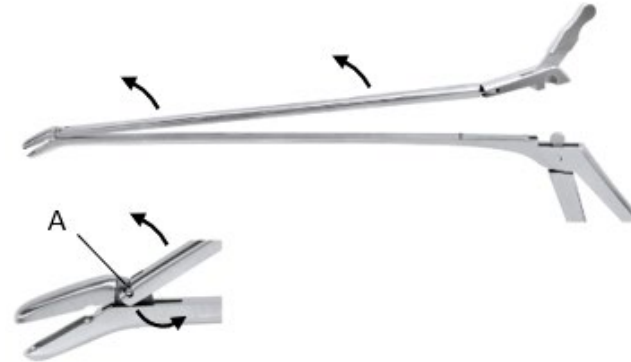


Mynd: Sundurgreint tæki



SAMSETNING

1. Festið efri rennihásinn við pinnatengið (A) á kjálkanum.
2. Lokaðu efri rennihásinum samsíða neðri föstu ásnum, með opunarhandfanginu á rennihásinum ýttu til hægri.
3. Ýttu opunarhandfanginu til vinstri inn í peacock-eye læsinguna.
4. Snúðu opunarhandfanginu niður og læstu rennihásinn.
5. Framkvæmdu virkniskoðun. Sjá kaflann "ÁÐUR EN NOTAÐ ER: SÝNISKOÐUN OG VIRKNISKOÐUN" í þessari handbók.

Mynd: Dæmi 2 um ProClean-tæki með algerlega færanlegum rennaás og kjálka (stungu)

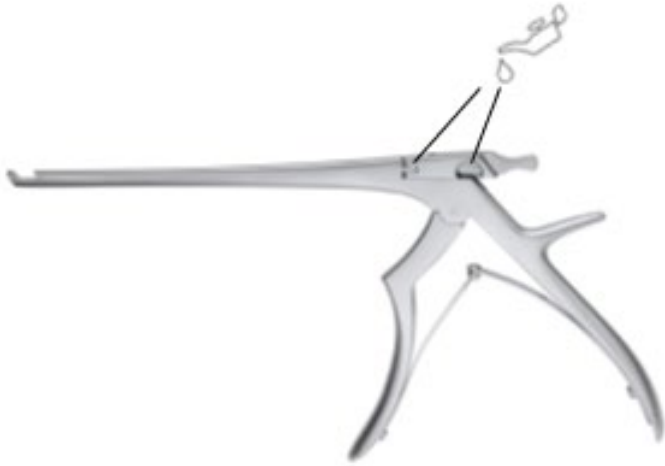

AÐ TAKA Í SUNNDA

1. Fellingið opunararmann upp




2. Losaðu opunararminn úr peacock-eye læsingunni með því að ýta honum til hægri.



3. Renndu efri renningarskaftinu til hægri út úr leiðsöguurillunum.



4. Taktu efri rennihásinn úr tækinu.

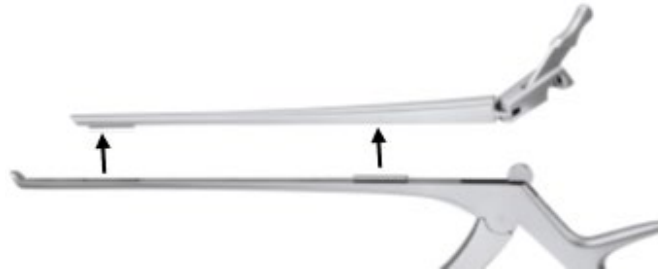


SAMSETNING

1. Opunararmurinn er snúinn til hægri. Settu efri hreyfanlega ásin á neðri fasta ásin þannig að leiðslurásirnar passi saman.
2. Færðu efri rennaöxulinn til vinstri þar til opunararmurinn er þrýstur inn í peacock-eye læsinguna.
3. Snúðu opunararminn niður og læstu rennihásinn.
4. Framkvæmdu virkniathugun. Sjá kaflann "ÁÐUR EN NOTAÐ ER: SÝNIS- OG VIRKNIATHUGUN" í þessari handbók.

AFLÖGÐ TÆKI MEÐ PEACOCK-EYE LÁSI


- Afturkæmandi tæki með Peacock-eye læsingu má taka í þrjá hluta, þau hafa samanbrjótanlegan rennaás og, ef þörf krefur, læsingarbolta.

Mynd: Dæmi um tæki með peacock-eye læsingu

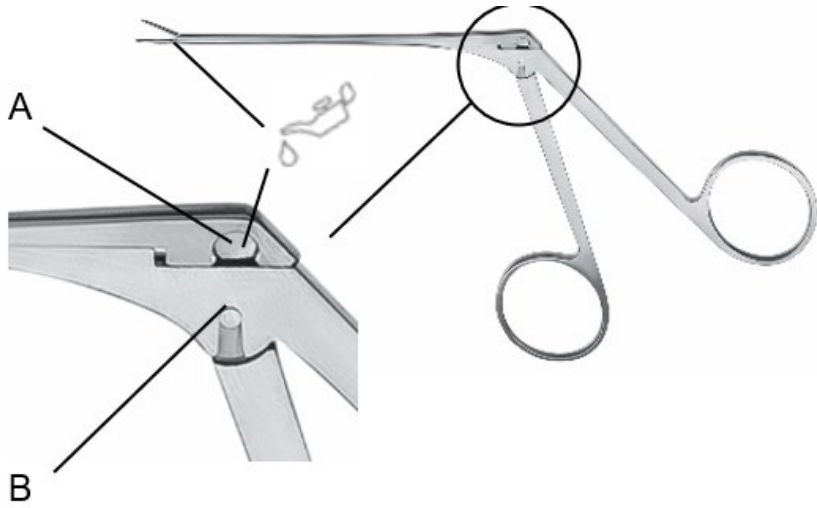


A = Peacock-eye læsing
B = Leiðarós

Mynd: Dæmi um tæki með Peacock-eye læsingu – afbrigði með læsingarklemmu (C)

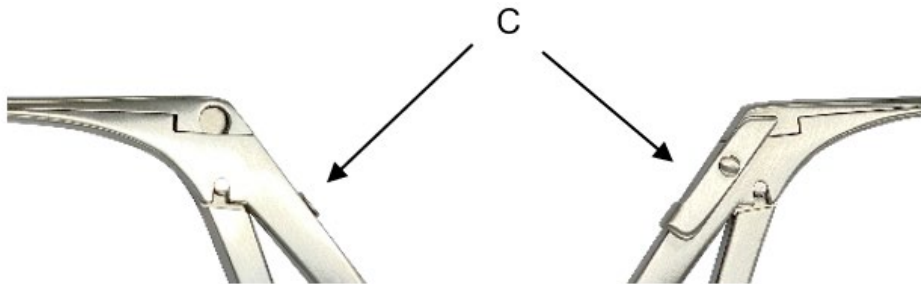


RIFUN


1. Þetta skref er nauðsynlegt aðeins fyrir valkost C: Læsið læsingarklemmuna.

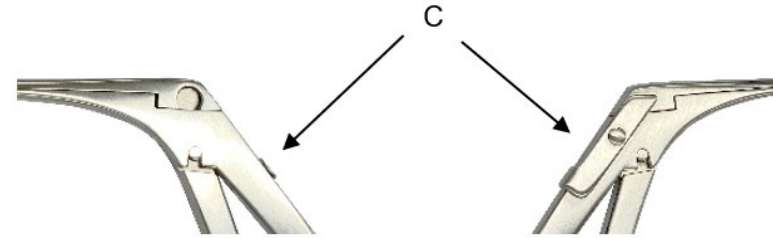


2. Ýttu efri rennihásinum út um ytri brún úr Peacock-eye læsingunni (A) og fellinguðu hann upp.

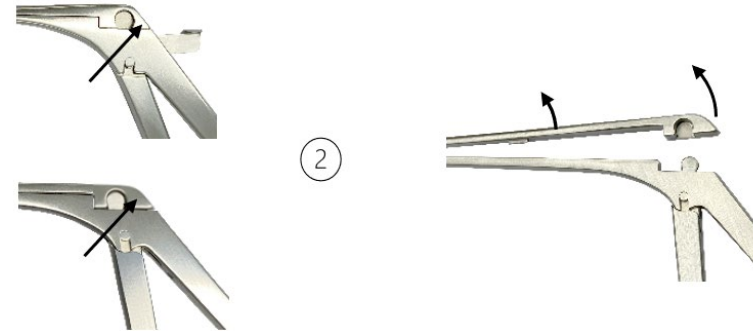

3. Losaðu færanlega, aftengjanlega handfangið úr leiðarbrautinni (B) á föstu tækilutanum með því að renna því niður.

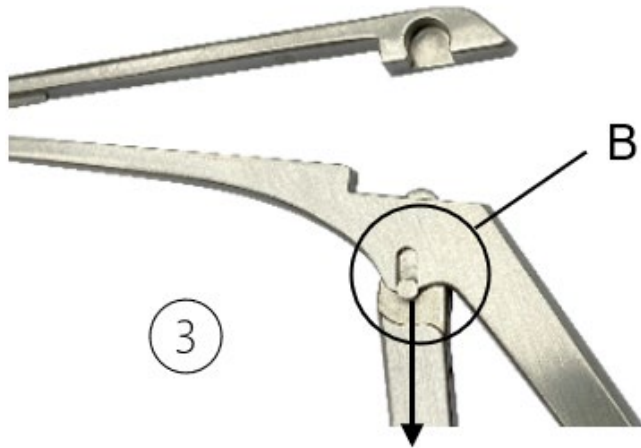


Mynd: Sundurgreint hjóðfæri

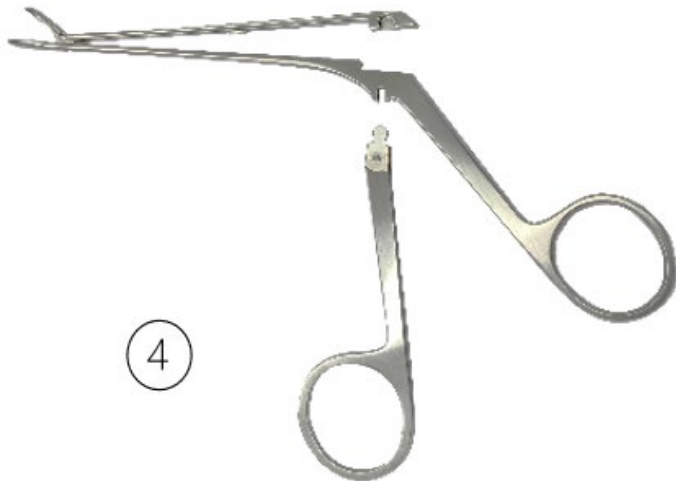


SAMSETNING


1. Settu færanlega handfangið alveg inn í leiðslurás fasta tækisins (B).

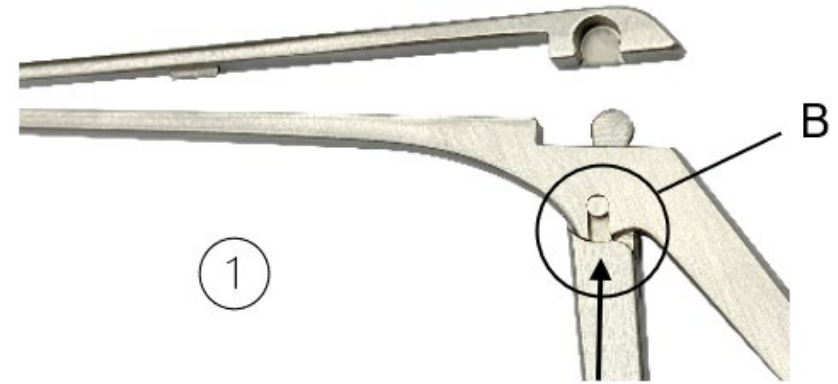


2. Ýttu efri rennihásinum niður og þrýstðu honum síðan varlega að neðri fasta ásnunum.

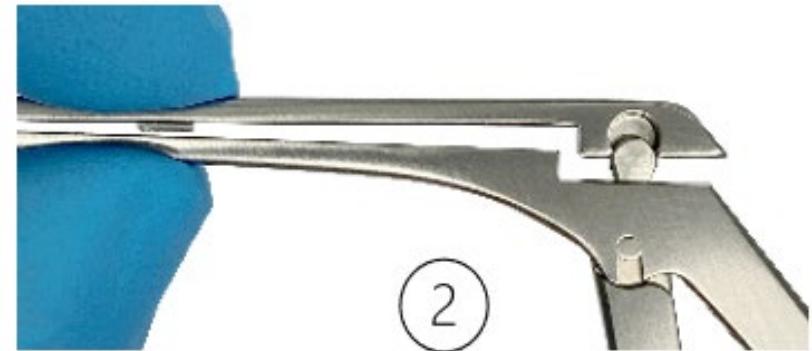

3. Kremdu efri og neðri rennihásana varlega saman svo leiðarhlutir beggja hasanna (D) festist saman.

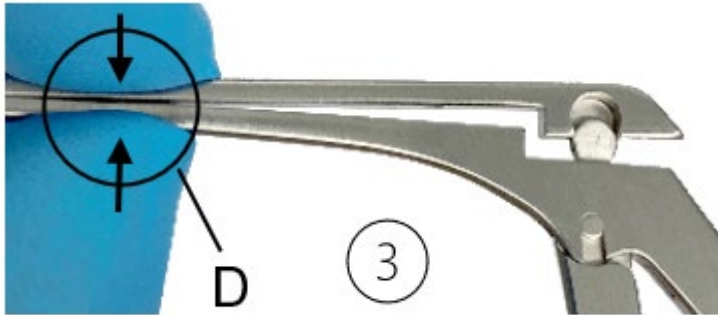

4. Tengja peacock-eye læsinguna. Til þess renndu hliðarmunninn á efri rennihásinum yfir peacock-eye hlutann á færænlega handfanginu.

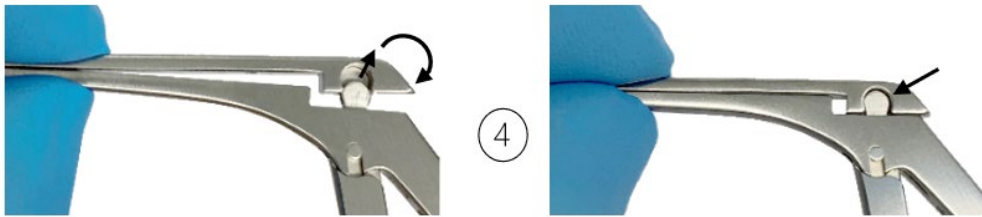

5. Þetta skref á eingöngu við þá útgáfu sem er með læsingarklemmu: Læsið henni. Til þess þrýstið læsingarklemmuna niður svo hún liggi að handfanginu.



6. Framkvæmdu virkniskoðun. Sjá kaflann "ÁÐUR EN NOTAÐ ER: SÝNISKOÐUN OG VIRKNISKOÐUN" í þessari handbók.

TÁKN

	Sjá leiðbeiningar um notkun.
LOT	Lotunúmer
REF	Vörunr.
QTY	Stk. á pakka
	Ósýklalyf
	Varúð
	Framleiðandi
	Framleiðsludagur
CE	CE-merki í samræmi við Reglugerð (ESB) 2017/745 um lækningatæki (MDR) með auðkennisnúmeri tilkynnts aðila
	Smyrðu með sílikonfríu, lífssamrýmanlegu hvítu lækningaolíu sem er samþykkt fyrir gufuaferð.
MD	Lækningatæki