


NOTKUNARLEIÐBEININGAR (IS)

Afturkræf tæki: PROCLEAN- og PEACOCK-EYE-LOCK kerfi

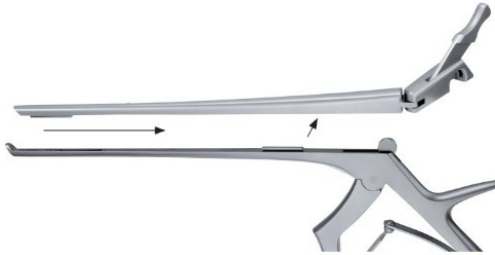

RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen an der Donau,
Þýskaland
Sími +49 7463 9956-0
sales@RUDOLF-med.com
www.RUDOLF-med.com

D0820 / Rev D / ACR01459 / 2026-06-03



Vinsamlegast lestu áður en endurmeðhöndlun fer fram og geymdu á öruggan stað

VARA

Þessar notkunarleiðbeiningar gilda um RUDOLF Medical PROCLEAN tækin og um sundurgreinanleg grip og skæri.

Þú ert að fá hágæða vöru, og rétt meðferð og notkun hennar er lýst hér að neðan.

Aðeins til faglegs notkunar: Tækin eru ætluð eingöngu faglegum notendum (skurðlæknum, skurðstofusjúkraliðum, tæknimönnum sem endurmeðlæggja lækningatæki).

Sjúklingahópur: Engar takmarkanir gilda um sjúklingahópinn. Læknirinn getur metið, út frá sinni reynslu og fagþekkingu, hvort ávinningurinn vegur þyngra en áhættan í viðkomandi sjúklingahópi.



Eftirfarandi leiðbeiningar varða sundurliðun eftir skurðaðgerð og samsetningu eftir þrif og sótthreinsun.

Nákvæmar leiðbeiningar um endurvinnslu má finna í IFU D0462:



Tæki frá RUDOLF Medical eru afhent ósteríl og þarf að þrifa, sótthreinsa og sterilísera fyrir fyrstu notkun og strax eftir hverja notkun. Verndarhettur og flutningsumbúðir skulu fjarlægðar fyrirfram.

Áður en sótthreinsun fer fram mælum við með að meðhöndla vélræna hluta tækisins með viðhaldsolíu.

Alhliða sjónræn og virknileg skoðun á tækjunum skal fara fram fyrir hverja notkun.

ÆTLAÐ NOTKUNARMARKMIÐ

Skurðarstungur, konchótómar, húðbor, beinröngur, skeiðtöng og septumtöng eru ætluð til að skera í gegnum húð, slímhúð, brjóska eða beinefni og fjarlægja það af skurðsvæðinu.

Töng, hringlaga grippar, flatar grippar, samhliða flatar grippar og vírgrippar eru ætlaðir til að halda og meðhöndla skurðtæki eða víra.

Saksar eru ætlaðir til að skera og meðhöndla húð, vefi og æðar, sem og til að skera saumefni og umbúðir.

Töng er ætluð til að grípa, meðhöndla og fjarlægja líffæri, bein, vefi og æðar.

MÓTA-VÍSUN

Lækningatækin eru ekki ætluð til notkunar á miðtaugakerfi né blóðrásarkerfi.

ÁÐUR EN HVERRRI NOTKUN: SJÓNÆN OG STARFSHEILDARKOUN

Athugaðu:

- Ytri skemmdir (t.d. afmyndaður skaftur, inndjúp, burrar, sprungur eða skarpar brúnir)
- Rétt virkni (t.d. liðir, hengsl, hreyfanleiki)
- Leifar hreinsiefnis eða sótthreinsiefnis

AÐSKILJANLEG PROCLEAN TÆKI

- Afturkræf PROCLEAN-tæki hafa hengd og færnanleg rennihreyfistöng.
- Það eru tvær gerðir af PROCLEAN kerfi:
 - a) Tæki með færnanlegri rennihás og kjálka sem situr á föstum neðri hás (töng)
 - b) Tæki með algerlega afnæmanlegri rennihás og kjálka (skurðtæki)

Mynd: Dæmi 1 um PROCLEAN-töng með færnanlegum rennihálsi og kjálka sem situr á neðri föstu skaftinu



Uppgreindur hljóðfæri

RIFTA


1. Lyftu opunarhandfanginu.



2. Losaðu opunarhandfangið úr páfuglsaugalásnum með því að ýta því til hægri.



3. Opnaðu efri rennihásinn og losaðu hann úr pinnatenginu (A) á kjálkanum.

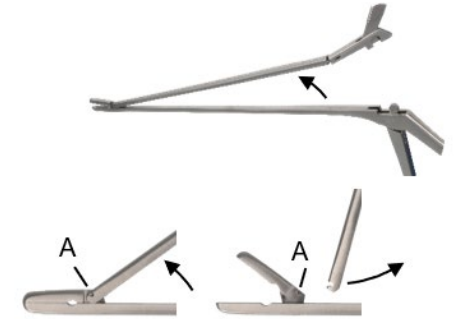

SAMSETNING

1. Festu efri rennihásinn við pinnatengið (A) á kjálkanum.
2. Lokaðu efri rennihásinum samsíða neðri fasta ásnum, með opunararminn á rennihásinum þrýstan til hægri.
3. Ýttu opunarhlutnum til vinstri inn í páfuglsaugalæsinguna.
4. Ýttu opunarhandfanginu niður og læstu rennihásinu.
5. Framkvæmdu virkniathugun. Sjá kaflann "ÁÐUR EN NOTKUN: SÝNIS- OG VIRKNISKOÐUN" í þessum leiðbeiningum.

Mynd: Dæmi 2 um PROCLEAN-punch með algerlega færnanlegum rennihás og kjálka



AÐ TAKA Í SUNNDA

1. Lyftu opunararminum.




2. Losaðu opunararminn úr peacock-eye læsingunni með því að ýta honum til hægri.



3. Renndu efri renndarásina til hægri út úr leiðarrennslunum.



4. Fjarlægjið efri rennihásinn úr tækinu.

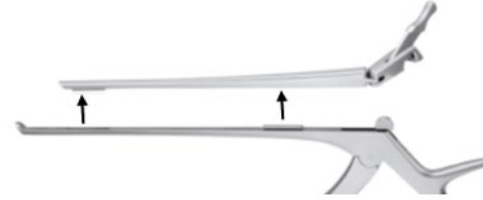


SAMSETNING

1. Opunararmurinn er snúinn til hægri. Settu efri rennihásinn á neðri fasta ásinn þannig að leiðarrennarnir passi saman.
2. Færðu efri rennihásinn til vinstri þar til opunararminn er hægt að ýta inn í páfuglsaugnólásinn.
3. Snúðu opunarhandfanginu niður og læstu rennihásinn.
4. Framkvæmdu virkniskoðun. Sjá kaflann "ÁÐUR EN NOTAÐ ER: SÝNISKOÐUN OG VIRKNISKOÐUN" í þessum leiðbeiningum.


AFLÖGÐANLEG TÆKI MEÐ PEACOCK-EYE LÁSI

- Afturkallanleg tæki með lás af peacock-eye-gerð má taka í þrjá hluta, þau hafa fellingsgullgastöng og, ef við á, læsingarklemmu.

Mynd: Dæmi um tæki með peacock-eye læsingu

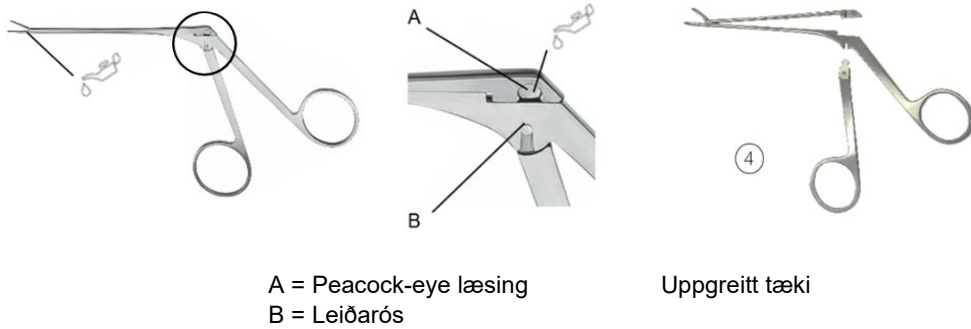

Mynd: Dæmi um hjóðfæri með peacock-eye læsingu – gerð með læsingarklemmu (C)

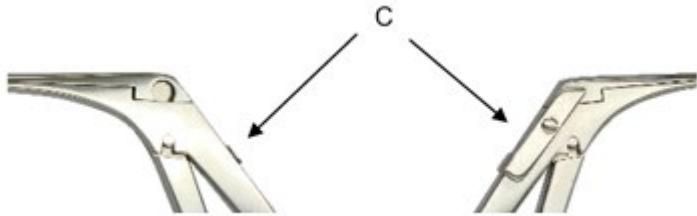

AÐSKIPTI

1. Þetta skref gildir aðeins um gerðina með læsingarklemmu (C): Læsið læsingarklemmunn.




2. Ýttu efri rennihásinum við ytri brún út úr peacock-eye læsingunni og brjóttu hann upp á við.




Gerð með læsihengli

3. Losaðu færanlega, aftengjanlega handfangið úr leiðarósanum (B) á föstu tækihlutunum með því að renna því niður.

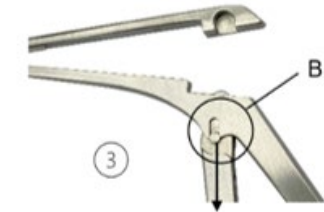

SAMSETNING


1. Settu færanlega handfangið alveg inn í leiðslurás fasta tækisins (B).

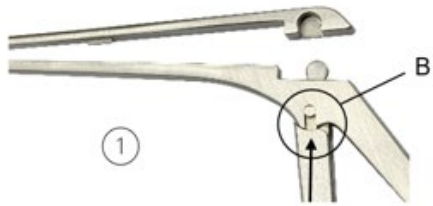

2. Ýttu efri rennihásinum niður og þrýstið honum síðan léttlega að neðri fasta hásinum.



3. Kremjið efri og neðri rennaásana varlega saman svo leiðarhlutir beggja ásanna (D) festist saman.

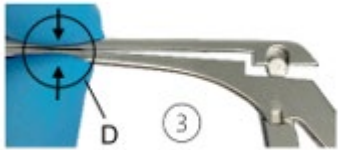

4. Tengdu peacock-eye læsinguna. Til þess renndu hliðarmunnan á efri rennihásinum yfir peacock-eye á færanlega handfanginu.






5. Þetta skref á eingöngu við gerð með læsingu: Læsið henni. Til þess þrýstið læsingunni niður svo hún liggi að handfanginu.



6. Framkvæmdu virkniskoðun. Sjá kaflann "ÁÐUR EN NOTAÐ ER: SÝNLEG OG VIRKNISKOÐUN" í þessum leiðbeiningum.

TÁKN

	Sjá notkunarleiðbeiningar.
LOT	Lotunúmer
REF	Vörunr.
QTY	Stk. á pakka
	Ósýklalyf
	Varúð
	Framleiðandi
	Framleiðsludagur
CE	CE-merki í samræmi við Reglugerð (ESB) 2017/745 um lækningatæki (MDR) með auðkennisnúmeri tilkynnts aðila
	Smyrðu með sílikonfríu, lífssamrýmanlegu hvítu lækningaolíu sem er samþykkt fyrir gufuþurrkun.
MD	Lækningatæki