

## BRUGSANVISNING (DA) SKALPELBLADE OG SKALPELHÅNDTAG



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG  
Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen an der Donau,  
Tyskland  
Tlf. +49 7463 9956-0  
Fax +49 7463 9956-56  
[sales@RUDOLF-med.com](mailto:sales@RUDOLF-med.com)  
[www.RUDOLF-med.com](http://www.RUDOLF-med.com)



D0839 / Rev B / ACR00474 / 2026-04-20

### LÆS VENLIGST FØR GENBEHANDLING OG OPBEVAR PÅ ET SIKKERT STED

#### PRODUKT

Denne brugsanvisning vedrører samling og adskillelse af RUDOLF Medical skalpelblade og skalpelhåndtag.

Du har modtaget et produkt af høj kvalitet, hvis korrekte håndtering og brug er beskrevet nedenfor.

**Kun til professionel brug:** Instrumenterne er udelukkende beregnet til brug af professionelle brugere (kirurger, operationssygeplejersker, teknikere til genoparbejdning af medicinsk udstyr).

**Patientgruppe:** Der er ingen begrænsninger vedrørende patientgruppen. Det kan overlades til den medicinske fagpersonens skøn og erfaring at afgøre, om fordelene opvejer risikoen i den pågældende patientgruppe.



Følgende instruktioner vedrører adskillelse efter det kirurgiske indgreb og samling efter rengøring og desinfektion.

Detaljerede instruktioner til genbehandling findes i brugsanvisningen D0462:



RUDOLF Medical-instrumenter leveres ikke-sterile og skal rengøres, desinficeres og steriliseres før første brug og umiddelbart efter hver brug. Beskyttelseskapper og transportemballage skal fjernes på forhånd.

Før sterilisering anbefaler vi at behandle instrumentets mekaniske dele med en vedligeholdelsesolie.

Der skal foretages en omfattende visuel og funktionel inspektion af instrumenterne før hver brug.

#### TILTÆNKT FORMÅL

Genanvendelige kirurgiske instrumenter er beregnet til kirurgiske indgreb og kan genbruges efter korrekt genbehandling.

#### KONTRAINDIKATION

Medicinsk udstyr er ikke beregnet til brug på centralnervesystemet og kredsløbssystemet.

#### ADVARSELER OG FORHOLDSREGLER

- Vær forsigtig ved brug og håndtering af skalpeller; der er risiko for skader.
- Når du vælger en skalpelklinge og et håndtag, skal du sikre dig, at de er kompatible med hinanden med hensyn til samlingen.
- Undgå at udøve for stor kraft eller tryk på skalpelbladet ved samling/adskillelse, da det kan knække og forårsage skader.

#### FØR HVER BRUG: VISUEL OG FUNKTIONEL INSPEKTION

Kontroller for:

- Ydre skader (f.eks. buler, grater, revner eller skarpe kanter)
- Korrekt funktion
- Rester af rengørings- eller desinfektionsmidler

## PRODUKTBESKRIVELSE

⚠ Skapelblade kan kun kombineres med håndtag af samme tilslutningstype.

### Skapelhåndtag til klinger med kort fastspændingslængde


Skapelhåndtagene til modellerne 3, 3L, 3LA, 5, 5A, 7 og 7K har en tilslutning til skapelblade med kort fastspændingslængde.

### Skapelhåndtag til klinger med lang fastspændingslængde

Skapelhåndtagene til modellerne 4, 4L og 4LA har en tilslutning til skapelklinger med lang fastspændingslængde.


#### Montering:

1. Placer skapelbladet med øjet (1) på tilslutningen på skapelhåndtaget (2).
2. Indsæt skapelbladet i rillerne på håndtagets tilslutning.
3. Skub skapelbladet helt ind i håndtagets tilslutning. Bladets ende klikker på plads.

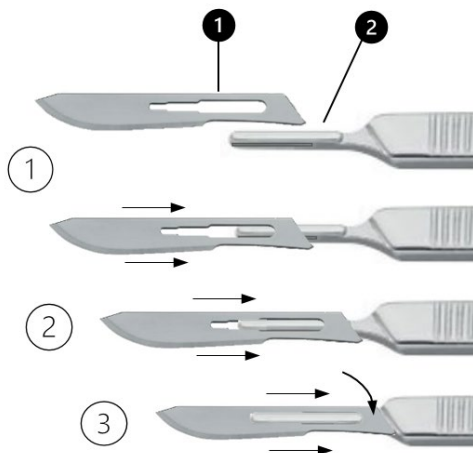

#### Demontering:

1. Tryk den fjedrende ende af skapelbladet (1) ud af håndtagsforbindelsen, indtil det kan skubbes tilbage gennem forbindelsens riller (2).
2. Skub skapelbladet tilbage ud af håndtagets spalte, indtil håndtaget løsnes fra øjet.
3. Fjern skapelbladet fra håndtaget.

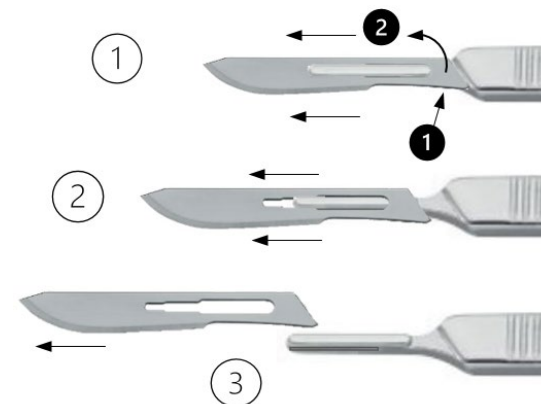

### Skapelhåndtag til miniskalpel-systemet


Skapelhåndtag til mini-skapelklinger har en fastspændingsanordning, hvori en mini-skapelklinge kan fastspændes.

Disse håndtag består af tre dele og kan skilles ad. De består af en spændetang (1), en riflet møtrik (2) og et håndtag (3).




#### Montering:

1. Sæt den riflede møtrik (2) på håndtaget (3).
2. Indsæt spændetangen (1) gennem den riflede møtrik i håndtaget, og skru den fast med uret sammen med håndtaget.
3. Indsæt enden af skapelbladet helt i spændetangen. Hold fast i den riflede møtrik og stram skapelbladet med håndtaget.

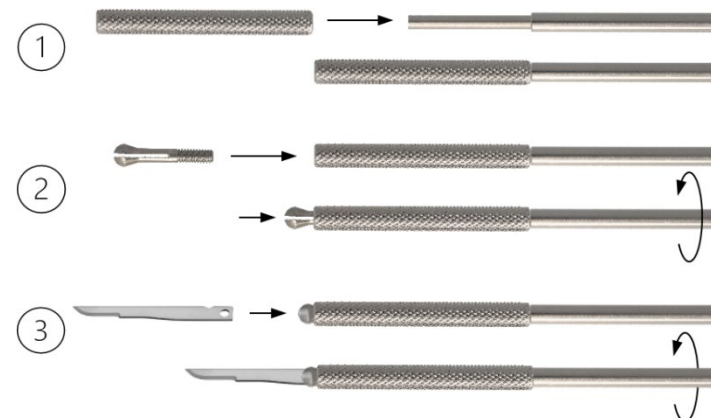





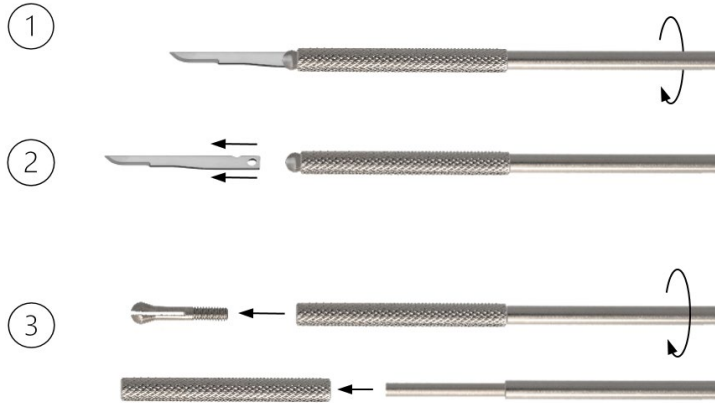





### **Demontering:**

1. Løsn spændetangen (1) ved at dreje håndtaget (3) mod uret, mens du holder fast i den riflede møtrik (2).
2. Fjern skalpelbladet.
3. Demonter nu håndtaget med henblik på genbehandling. Løsn spændetangen (1) fra håndtaget ved at dreje håndtaget yderligere mod uret. Fjern derefter den riflede møtrik fra håndtaget.



### **SYMBOLER**

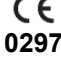	Se vejledningen
	Partikode
	Varenr.
	Antal pr. pakke
	Ikke-sterilt
	Advarsel
	Producent
	Fremstillingsdato
	CE-mærkning i henhold til forordning (EU) 2017/745 for medicinsk udstyr med bemyndiget organets identifikationsnummer
	Medicinsk udstyr