

KASUTUSJUHE (ET) SKALPELLITERAD JA SKALPELLIKÄEPID



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen an der Donau,
Saksamaa
Tel. +49 7463 9956-0
Faks +49 7463 9956-56
sales@RUDOLF-med.com
www.RUDOLF-med.com



D0839 / Rev B / ACR00474 / 2026-04-20

PALUN LUGEGE ENNE TAASKASUTAMIST JA HOIDKE OHUTUS KOHTAS

TOODE

Käesolevad kasutusjuhised käsitlevad RUDOLF Medicali skalpelliterade ja skalpellikahvade kokkupanekut ja lahtivõtmist.

Te saate kvaliteetse toote, mille õige käitlemine ja kasutamine on kirjeldatud allpool.

Ainult professionaalseks kasutamiseks: instrumendid on mõeldud kasutamiseks ainult professionaalsetele kasutajatele (kirurgid, operatsioonisaali õed, meditsiiniseadmete töötlemise tehnikud).

Patsientide rühm: Patsientide rühma suhtes ei ole piiranguid. Meditsiinitöötaja võib oma äranägemise ja kogemuste põhjal otsustada, kas kasu ületab riski antud patsientide rühma puhul.



Järgmised juhised käsitlevad lahtivõtmist pärast kirurgilist protseduuri ning kokkupanemist pärast puhastamist ja desinfitseerimist.

Täpsed töötlemisjuhised leiate kasutusjuhendist D0462:



RUDOLF Medicali instrumendid tarnitakse mittesterilsetena ja need tuleb enne esimest kasutamist ning kohe pärast iga kasutamist puhastada, desinfitseerida ja steriliseerida. Enne seda tuleb eemaldada kaitsekapslid ja transportipakend.

Enne steriliseerimist soovitage instrumendi mehaanilisi osi hooldusõliga töödelda.

Enne iga kasutamist tuleb instrumendid põhjalikult visuaalselt ja funktsionaalselt üle vaadata.

KASUTUSOTSTARVE

Korduvkasutatavad kirurgilised instrumendid on mõeldud kirurgilisteks protseduurideks ja neid saab pärast nõuetekohast töötlemist uuesti kasutada.

VASTUNÄIDUSTUS

Meditsiiniseadmed ei ole mõeldud kasutamiseks kesknärvisüsteemis ja vereringesüsteemis.

HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD

- Olge skalpelliga kasutamisel ja käsitsemisel ettevaatlik, kuna on olemas vigastuste oht.
- Skalpelli tera ja käepideme valimisel veenduge, et need sobivad üksteisega kokku.
- Kokku- ja lahtimonteerimisel vältige skalpelli terale liigse jõu või surve avaldamist, kuna see võib puruneda ja põhjustada vigastusi.

ENNE IGA KASUTAMIST: VISUAALNE JA FUNKTIONAALNE KONTROLL

Kontrollige järgmist:

- Välised kahjustused (nt mõlgid, kriimustused, praod või teravad servad)
- Õige toimimine
- Puhastus- või desinfektsioonivahendi jääke

TOOTE KIRJELDUS

⚠ Skalpelli terasid saab kasutada ainult sama tüüpi kinnitusega käepidemetega.

Skalpelli käepidemed lühikese kinnituspikkusega teradele


Skalpelliga käepidemed mudelitel 3, 3L, 3LA, 5, 5A, 7 ja 7K on ühendus lühikese kinnituspikkusega skalpelliga teradele.

Skalpelliga käepidemed pika kinnituspikkusega teradele

Mudelitel 4, 4L ja 4LA skalpelliga käepidemed on ühendusega pika kinnituspikkusega skalpelliga teradele.


Paigaldamine:

1. Asetage skalpelliga tera (1) skalpelliga käepideme (2) ühendusele.
2. Sisestage skalpelliga terad käepideme ühenduse soonte vahele.
3. Suruge skalpelliga tera täielikult käepideme ühenduskohtadesse. Terade otsad klõpsuvad paika.

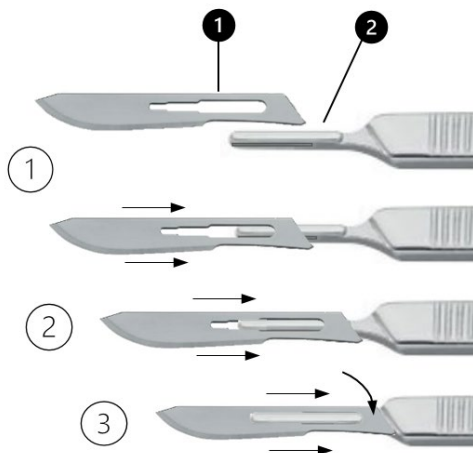

Lahtimonteerimine:

1. Suruge skalpelliga tera (1) vedruotsa käepideme ühendusest välja, kuni seda saab tagasi suruda ühenduse soonte (2) kaudu.
2. Lükake skalpelliga tera käepideme pilust välja, kuni käepideme vabaneb aasast.
3. Eemaldage skalpelliga tera käepidemest.

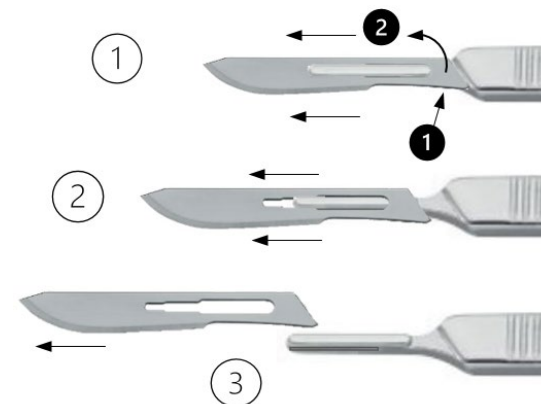

Skalpelliga käepidemed miniskalpelliga süsteemi jaoks


Mini-skalpelliga terade käepidemed on varustatud kinnitusseadmega, millesse saab mini-skalpelliga terad kinnitada.

Need käepidemed on kolmest osast koosnevad ja neid saab lahti võtta. Need koosnevad kinnitusmuhvist (1), rihveldatud mutrist (2) ja käepidemest (3).




Kokku panemine:

1. Asetage rihveldnutri (2) käepideme (3) peale.
2. Sisestage kinnitusmuhv (1) rihveldatud mutri kaudu käepidemesse ja keerake seda käepidemega päripidi kinni.
3. Sisestage skalpelliga terade ots täielikult kinnitusmuhvi. Hoides kinni rihveldnutrit, pingutage skalpelliga terad käepideme abil.

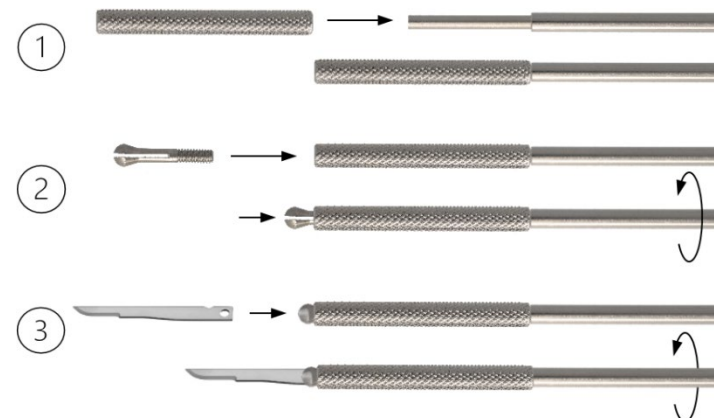





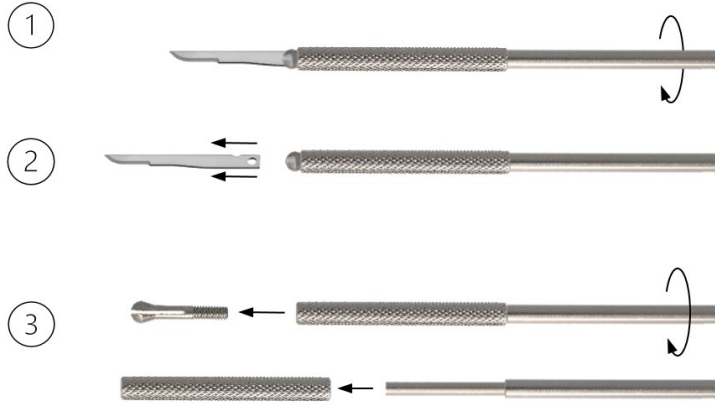





Lahtimonteerimine:

1. Vabastage kinnitusmuhv (1), keerates käepidet (3) vastupäeva, hoides samal ajal rihvelmutrit (2) kindlalt kinni.
2. Eemaldage skalpelli tera.
3. Nüüd lahti monteerige käepide taaskasutamiseks. Vabastage kinnitusmuhv (1) käepidemest, keerates käepidet veelgi vastupäeva. Seejärel eemaldage rihvelmutter käepidemest.



SÜMBOLID

	Vaadake juhiseid
	Partii kood
	Artikli nr
	Kogus pakendis
	Mitte-steriilne
	Ettevaatlik
	Tootja
	Valmistamiskuupäev
	CE-märgistus vastavalt määrusele (EL) 2017/745 meditsiiniseadmete kohta, millel on teavitatud asutuse identifitseerimisnumber
	Meditsiiniseade