

KÄYTTÖOHJEET (FI) SKALPELLITERÄT JA SKALPELLIKAHVAT



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen an der Donau,
Saksa
Puh. +49 7463 9956-0
Faksi +49 7463 9956-56
sales@RUDOLF-med.com
www.RUDOLF-med.com



D0839 / Rev B / ACR00474 / 2026-04-20

LUE ENNEN UDELLEENKÄSITTELYÄ JA SÄILYÄ TURVALLISESSA PAIKASSA

TUOTE

Nämä käyttöohjeet koskevat RUDOLF Medical -skalpelliterien ja -kahvojen kokoamista ja purkamista.

Olet saanut korkealaatuisen tuotteen, jonka oikea käsittely ja käyttö on kuvattu alla.

Vain ammattikäyttöön: Instrumentit on tarkoitettu vain ammattikäyttäjille (kirurgit, leikkaussalihoitajat, lääkinnällisten laitteiden käsittelytekniikot).

Potilasryhmä: Potilasryhmää koskevia rajoituksia ei ole. Lääketieteen ammattilainen voi oman harkintansa ja kokemuksensa perusteella päättää, onko hyöty suurempi kuin riski kyseisessä potilasryhmässä.



Seuraavat ohjeet koskevat purkamista leikkauksen jälkeen sekä kokoamista puhdistuksen ja desinfiointin jälkeen.

Yksityiskohtaiset ohjeet käsittelystä löytyvät käyttöohjeesta D0462:



RUDOLF Medical -instrumentit toimitetaan ei-steriileinä, ja ne on puhdistettava, desinfioitava ja steriloitava ennen ensimmäistä käyttöä ja välittömästi jokaisen käytön jälkeen. Suojakorkit ja kuljetuspakkaus on poistettava etukäteen.

Ennen sterilointia suosittelemme käsittelemään instrumentin mekaaniset osat huoltoöljyllä.

Ennen jokaista käyttökertaa on suoritettava kattava instrumenttien silmämääräinen ja toiminnallinen tarkastus.

KÄYTTÖTARKOITUS

Uudelleenkäytettävät kirurgiset instrumentit on tarkoitettu kirurgisiin toimenpiteisiin, ja niitä voidaan käyttää uudelleen asianmukaisen uudelleenkäsittelyn jälkeen.

VASTA-AIHE

Lääkinnällisiä laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi keskushermosto- tai verenkiertoelimistössä.

VAROITUKSET JA VAROTOIMET

- Ole varovainen skalpellien käytössä ja käsittelyssä; loukkaantumisvaara.
- Kun valitset skalpellin terää ja kahvaa, varmista, että ne sopivat yhteen liitoksen osalta.
- Kokoamisen/purkamisen yhteydessä vältä liiallista voimaa tai painetta skalpellin terään, sillä se voi rikkoutua ja aiheuttaa loukkaantumisia.

ENNE JOKAISTA KÄYTTÖÄ: SILMÄMÄINEN JA TOIMINTAKOKEILU

Tarkista seuraavat seikat:

- Ulkoiset vauriot (esim. kolhut, purseet, halkeamat tai terävät reunat)
- Oikea toiminta
- Puhdistusaineen tai desinfiointiaineen jäämät

TUOTTEEN KUVAUS

⚠ Skalpelligerät voidaan yhdistää vain saman liitostyyppin kahvoihin.

Skalpelligerät terille, joiden kiinnityspituus on lyhyt


Mallien 3, 3L, 3LA, 5, 5A, 7 ja 7K skalpelligeröissa on liitin lyhyen kiinnityspituuden skalpelligeröille.

Skalpelligerät terille, joiden kiinnityspituus on pitkä

Mallien 4, 4L ja 4LA skalpelligeröissa on liitin pitkän kiinnityspituuden skalpelligeröille.


Asennus:

1. Aseta skalpelligerä silmukalla (1) skalpelligerän (2) liitäntään.
2. Työnnä skalpelligerä kahvan liitoksen uriin.
3. Työnnä skalpelligerä kokonaan kahvan liitäntään. Terän pää napsahtaa paikalleen.

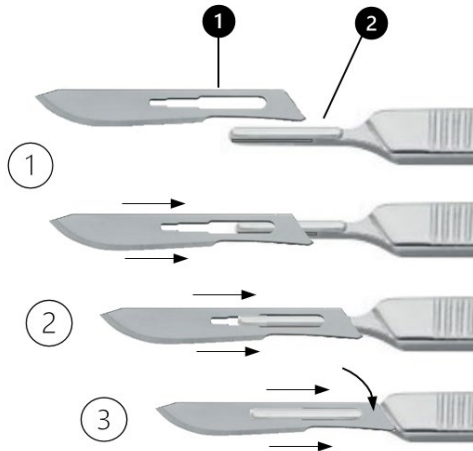

Purkaminen:

1. Paina skalpelligerän (1) joustava pää ulos kahvan liitoksesta, kunnes se voidaan työntää takaisin liitoksen urien (2) läpi.
2. Liu'uta skalpelligerä ulos kahvan urasta, kunnes kahva irtoaa silmukasta.
3. Poista skalpelligerä kahvasta.

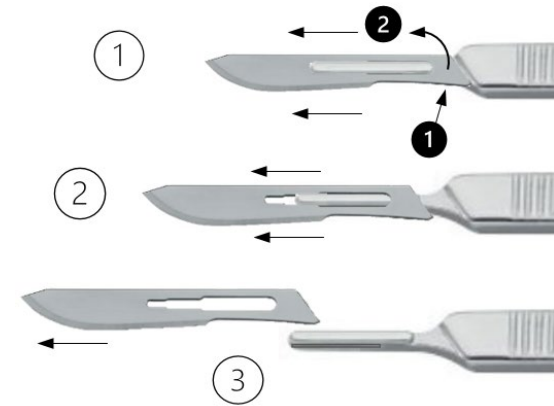

Skalpelligerät miniskalpelligerätjärjestelmään


Mini-skalpelligerien kahvoissa on kiinnityslaitte, johon mini-skalpelligerä voidaan kiinnittää.

Nämä kahvat ovat kolmiosaisia ja ne voidaan purkaa. Ne koostuvat kiristysholkista (1), karhennetusta mutterista (2) ja kahvasta (3).




Kokoaminen:

1. Aseta karhennettu mutteri (2) kahvaan (3).
2. Työnnä kiristysholkki (1) karhennetun mutterin läpi kahvaan ja kierrä sitä myötäpäivään kahvan kanssa.
3. Työnnä skalpelligerän pää kokonaan kiristysholkkiin. Pidä kiinni karhennetusta mutterista ja kiristä skalpelligerä kahvalla.

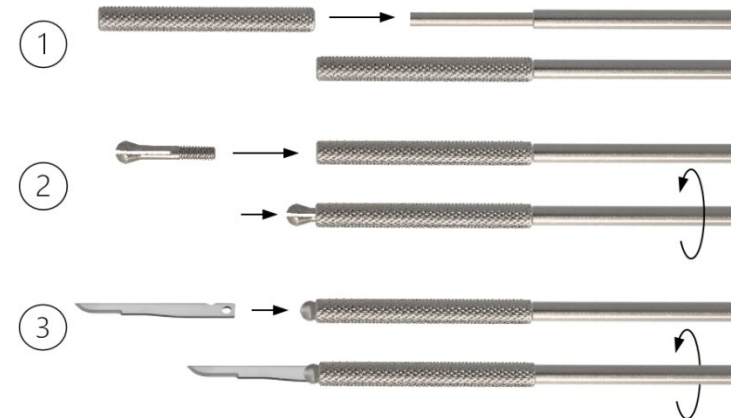





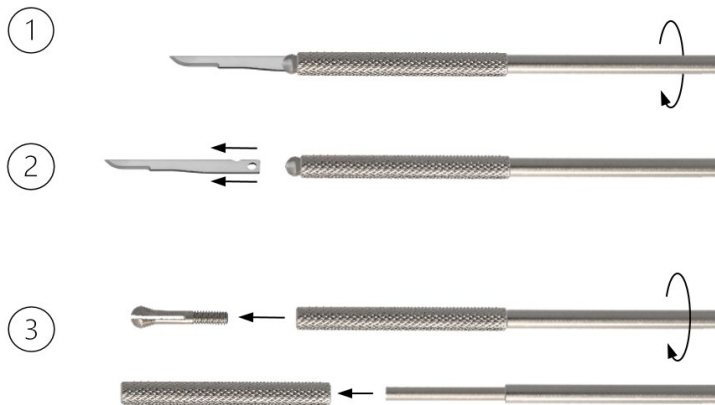


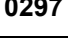


Purkaminen:

1. Vapauta kiristysholkki (1) kääntämällä kahvaa (3) vastapäivään samalla kun pidät kiinteästi kiinni karhennetusta mutterista (2).
2. Poista skalpelliterä.
3. Pura nyt kahva uudelleenkäsittelyä varten. Vapauta kiristysholkki (1) kahvasta kääntämällä kahvaa edelleen vastapäivään. Poista sitten karhennettu mutteri kahvasta.



SYMBOLIT

	Katso ohjeet
	Eränumero
	Tuotenro
	Kpl/pakkaus
	Ei-steriili
	Varoitus
	Valmistaja
	Valmistuspäivä
	CE-merkintä asetuksen (EU) 2017/745 mukaisesti lääkitäisille laitteille, joilla on ilmoitetun laitoksen tunnistenumero
	Lääkitäislinen laite