

MODE D'EMPLOI (FR)

LAMES DE SCALPEL ET MANCHES DE SCALPEL



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen an der Donau,
Allemagne
Tél. +49 7463 9956-0
Fax +49 7463 9956-56
sales@RUDOLF-med.com
www.RUDOLF-med.com



D0839 / Rév. B / ACR00474 / 2026-04-20

À LIRE AVANT LE RETRAITEMENT ET À CONSERVER EN LIEU SÛR

PRODUIT

Ce mode d'emploi concerne le montage et le démontage des lames et des manches de scalpel RUDOLF Medical.

Vous recevez un produit de haute qualité dont la manipulation et l'utilisation correctes sont décrites ci-dessous.

À usage professionnel uniquement : les instruments sont destinés à être utilisés uniquement par des professionnels (chirurgiens, infirmiers de bloc opératoire, techniciens en retraitement des dispositifs médicaux).

Population de patients : il n'y a aucune restriction concernant la population de patients. Il appartient au professionnel de santé, en fonction de son expérience, de décider si les bénéfices l'emportent sur les risques pour la population concernée.



Les instructions suivantes concernent le démontage après l'intervention chirurgicale et le remontage après le nettoyage et la désinfection.

Des instructions détaillées pour le retraitement sont disponibles dans la notice d'utilisation D0462 :



Les instruments RUDOLF Medical sont fournis non stériles et doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés avant la première utilisation et immédiatement après chaque utilisation. Les capuchons de protection et l'emballage de transport doivent être retirés au préalable.

Avant la stérilisation, nous recommandons de traiter les parties mécaniques de l'instrument avec une huile d'entretien.

Une inspection visuelle et fonctionnelle complète des instruments doit être effectuée avant chaque utilisation.

UTILISATION PRÉVUE

Les instruments chirurgicaux réutilisables sont destinés à des interventions chirurgicales et peuvent être réutilisés après un retraitement conforme.

CONTRE-INDICATIONS

Ces dispositifs médicaux ne sont pas destinés à être utilisés sur le système nerveux central et le système circulatoire.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Soyez prudent lors de l'utilisation et de la manipulation des scalpels ; il existe un risque de blessure.
- Lors du choix d'une lame et d'un manche de scalpel, assurez-vous qu'ils sont compatibles entre eux au niveau de la connexion.
- Lors du montage/démontage, évitez d'exercer une force ou une pression excessive sur la lame du scalpel, car celle-ci pourrait se briser et causer des blessures.

AVANT CHAQUE UTILISATION : INSPECTION VISUELLE ET FONCTIONNELLE

Vérifiez :

- Dommages externes (par exemple, bosses, bavures, fissures ou arêtes vives)
- Le bon fonctionnement
- La présence de résidus de produit nettoyant ou de désinfectant

DESCRIPTION DU PRODUIT

⚠ Les lames de scalpel ne peuvent être utilisées qu'avec des manches de même type de fixation.

Manches de scalpel pour lames à courte longueur de serrage


Les manches de scalpel des modèles 3, 3L, 3LA, 5, 5A, 7 et 7K sont équipés d'une connexion pour lames de scalpel à courte longueur de serrage.

Manches de scalpel pour lames à longue longueur de serrage

Les manches de scalpel des modèles 4, 4L et 4LA sont équipés d'une fixation pour lames de scalpel à longue longueur de serrage.


Montage :

1. Placez la lame de scalpel avec l'œillet (1) sur la fixation du manche de scalpel (2).
2. Insérez la lame de scalpel dans les rainures de la fixation du manche.
3. Enfoncez complètement la lame de scalpel dans la connexion du manche. L'extrémité de la lame s'enclenche.

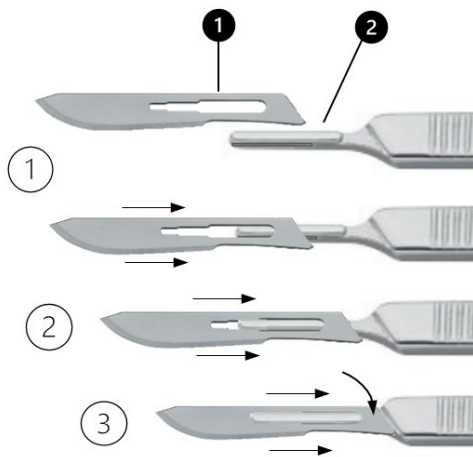

Démontage :

1. Appuyez sur l'extrémité élastique de la lame de scalpel (1) pour la faire sortir du raccord du manche jusqu'à ce qu'elle puisse être repoussée à travers les rainures du raccord (2).
2. Faites glisser la lame de scalpel hors de la fente du manche jusqu'à ce que le manche se détache de son œillet.
3. Retirez la lame de scalpel du manche.

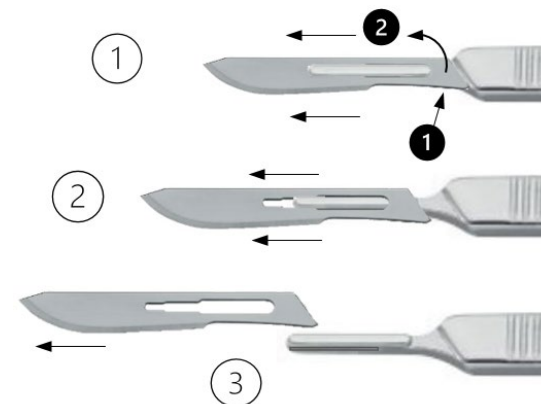

Manches de scalpel pour le système de mini-scalpel


Les manches de scalpel pour lames de mini-scalpel sont équipés d'un dispositif de serrage dans lequel une lame de mini-scalpel peut être fixée.

Ces manches sont composés de trois parties et peuvent être démontés. Ils se composent d'une douille (1), d'un écrou moleté (2) et d'un manche (3).




Montage :

1. Placez l'écrou moleté (2) sur la poignée (3).
2. Insérez la douille (1) à travers l'écrou moleté dans la poignée et vissez-la dans le sens des aiguilles d'une montre avec la poignée.
3. Insérez complètement l'extrémité de la lame de scalpel dans la douille. Tenez l'écrou moleté et serrez la lame de scalpel à l'aide de la poignée.

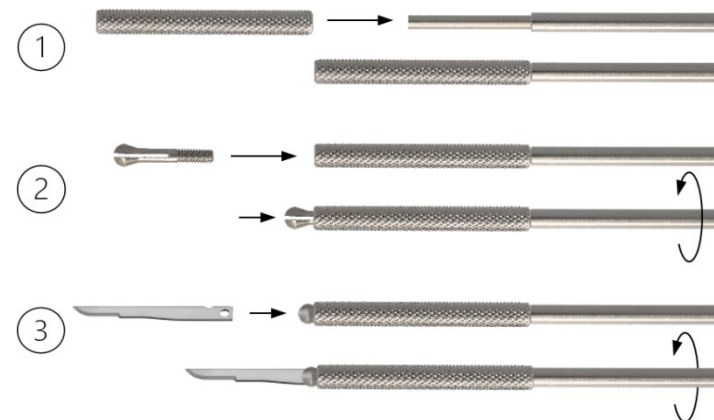





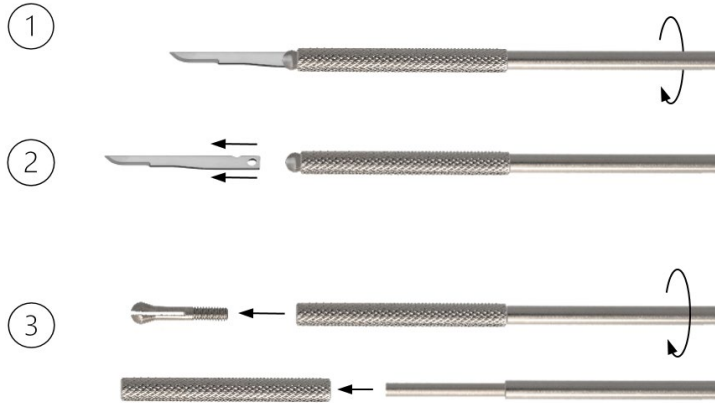





Démontage :

1. Desserrez la pince de serrage (1) en tournant la poignée (3) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout en maintenant fermement l'écrou moleté (2).
2. Retirez la lame de scalpel.
3. Démontez ensuite la poignée pour la retraiter. Libérez la pince de serrage (1) de la poignée en tournant celle-ci davantage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez ensuite l'écrou moleté de la poignée.



SYMBOLES

| | |
|---|---|
|  | Consultez les instructions |
|  | Code de lot |
|  | Référence |
|  | Nb. par emballage |
|  | Non stérile |
|  | Attention |
|  | Fabricant |
|  | Date de fabrication |
|  | Marquage CE conformément au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, avec numéro d'identification de l'organisme notifié |
|  | Dispositif médical |