

UPUTE ZA UPOTREBU (HR) LOPATICE SKALPELA I DRŠKE SKALPELA



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen an der Donau,
Njemačka
Tel. +49 7463 9956-0
Fax +49 7463 9956-56
sales@RUDOLF-med.com
www.RUDOLF-med.com



D0839 / Rev B / ACR00474 / 2026-04-20

MOLIMO PROČITAJTE PRIJE PONOVNE OBRADJE I ČUVAJTE NA SIGURNOM MJESTU

PROIZVOD

Ove upute za uporabu odnose se na sastavljanje i rastavljanje oštrica skalpela i drške skalpela tvrtke RUDOLF Medical.

Dobivate visokokvalitetan proizvod, čije su pravilno rukovanje i uporaba opisani u nastavku.

Samo za profesionalnu upotrebu: Instrumenti su namijenjeni isključivo za upotrebu od strane stručnih korisnika (kirurga, medicinskih sestara u operacijskoj sali, tehničara za reprocesiranje medicinskih proizvoda).

Populacija pacijenata: Ne postoje ograničenja u pogledu populacije pacijenata. Odluku o tome nadmašuje li korist rizik za određenu populaciju može donijeti medicinski stručnjak prema vlastitom nahođenju i iskustvu.



Sljedeće upute odnose se na rastavljanje nakon kirurškog zahvata i na sastavljanje nakon čišćenja i dezinfekcije.

Detaljne upute za reprocesiranje mogu se pronaći u IFU D0462:



Instrumenti RUDOLF Medical isporučuju se nesterilni i moraju se očistiti, dezinficirati i sterilizirati prije prve uporabe i odmah nakon svake uporabe. Zaštitne kapice i transportna ambalaža moraju se prethodno ukloniti.

Prije sterilizacije preporučujemo tretiranje mehaničkih dijelova instrumenta uljem za održavanje.

Prije svake uporabe treba provesti sveobuhvatnu vizualnu i funkcionalnu inspekciju instrumenata.

NAZNAČENA UPOTREBA

Višekratno upotrebljivi kirurški instrumenti namijenjeni su kirurškim zahvatima i mogu se ponovno koristiti nakon kvalificirane obrade.

KONTRAINDIKACIJA

Medicinski uređaji nisu namijenjeni za upotrebu na središnjem živčanom i krvožilnom sustavu.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

- Budite oprezni pri korištenju i rukovanju skalpelima; postoji rizik od ozljede.
- Prilikom odabira oštrice i drške skalpela, provjerite jesu li kompatibilni međusobno u pogledu spoja.
- Prilikom sastavljanja/rasastavljanja izbjegavajte primjenu prekomjerne sile ili pritiska na oštricu skalpela jer se može slomiti i uzrokovati ozljede.

PRIJE SVAKE UPOTREBE: VIZUALNI I FUNKCIONALNI PREGLED

Provjerite:

- Vanjsko oštećenje (npr. udubljenja, žljebovi, pukotine ili oštri rubovi)
- ispravno funkcioniranje
- Ostatke sredstva za čišćenje ili dezinfekciju

OPIS PROIZVODA

⚠ Oštrice skalpela mogu se kombinirati samo s drškama istog tipa priključka.

Drške skalpela za oštrice s kratkom dužinom stezanja


Drške skalpela modela 3, 3L, 3LA, 5, 5A, 7 i 7K imaju priključak za oštrice skalpela s kratkom dužinom hvatanja.

Drške skalpela za oštrice s dugom radnom duljinom

Drške skalpela modela 4, 4L i 4LA imaju spoj za skalpelne oštrice s dugom dužinom stezanja.


Sklapanje:

1. Postavite skalpelno oštricu s očicom (1) na spoj drške skalpela (2).
2. Umetnite skalpelno oštricu u utore spojke drške.
3. Gurnite skalpelno oštricu potpuno u spoj ručke. Kraj oštrice se zakvači na svoje mjesto.

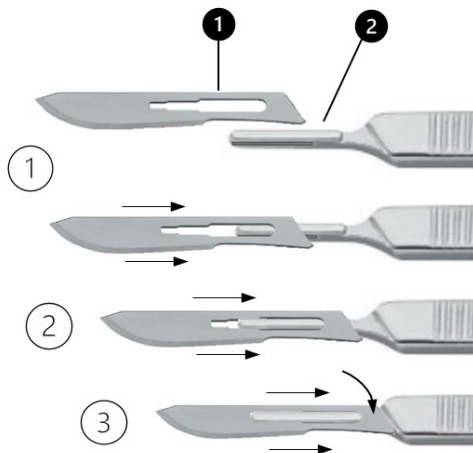

Rastavljanje:

1. Pritisnite opružni kraj oštrice skalpela (1) iz konektora drške dok se ne može vratiti kroz utore konektora (2).
2. Izvučite oštricu skalpela iz utora drške dok se drška ne oslobodi iz oka.
3. Uklonite oštricu skalpela iz drške.

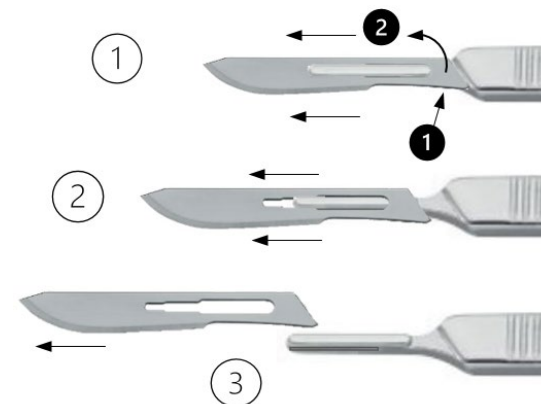

Drške skalpela za sustav mini skalpela


Drške za noževe mini skalpela imaju stezni uređaj u koji se može stegnuti oštrica mini skalpela.

Ove ručke su trodjelne i mogu se rastaviti. Sastoje se od čeljusti (1), nazubljene matice (2) i drške (3).




Sklapanje:

1. Postavite nazubljenu maticu (2) na dršku (3).
2. Umetnite čeljust (1) kroz nazubljenu maticu u dršku i zavijte je u smjeru kazaljke na satu pomoću drške.
3. Umetnite kraj oštrice skalpela potpuno u čeljust. Držite maticu s rebrastom glavom i zategnite oštricu skalpela pomoću drške.

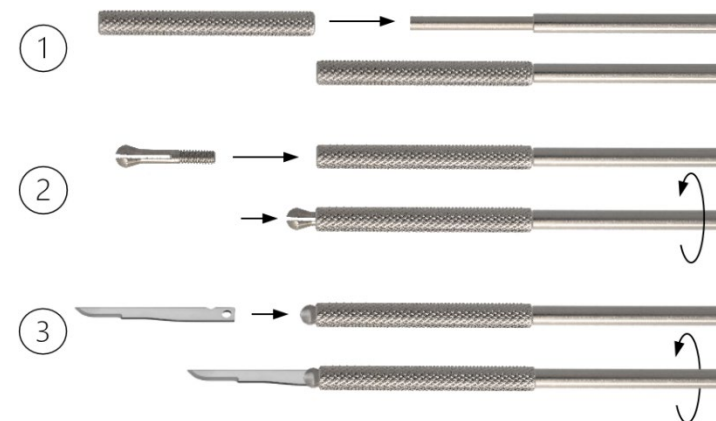





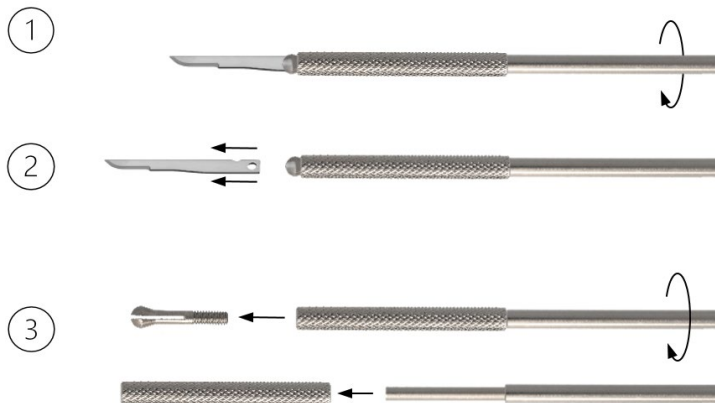




Rastavljanje:

1. Otpustite čeljust (1) okretanjem ručke (3) u smjeru suprotnom kazaljki na satu, čvrsto držeći nazubljenu maticu (2).
2. Uklonite oštricu skalpela.
3. Sada rastavite ručku radi obrade. Otpustite čahuru (1) iz ručke dodatnim okretanjem ručke u smjeru suprotnom kazaljki na satu. Zatim uklonite maticu s nazubljenim obručem s ručke.



SIMBOLI

	Pogledajte upute
	Broj serije
	Artikl. br.
	Komada po pakiranju
	Nesterilan
	Oprez
	Proizvođač
	Datum proizvodnje
	CE označavanje u skladu s Uredbom (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima s identifikacijskim brojem ovlaštenog tijela
	Medicinski proizvod