

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA (LT) SKALPELIO PEILIAI IR SKALPELIO RANKENOS



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG  
Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen an der Donau,  
Vokietija  
Tel. +49 7463 9956-0  
Faksas +49 7463 9956-56  
[sales@RUDOLF-med.com](mailto:sales@RUDOLF-med.com)  
[www.RUDOLF-med.com](http://www.RUDOLF-med.com)



D0839 / Rev B / ACR00474 / 2026-04-20

### PERSKAITYKITE PRIEŠ PERDIRBANT IR LAIKYKITE SAUGIOJE VIETOJE

#### PRODUKTAS

Šios naudojimo instrukcijos skirtos RUDOLF Medical skalpelių peiliukų ir rankenėlių surinkimui ir išardymui.

Jūs gaunate aukštos kokybės produktą, kurio tinkamas tvarkymas ir naudojimas aprašyti toliau.

**Tik profesionaliam naudojimui:** Priemonės skirtos naudoti tik profesionaliems vartotojams (chirurgams, operacinės slaugytojoms, medicinos prietaisų apdorojimo techniniams specialistams).

**Pacientų grupė:** nėra jokių apribojimų dėl pacientų grupės. Sprendimas, ar nauda viršija riziką tam tikroje pacientų grupėje, gali būti paliktas medicinos specialisto nuožiūrai ir patirčiai.



Toliau pateiktos instrukcijos skirtos išardymui po chirurginės procedūros ir surinkimui po valymo ir dezinfekcijos.

Išsamios apdorojimo instrukcijos pateiktos naudojimo instrukcijoje D0462:



RUDOLF Medical instrumentai tiekiami nesterilūs ir prieš pirmąjį naudojimą bei iškart po kiekvieno naudojimo turi būti valomi, dezinfekuojami ir sterilizuojami. Apsauginiai dangteliai ir transportavimo pakuotė turi būti pašalinti iš anksto.

Prieš sterilizavimą rekomenduojame instrumentų mechanines dalis patepti priežiūros aliejumi.

Prieš kiekvieną naudojimą reikia atlikti išsamų vizualinį ir funkcinį instrumentų patikrinimą.

#### NAUDOJIMO PASKIRTIS

Daugkartinio naudojimo chirurginiai instrumentai skirti chirurginėms procedūroms ir gali būti pakartotinai naudojami po tinkamo apdorojimo.

#### KONTRAINDIKACIJOS

Šie medicinos prietaisai nėra skirti naudoti centrinėje nervų ir kraujotakos sistemoje.

#### ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Naudodami ir tvarkydami skalpelius būkite atsargūs; yra sužalojimo pavojus.
- Renkantis skalpelio ašmenis ir rankeną, įsitikinkite, kad jie yra suderinami tarpusavyje.
- Montuojant/išmontuojant, venkite daryti pernelyg didelę jėgą ar spaudimą skalpelio ašmeniui, nes jis gali lūžti ir sukelti sužalojimus.

#### PRIEŠ KIEKVIENĄ NAUDOJIMĄ: VIZUALINIS IR FUNKCINIS PATIKRINIMAS

Patikrinkite:

- Išorinius pažeidimus (pvz., įlenkimus, atplaišas, įtrūkimus ar aštrius kraštus)
- Tinkamą veikimą
- Valymo priemonės ar dezinfekanto likučius

## PRODUKTO APRAŠYMAS

⚠ Skalpelio peiliukai gali būti naudojami tik su to paties tipo jungties rankenėlėmis.

### **Skalpelių rankenos, skirtos peiliukams su trumpu fiksavimo ilgiu**


Skalpelių rankenos modelių 3, 3L, 3LA, 5, 5A, 7 ir 7K turi jungtį skalpelių ašmenims su trumpu fiksavimo ilgiu.

### **Skalpelių rankenos, skirtos peiliukams su ilgu fiksavimo ilgiu**

4, 4L ir 4LA modelių skalpelių rankenos turi jungtį skalpelių peiliukams su ilgu fiksavimo ilgiu.


#### **Surinkimas:**

1. Uždėkite skalpelio ašmenis su kilpa (1) ant skalpelio rankenos jungties (2).
2. Įkiškite skalpelio ašmenis į rankenos jungties griovelius.
3. Skalpelio peilį visiškai įstumkite į rankenos jungtį. Peilio galas užsifikuos savo vietoje.

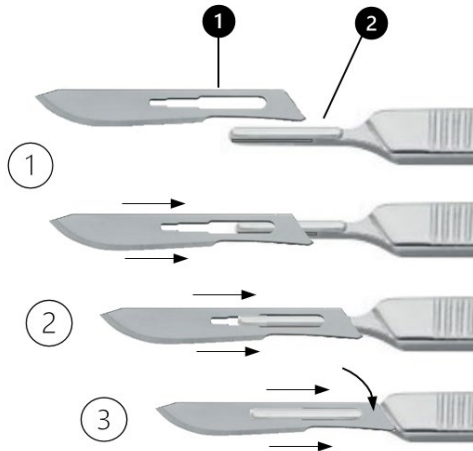

#### **Išardymas:**

1. Išstumkite skalpelio geležtės (1) spyruoklinį galą iš rankenos jungties, kol ją bus galima įstumti atgal per jungties griovelius (2).
2. Išstumkite skalpelio geležtę iš rankenos angos, kol rankena išslys iš akies.
3. Išimkite skalpelio ašmenis iš rankenos.

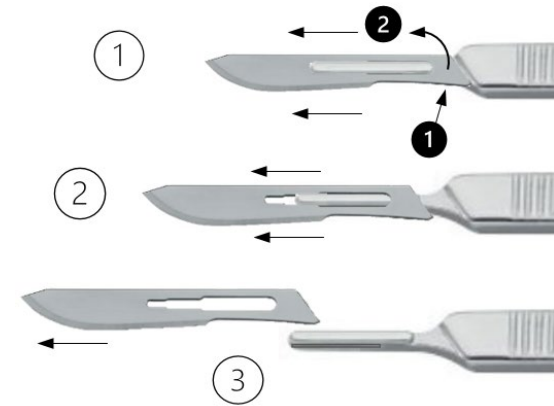

### **Skalpelių rankenos, skirtos mini skalpelių sistemai**


Skalpelių rankenos, skirtos mini skalpelių peiliukams, turi fiksavimo įtaisą, į kurį galima įtvirtinti mini skalpelio peiliuką.

Šios rankenos yra sudarytos iš trijų dalių ir gali būti išardomos. Jos susideda iš spaustuko (1), raižytos veržlės (2) ir rankenos (3).




#### **Surinkimas:**

1. Uždenkite raižytą veržlę (2) ant rankenos (3).
2. Įkiškite spaustuvą (1) per raižytą veržlę į rankeną ir prisukite ją pagal laikrodžio rodyklę kartu su rankena.
3. Įkiškite skalpelio peilio galą visiškai į spaustuką. Laikykite raižytą veržlę ir priveržkite skalpelio peilį rankena.

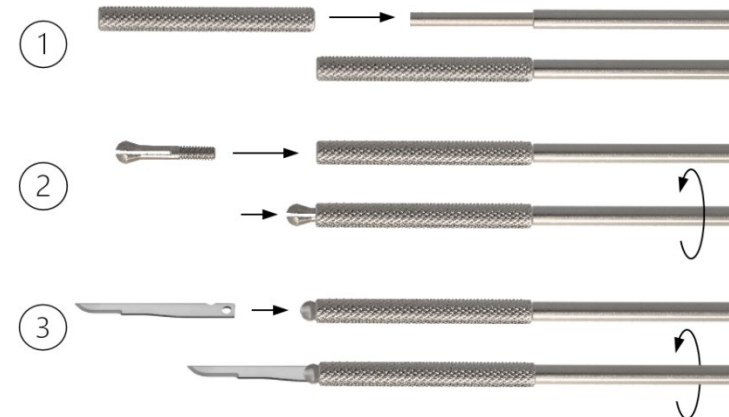





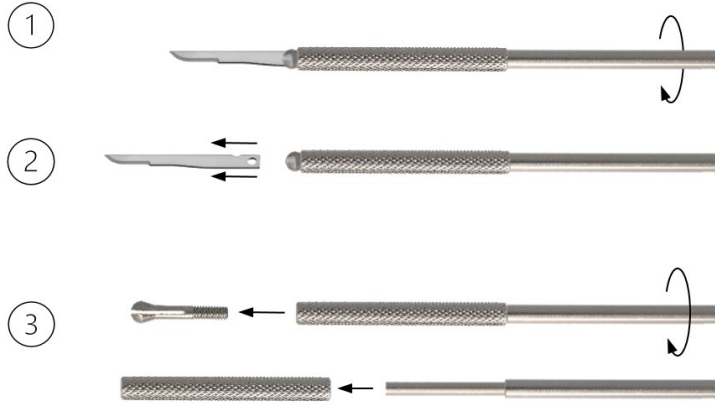


### Išardymas:

1. Atlaisvinkite spaustuką (1), sukdami rankenėlę (3) prieš laikrodžio rodyklę, tvirtai laikydami raižytą veržlę (2).
2. Išimkite skalpelio ašmenis.
3. Dabar išardykite rankeną, kad ją būtų galima apdoroti. Atlaisvinkite spaustuką (1) iš rankenos, toliau sukdami rankeną prieš laikrodžio rodyklę. Tada nuimkite raižytą veržlę nuo rankenos.



### SIMBOLIAI

	Žiūrėkite instrukcijas
	Partijos kodas
<b>REF</b>	Prekės Nr.
<b>QTY</b>	Vnt. pakuotėje
	Nesterilus
	Atsargiai
	Gamintojas
	Gamybos data
<b>CE</b> <b>0297</b>	CE ženklas pagal Reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos prietaisų su notifikuotosios įstaigos identifikaciniu numeriu
	Medicinos prietaisas