

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI (LV) SKALPEĻU ASMEŅI UN SKALPEĻU ROKTURIS



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen an der Donau,
Vācija
Tālrunis: +49 7463 9956-0
Fakss: +49 7463 9956-56
sales@RUDOLF-med.com
www.RUDOLF-med.com



D0839 / Rev B / ACR00474 / 2026-04-20

LŪDZU, IZLASIET PRIEKŠ PĀRSTRĀDĀŠANAS UN GLABĀJIET DROŠĀ VIETĀ

PRODUKTS

Šīs lietošanas instrukcijas attiecas uz RUDOLF Medical skalpeļu asmeņu un rokturu montāžu un demontāžu.

Jūs saņemat augstas kvalitātes produktu, kura pareiza apstrāde un lietošana ir aprakstīta zemāk.

Tikai profesionālai lietošanai: Instrumenti ir paredzēti lietošanai tikai profesionāliem lietotājiem (ķirurgiem, operāciju zāles medmāsām, medicīnisko ierīču atkārtotas apstrādes tehniķiem).

Pacientu grupa: Nav ierobežojumu attiecībā uz pacientu grupu. Lēmums par to, vai ieguvums konkrētajai pacientu grupai atsvēr risku, var tikt atstāts medicīnas speciālista ziņā, ņemot vērā viņa pieredzi.



Turpmākās instrukcijas attiecas uz izjaukšanu pēc ķirurģiskas procedūras un salikšanu pēc tīrīšanas un dezinfekcijas.

Sīkākas instrukcijas par atkārtotu apstrādi var atrast lietošanas instrukcijā D0462:



RUDOLF Medical instrumenti tiek piegādāti nesterilizēti, un tie ir jāiztīra, jādezinficē un jāsterilizē pirms pirmās lietošanas reizes un tūlīt pēc katras lietošanas reizes. Iepriekš ir jānoņem aizsargvāciņi un transporta iepakojums.

Pirms sterilizācijas ieteicams instrumenta mehāniskās daļas apstrādāt ar kopšanas eļļu.

Pirms katras lietošanas reizes jāveic instrumentu visaptveroša vizuāla un funkcionāla pārbaude.

LIETOŠANAS MĒRĶIS

Daudzkārt lietojamie ķirurģiskie instrumenti ir paredzēti ķirurģiskām procedūrām un tos var atkārtoti lietot pēc atbilstošas pārstrādes.

KONTRAINDIKĀCIJAS

Šīs medicīniskās ierīces nav paredzētas lietošanai centrālajā nervu un asinsrites sistēmā.

BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Lietojot un rīkojoties ar skalpeļiem, jāievēro piesardzība, jo pastāv traumu risks.
- Izvēloties skalpeļa asmeni un rokturi, pārlicinieties, ka tie ir savietojami savienojuma ziņā.
- Montējot/demontējot, izvairieties no pārmērīgas spēka vai spiediena pielietošanas uz skalpeļa asmeni, jo tas var salūzt un izraisīt traumas.

PIRMS KATRAS LIETOŠANAS: VIZUĀLA UN FUNKCIJAS PĀRBAUDE

Pārbaudiet:

- Ārējiem bojājumiem (piemēram, ieplaisām, izvirzījumiem, plaisām vai asām malām)
- Pareizu darbību
- Tīrīšanas līdzekļa vai dezinfekcijas līdzekļa atliekas

PRODUKTA APRAKSTS

⚠ Skalpeļu asmeņus var kombinēt tikai ar tāda paša savienojuma tipa rokturiem.

Skalpeļu rokturi asmeņiem ar īsu fiksācijas garumu


Skalpeļu rokturiem modeļiem 3, 3L, 3LA, 5, 5A, 7 un 7K ir savienojums skalpeļu asmeņiem ar īsu fiksācijas garumu.

Skalpeļu rokturi asmeņiem ar garu fiksācijas garumu

Skalpeļu rokturiem modeļos 4, 4L un 4LA ir savienojums skalpeļu asmeņiem ar garu fiksācijas garumu.


Montāža:

1. Uzlieciet skalpeļa asmeni ar acs atveri (1) uz skalpeļa roktura savienojuma (2).
2. Ievietojiet skalpeļa asmeni roktura savienojuma rievas.
3. Iedabūjiet skalpeļa asmeni pilnībā roktura savienojumā. Asmens gals ievietojas savā vietā.

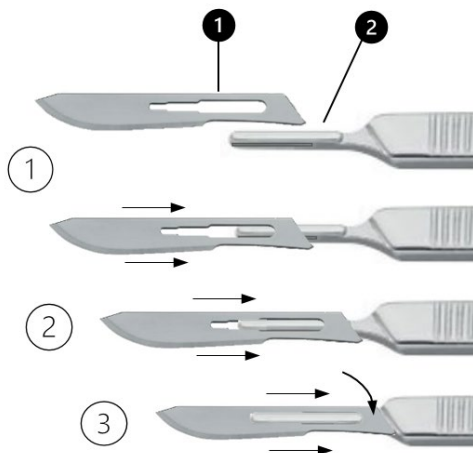

Demontāža:

1. Nospiediet skalpeļa asmens (1) atsperīgo galu ārā no roktura savienojuma, līdz to var atkal iebāzt caur savienojuma rievas (2).
2. Pabīdīet skalpeļa asmeni atpakaļ no roktura spraugas, līdz rokturis atbrīvojas no acs.
3. Noņemiet skalpeļa asmeni no roktura.

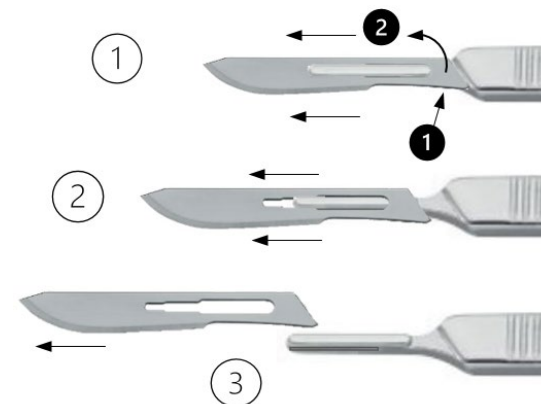

Skalpeļu rokturi mini skalpeļu sistēmai


Mini skalpeļu asmeņu rokturiem ir fiksēšanas ierīce, kurā var fiksēt mini skalpeļa asmeni.

Šie rokturi sastāv no trim daļām un ir izjaukami. Tie sastāv no spīles (1), rievotas uzgriežņa (2) un roktura (3).




Montāža:

1. Uzlieciet rievoto uzgali (2) uz roktura (3).
2. Ievietojiet spīlīti (1) caur rievoto uzgali rokturī un pieskrūvējiet to pulksteņrādītāja virzienā kopā ar rokturi.
3. Ievietojiet skalpeļa asmens galu pilnībā spīlītē. Turiet rievoto uzgali un pievelciet skalpeļa asmeni ar rokturi.

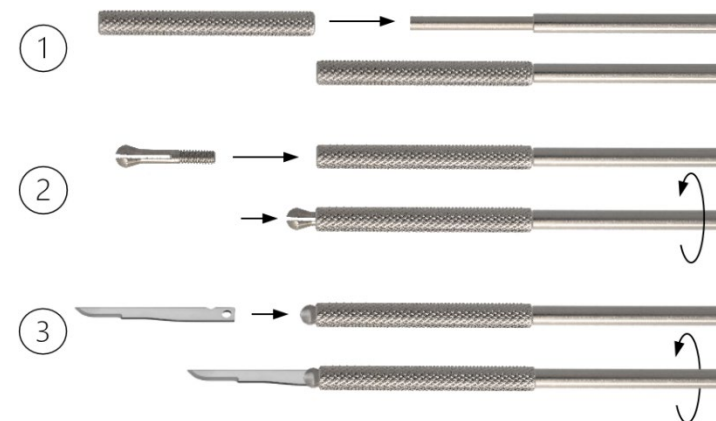





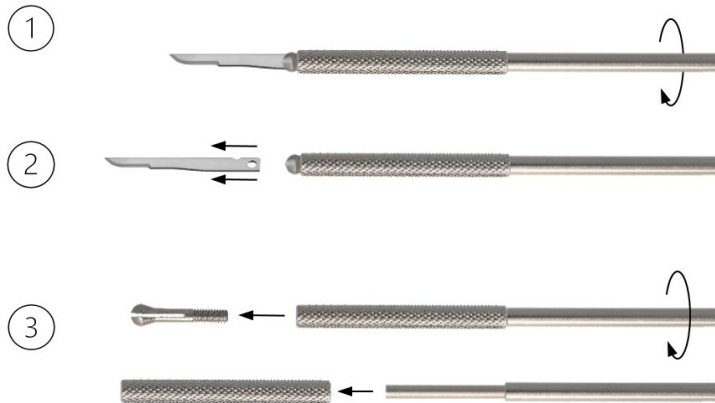



Izjaukšana:

1. Atbrīvojiet skavu (1), pagriežot rokturi (3) pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, stingri turot rievoto uzgali (2).
2. Izņemiet skalpeļa asmeni.
3. Tagad izjauciet rokturi, lai to atkārtoti apstrādātu. Atbrīvojiet spīli (1) no roktura, pagriežot rokturi tālāk pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Pēc tam noņemiet rievoto uzgali no roktura.



SIMBOLI

	Skatīt instrukcijas
	Partijas kods
REF	Preces nr.
QTY	Skaits iepakojumā
	Nesterils
	Uzmanību
	Ražotājs
	Ražošanas datums
	CE marķējums saskaņā ar Regulu (ES) 2017/745 par medicīnas ierīcēm ar paziņotās iestādes identifikācijas numuru
	Medicīnas ierīce