

## GEBRUIKSAANWIJZING (NL) SCALPELBLADEN EN SCALPELHANDVATEN



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG  
Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen an der Donau,  
Duitsland  
Tel. +49 7463 9956-0  
Fax +49 7463 9956-56  
[sales@RUDOLF-med.com](mailto:sales@RUDOLF-med.com)  
[www.RUDOLF-med.com](http://www.RUDOLF-med.com)



D0839 / Rev B / ACR00474 / 2026-04-20

### LEES DIT VOOR HET HERVERWERKEN EN BEWAAR HET OP EEN VEILIGE PLAATS

#### PRODUCT

Deze gebruiksaanwijzing heeft betrekking op de montage en demontage van RUDOLF Medical-scalpelbladen en -scalpelhandvatten.

U ontvangt een hoogwaardig product, waarvan de juiste hantering en het juiste gebruik hieronder worden beschreven.

**Uitsluitend voor professioneel gebruik:** De instrumenten zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers (chirurgen, operatiekamer verpleegkundigen, technici voor het herverwerken van medische hulpmiddelen).

**Patiëntenpopulatie:** Er zijn geen beperkingen met betrekking tot de patiëntenpopulatie. Het kan aan het oordeel en de ervaring van de medische professional worden overgelaten om te beslissen of het voordeel opweegt tegen het risico bij de betreffende populatie.



De volgende instructies hebben betrekking op het demonteren na de chirurgische ingreep en het monteren na reiniging en desinfectie.

Gedetailleerde instructies voor herverwerking zijn te vinden in de IFU D0462:



RUDOLF Medical-instrumenten worden niet-steriel geleverd en moeten vóór het eerste gebruik en onmiddellijk na elk gebruik worden gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd. Beschermkappen en transportverpakkingen moeten vooraf worden verwijderd.

Wij raden aan om de mechanische onderdelen van het instrument vóór sterilisatie te behandelen met een onderhoudsolie.

Voor elk gebruik moet een uitgebreide visuele en functionele inspectie van de instrumenten worden uitgevoerd.

#### BESTEMD GEBRUIK

Herbruikbare chirurgische instrumenten zijn bedoeld voor chirurgische ingrepen en kunnen na een gekwalificeerde herverwerking opnieuw worden gebruikt.

#### CONTRA-INDICATIE

De medische hulpmiddelen zijn niet bedoeld voor gebruik op het centrale zenuwstelsel en de bloedsomloop.

#### WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

- Wees voorzichtig bij het gebruik en de hantering van scalpels; er bestaat een risico op letsel.
- Zorg er bij het kiezen van een scalpelblad en -handvat voor dat deze qua aansluiting op elkaar aansluiten.
- Vermijd bij het monteren/demonteren het uitoefenen van overmatige kracht of druk op het scalpelblad, aangezien dit kan breken en letsel kan veroorzaken.

#### VOOR ELK GEBRUIK: VISUELE EN FUNCTIONELE INSPECTIE

Controleer op:

- Externe schade (bijv. deuken, bramen, scheuren of scherpe randen)
- Correcte werking
- Restanten van reinigingsmiddel of desinfectiemiddel

## PRODUCTBESCHRIJVING

⚠ Scalpelbladen kunnen alleen worden gecombineerd met handvatten van hetzelfde type aansluiting.

### Scalpelhandvatten voor mesjes met korte klemlengte


De scalpelhandvatten van de modellen 3, 3L, 3LA, 5, 5A, 7 en 7K hebben een aansluiting voor scalpelbladen met een korte klemlengte.

### Scalpelhandvatten voor bladen met lange klemlengte

De scalpelhandgrepen van de modellen 4, 4L en 4LA hebben een aansluiting voor scalpelbladen met een lange klemlengte.


#### Montage:

1. Plaats het scalpelblad met het oogje (1) op de aansluiting van het scalpelhandvat (2).
2. Steek het scalpelblad in de groeven van de handgreepverbinding.
3. Duw het scalpelblad volledig in de aansluiting van het handvat. Het uiteinde van het blad klikt vast.

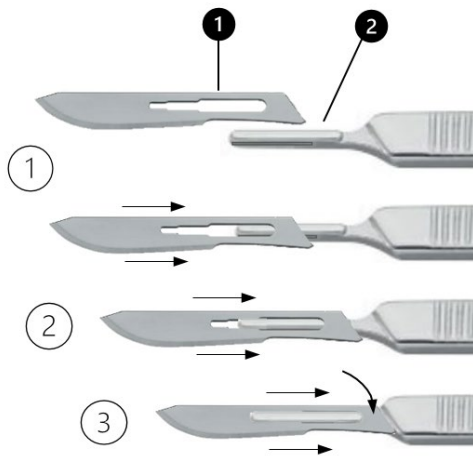

#### Demontage:

1. Druk het veerkrachtige uiteinde van het scalpelblad (1) uit de handgreepverbinding totdat het terug door de groeven van de verbinding (2) kan worden geduwd.
2. Schuif het scalpelblad terug uit de sleuf van het handvat totdat het handvat uit het oogje is losgekomen.
3. Verwijder het scalpelblad uit het handvat.

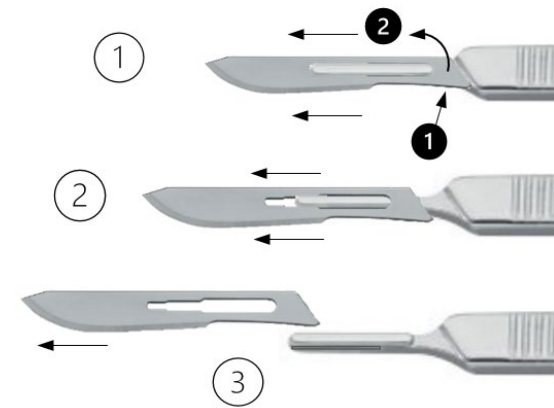

### Scalpelhandvatten voor het mini-scalpelsysteem


Scalpelhandvatten voor mini-scalpelbladen zijn voorzien van een klemmechanisme waarin een mini-scalpelblad kan worden vastgeklemd.

Deze handgrepen bestaan uit drie delen en kunnen uit elkaar worden gehaald. Ze bestaan uit een spantang (1), een kartelmoer (2) en een handgreep (3).




#### Montage:

1. Plaats de kartelmoer (2) op het handvat (3).
2. Steek de spantang (1) door de kartelmoer in het handvat en draai deze met het handvat rechtsom vast.
3. Steek het uiteinde van het scalpelmessje volledig in de spantang. Houd de kartelmoer vast en draai het scalpelmessje vast met de handgreep.

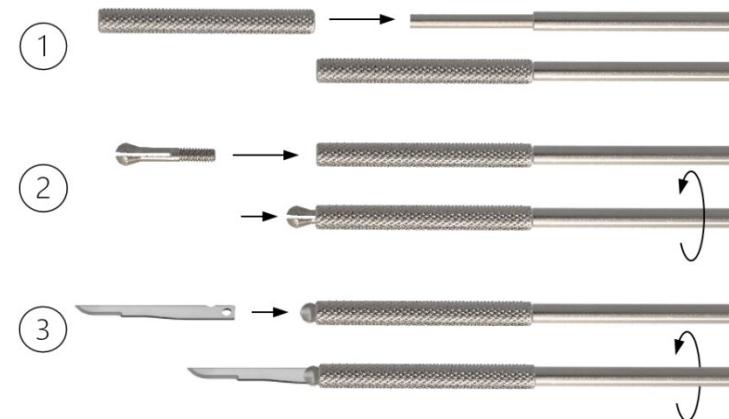





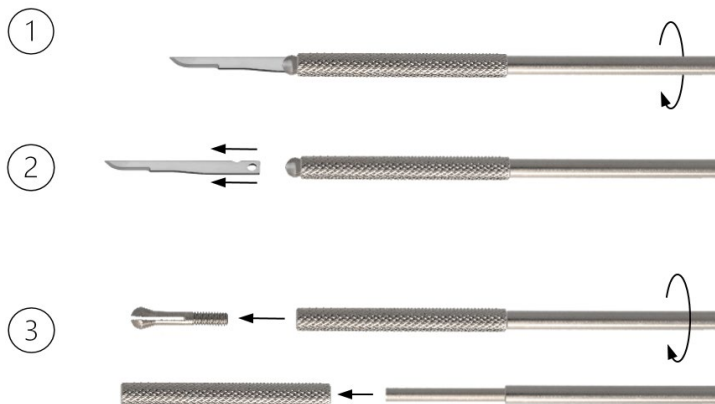





### **Demontage:**

1. Maak de spantang (1) los door de handgreep (3) linksom te draaien terwijl u de kartelmoer (2) stevig vasthoudt.
2. Verwijder het scalpelblad.
3. Demonteer nu de handgreep voor herverwerking. Maak de spantang (1) los van de handgreep door de handgreep verder tegen de klok in te draaien. Verwijder vervolgens de kartelmoer van de handgreep.



### **SYMBOLLEN**

	Raadpleeg de instructies
	Partijnummer
	Artikelnr.
	Aantal per verpakking
	Niet-steriel
	Waarschuwing
	Fabrikant
	Productiedatum
	CE-markering volgens Verordening (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen met identificatienummer van aangemelde instantie
	Medisch hulpmiddel