

## BRUKSANVISNING (NO) SKALPELLBLADER OG SKALPELLHÅNDTAK



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG  
Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen an der Donau,  
Tyskland  
Tlf. +49 7463 9956-0  
Faks +49 7463 9956-56  
[sales@RUDOLF-med.com](mailto:sales@RUDOLF-med.com)  
[www.RUDOLF-med.com](http://www.RUDOLF-med.com)



D0839 / Rev B / ACR00474 / 2026-04-20

### LES DETTE FØR OMBEHANDLING OG OPPBEVAR DET PÅ ET SIKKERT STED

#### PRODUKT

Disse bruksanvisningene gjelder montering og demontering av RUDOLF Medical-skalpellblader og skalpellhåndtak.

Du mottar et produkt av høy kvalitet, og riktig håndtering og bruk av dette er beskrevet nedenfor.

**Kun til profesjonell bruk:** Instrumentene er kun beregnet på profesjonelle brukere (kirurger, operasjonssykepleiere, teknikere for repressering av medisinsk utstyr).

**Pasientgruppe:** Det er ingen begrensninger med hensyn til pasientgruppen. Det kan overlates til den medisinske fagpersonens skjønn og erfaring å avgjøre om fordelene oppveier risikoen i den aktuelle pasientgruppen.



Følgende instruksjoner gjelder demontering etter det kirurgiske inngrepet og montering etter rengjøring og desinfeksjon.

Detaljerte instruksjoner for repressering finnes i bruksanvisningen D0462:



RUDOLF Medical-instrumenter leveres usterile og må rengjøres, desinfiseres og steriliseres før første bruk og umiddelbart etter hver bruk. Beskyttelseshetter og transportemballasje må fjernes på forhånd.

Før sterilisering anbefaler vi å behandle de mekaniske delene av instrumentet med vedlikeholdsolje.

Det bør utføres en omfattende visuell og funksjonell inspeksjon av instrumentene før hver bruk.

#### TILTENKT BRUK

Gjenbrukbare kirurgiske instrumenter er beregnet på kirurgiske inngrep og kan brukes på nytt etter kvalifisert repressering.

#### KONTRAINDIKASJON

Medisinsk utstyr er ikke beregnet for bruk på sentralnervesystemet og sirkulasjonssystemet.

#### ADVARSELER OG FORSIKTIGHETSREGLER

- Vær forsiktig ved bruk og håndtering av skalpeller; det er fare for skade.
- Når du velger skalpellblad og håndtak, må du sørge for at de er kompatible med hverandre når det gjelder tilkoblingen.
- Unngå å bruke overdreven kraft eller trykk på skalpellbladet ved montering/demontering, da det kan knekke og forårsake skader.

#### FØR HVER BRUK: VISUELL OG FUNKSJONELL INSPEKSJON

Kontroller for:

- Ytre skader (f.eks. bulker, grader, sprekker eller skarpe kanter)
- Korrekt funksjon
- Rester av rengjøringsmiddel eller desinfeksjonsmiddel

## PRODUKTBESKRIVELSE

⚠ Skalpellblad kan kun kombineres med håndtak av samme tilkoblingstype.

### Skalpellhåndtak for blader med kort klemlengde


Skalpellhåndtakene til modellene 3, 3L, 3LA, 5, 5A, 7 og 7K har en tilkobling for skalpellblader med kort klemlengde.

### Skalpellhåndtak for blader med lang klemlengde

Skalpellhåndtakene til modellene 4, 4L og 4LA har en tilkobling for skalpellblader med lang klemlengde.


#### Montering:

1. Plasser skalpellbladet med øyet (1) på tilkoblingen på skalpellhåndtaket (2).
2. Sett skalpellbladet inn i sporene på håndtakets tilkobling.
3. Skyv skalpellbladet helt inn i håndtakets tilkobling. Bladenden klikker på plass.

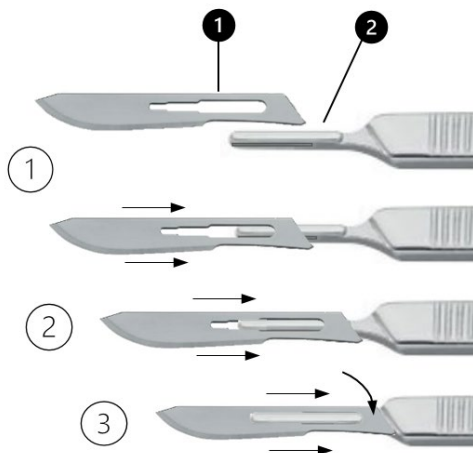

#### Demontering:

1. Trykk den fjærende enden av skalpellbladet (1) ut av håndtakets kobling til den kan skyves tilbake gjennom koblingens spor (2).
2. Skyv skalpellbladet ut av håndtakets spor til håndtaket løsner fra øyet.
3. Fjern skalpellbladet fra håndtaket.

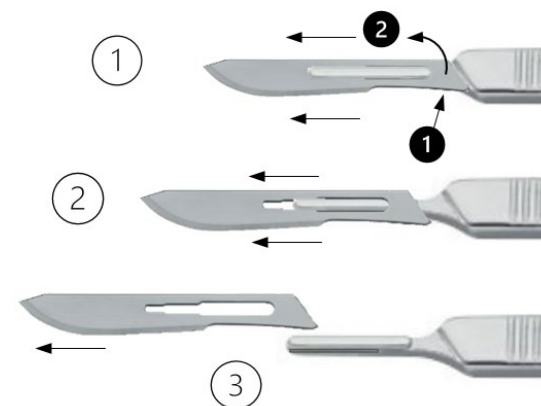

### Skalpellhåndtak til miniskalpell-systemet


Skalpellhåndtakene til miniskalpellbladene har en klemmeanordning der et miniskalpellblad kan festes.

Disse håndtakene består av tre deler og kan demonteres. De består av en spennhylse (1), en riflet mutter (2) og et håndtak (3).




#### Montering:

1. Plasser den riflede mutteren (2) på håndtaket (3).
2. Sett spennhylsen (1) gjennom den riflede mutteren inn i håndtaket og skru den inn med klokken sammen med håndtaket.
3. Sett enden av skalpellbladet helt inn i spennhylsen. Hold fast riflet mutter og stram skalpellbladet med håndtaket.

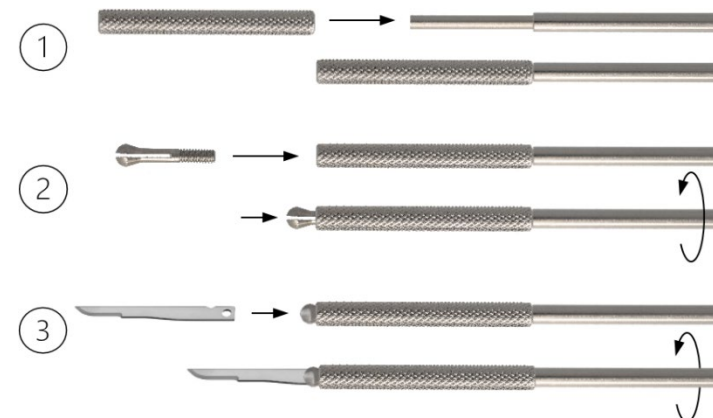





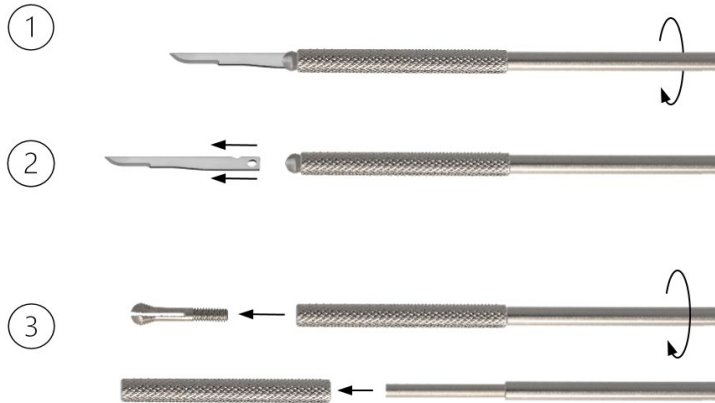





### **Demontering:**

1. Løsne spennhylsen (1) ved å dreie håndtaket (3) mot klokken mens du holder fast på riflet mutter (2).
2. Fjern skalpellbladet.
3. Demonter nå håndtaket for repressering. Løsne spennhylsen (1) fra håndtaket ved å dreie håndtaket videre mot klokken. Fjern deretter den riflede mutteren fra håndtaket.



### **SYMBOLER**

	Se bruksanvisningen
	Partikode
	Artikkelnr.
	Antall pr. pakke
	Ikke-sterilt
	Forsiktig
	Produsent
	Produksjonsdato
	CE-merking i henhold til forordning (EU) 2017/745 for medisinsk utstyr med identifikasjonsnummer fra et notifisert organ
	Medisinsk utstyr