

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO (PT) LÂMINAS DE BISTURI E CABEÇAS DE BISTURI



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen an der Donau,
Alemanha
Tel. +49 7463 9956-0
Fax +49 7463 9956-56
sales@RUDOLF-med.com
www.RUDOLF-med.com



D0839 / Rev B / ACR00474 / 2026-04-20

LEIA ANTES DE PROCESSAR NOVAMENTE E GUARDE EM LOCAL SEGURO

PRODUTO

Estas instruções de utilização referem-se à montagem e desmontagem das lâminas e cabos de bisturi da RUDOLF Medical.

Está a receber um produto de alta qualidade, cujo manuseamento e utilização adequados são descritos abaixo.

Apenas para uso profissional: Os instrumentos destinam-se a ser utilizados apenas por utilizadores profissionais (cirurgiões, enfermeiros de bloco operatório, técnicos de reprocessamento de dispositivos médicos).

População de doentes: Não existem restrições relativas à população de doentes. A decisão de se os benefícios superam os riscos numa determinada população pode ser deixada ao critério e experiência do profissional de saúde.



As instruções seguintes referem-se à desmontagem após o procedimento cirúrgico e à montagem após a limpeza e desinfeção.

Instruções detalhadas para o reprocessamento podem ser encontradas no IFU D0462:



Os instrumentos RUDOLF Medical são fornecidos não esterilizados e devem ser limpos, desinfectados e esterilizados antes da primeira utilização e imediatamente após cada utilização. As tampas de protecção e a embalagem de transporte devem ser removidas previamente.

Antes da esterilização, recomendamos tratar as partes mecânicas do instrumento com um óleo de manutenção.

Deve ser realizada uma inspeção visual e funcional abrangente dos instrumentos antes de cada utilização.

FINALIDADE PREVISTA

Os instrumentos cirúrgicos reutilizáveis destinam-se a procedimentos cirúrgicos e podem ser reutilizados após um reprocessamento adequado.

CONTRA-INDICAÇÃO

Os dispositivos médicos não se destinam a ser utilizados no sistema nervoso central e no sistema circulatório.

AVISOS E PRECAUÇÕES

- Tenha cuidado ao utilizar e manusear bisturis; existe risco de lesão.
- Ao seleccionar uma lâmina e um cabo de bisturi, certifique-se de que são compatíveis entre si em termos de encaixe.
- Ao montar/desmontar, evite aplicar força ou pressão excessiva na lâmina do bisturi, pois esta pode partir-se e causar ferimentos.

ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO: INSPEÇÃO VISUAL E FUNCIONAL

Verifique se há:

- Danos externos (por exemplo, amolgadelas, rebarbas, fissuras ou arestas afiadas)
- Correto funcionamento
- Resíduos de produtos de limpeza ou desinfetantes

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

⚠ As lâminas de bisturi só podem ser combinadas com cabos do mesmo tipo de encaixe.

Cabo de bisturi para lâminas com comprimento de fixação curto


Os cabos de bisturi dos modelos 3, 3L, 3LA, 5, 5A, 7 e 7K possuem uma conexão para lâminas de bisturi com comprimento de fixação curto.

Cabos de bisturi para lâminas com comprimento de fixação longo

Os cabos de bisturi dos modelos 4, 4L e 4LA possuem uma conexão para lâminas de bisturi com comprimento de fixação longo.


Montagem:

1. Coloque a lâmina de bisturi com o orifício (1) na conexão do cabo do bisturi (2).
2. Insira a lâmina de bisturi nas ranhuras da conexão do cabo.
3. Empurre a lâmina do bisturi completamente para dentro da conexão do cabo. A extremidade da lâmina encaixa no lugar.

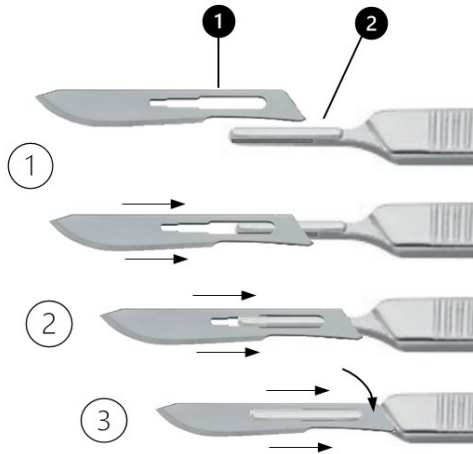

Desmontagem:

1. Pressione a extremidade elástica da lâmina do bisturi (1) para fora do conector do cabo até que possa ser empurrada de volta através das ranhuras do conector (2).
2. Deslize a lâmina do bisturi para fora da ranhura do cabo até que o cabo seja libertado do seu orifício.
3. Retire a lâmina do bisturi do cabo.

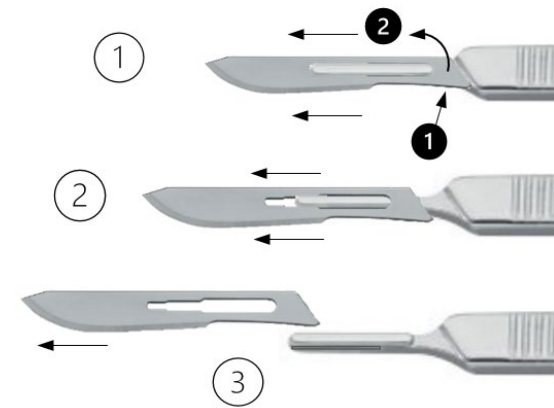

Cabos de bisturi para o sistema de mini-bisturi


Os cabos de bisturi para lâminas de mini bisturi possuem um dispositivo de fixação no qual uma lâmina de mini bisturi pode ser fixada.

Estes cabos são compostos por três partes e podem ser desmontados. São constituídos por uma pinça (1), uma porca serrilhada (2) e um cabo (3).




Montagem:

1. Coloque a porca serrilhada (2) no cabo (3).
2. Insira a pinça (1) através da porca serrilhada no cabo e aperte-a no sentido horário com o cabo.
3. Insira a extremidade da lâmina de bisturi completamente na pinça. Segure a porca serrilhada e aperte a lâmina de bisturi com o cabo.

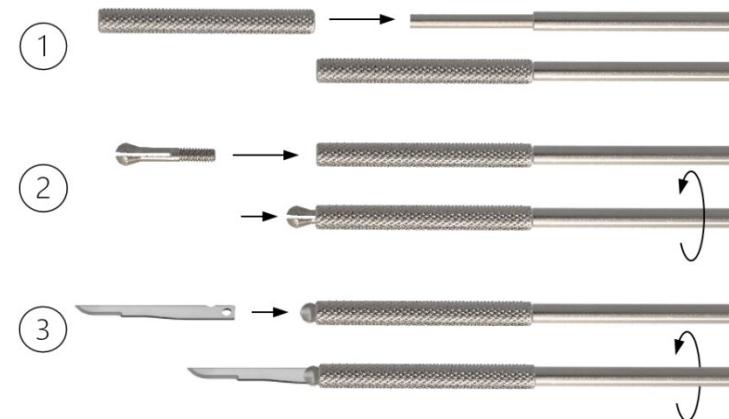

Desmontagem:

1. Solte a pinça (1) rodando a pega (3) no sentido anti-horário enquanto segura firmemente a porca serrilhada (2).
2. Retire a lâmina do bisturi.
3. Desmonte agora a pega para reprocessamento. Solte a pinça (1) da pega, rodando a pega ainda mais no sentido anti-horário. Em seguida, retire a porca serrilhada da pega.

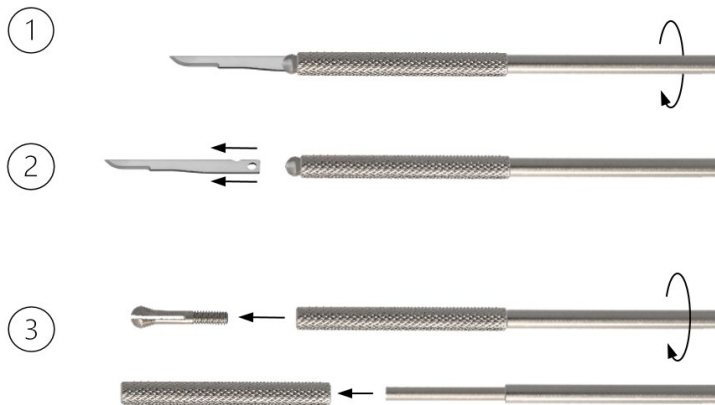

SÍMBOLOS

	Consulte as instruções
	Código do lote
	N.º do artigo
	N.º por embalagem
	Não esterilizado
	Precaução
	Fabricante
	Data de fabrico
	Marcação CE de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745 relativo aos dispositivos médicos, com número de identificação do organismo notificado
	Dispositivo médico