

BRUKSANVISNING (SV) SKALPELLBLAD OCH SKALPELLHANDTAG



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen an der Donau,
Tyskland
Tel. +49 7463 9956-0
Fax +49 7463 9956-56
sales@RUDOLF-med.com
www.RUDOLF-med.com



D0839 / Rev B / ACR00474 / 2026-04-20

LÄS INNAN ÅTERBEHANDLING OCH FÖRVAR PÅ EN SÄKER PLATS

PRODUKT

Dessa bruksanvisningar avser montering och demontering av RUDOLF Medicals skalpellblad och skalpellhandtag.

Du har fått en högkvalitativ produkt vars korrekta hantering och användning beskrivs nedan.

Endast för professionellt bruk: Instrumenten är endast avsedda för professionella användare (kirurger, operationssjuksköterskor, tekniker för återanvändning av medicintekniska produkter).

Patientgrupp: Det finns inga begränsningar avseende patientgruppen. Det kan överlåtas till den medicinska personalens bedömning och erfarenhet att avgöra om nyttan uppväger risken i den aktuella patientgruppen.



Följande instruktioner avser demontering efter det kirurgiska ingreppet och montering efter rengöring och desinfektion.

Detaljerade instruktioner för återanvändning finns i bruksanvisningen D0462:



RUDOLF Medical-instrument levereras i icke-sterilt skick och måste rengöras, desinficeras och steriliseras före första användningen och omedelbart efter varje användning. Skyddskåpor och transportförpackningar måste avlägsnas i förväg.

Innan sterilisering rekommenderar vi att instrumentets mekaniska delar behandlas med underhållsolja.

En omfattande visuell och funktionell kontroll av instrumenten bör utföras före varje användning.

AVSEDD ANVÄNDNING

Återanvändbara kirurgiska instrument är avsedda för kirurgiska ingrepp och kan återanvändas efter korrekt återanvändningsberedning.

KONTRAIKATION

De medicintekniska produkterna är inte avsedda för användning på centrala nervsystemet och cirkulationssystemet.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Var försiktig vid användning och hantering av skalpeller; det finns risk för skador.
- När du väljer skalpellblad och handtag, se till att de är kompatibla med varandra vad gäller anslutningen.
- Undvik att använda överdriven kraft eller tryck på skalpellbladet vid montering/demontering, eftersom det kan gå sönder och orsaka skador.

FÖRE VARJE ANVÄNDNING: VISUELL OCH FUNKTIONELL INSPEKTION

Kontrollera följande:

- Yttre skador (t.ex. bucklor, grader, sprickor eller vassa kanter)
- Korrekt funktion
- Rester av rengöringsmedel eller desinfektionsmedel

PRODUKTBESKRIVNING

⚠ Skalpellblad kan endast kombineras med handtag av samma anslutningstyp.

Skalpellhandtag för blad med kort klämlängd


Skalpellhandtagen i modellerna 3, 3L, 3LA, 5, 5A, 7 och 7K har en anslutning för skalpellblad med kort klämlängd.

Skalpellhandtag för blad med lång klämlängd

Skalpellhandtagen i modellerna 4, 4L och 4LA har en anslutning för skalpellblad med lång klämlängd.


Montering:

1. Placera skalpellbladet med öglan (1) på anslutningen på skalpellhandtaget (2).
2. För in skalpellbladet i spåren på handtagets anslutning.
3. Tryck in skalpellbladet helt i handtagets anslutning. Bladets ände snäpper fast.

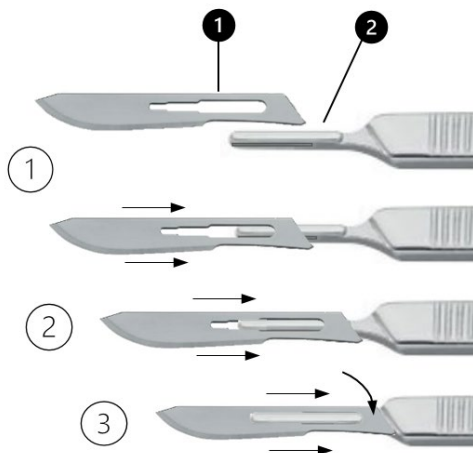

Demontering:

1. Tryck ut den fjädrande änden av skalpellbladet (1) ur handtagets anslutning tills det kan skjutas tillbaka genom anslutningens spår (2).
2. Skjut ut skalpellbladet ur handtagets spår tills handtaget lossnar från öglan.
3. Ta bort skalpellbladet från handtaget.

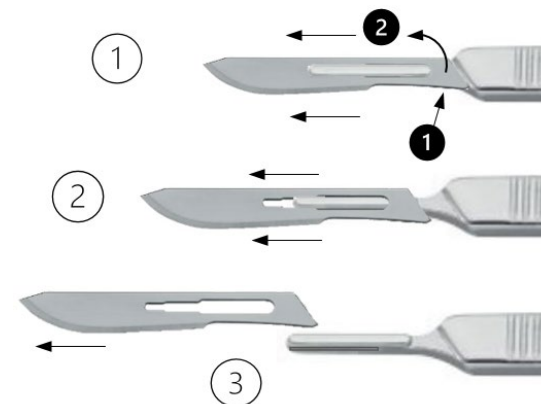

Skalpellhandtag för miniskalpellssystemet


Skalpellhandtag för miniskalpellblad har en klämma i vilken ett miniskalpellblad kan klämmas fast.

Dessa handtag består av tre delar och kan demonteras. De består av en spännhylsa (1), en räfflad mutter (2) och ett handtag (3).




Montering:

1. Placera den räfflade muttern (2) på handtaget (3).
2. För in spännhylsan (1) genom den räfflade muttern in i handtaget och skruva fast den medurs med handtaget.
3. För in änden av skalpellbladet helt i spännhylsan. Håll fast den räfflade muttern och dra åt skalpellbladet med handtaget.

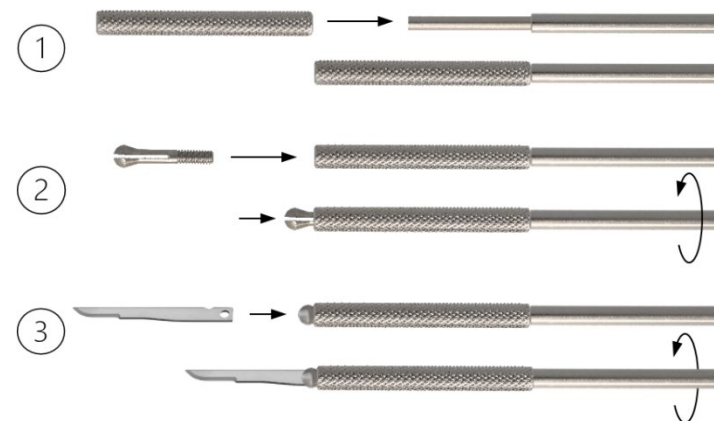





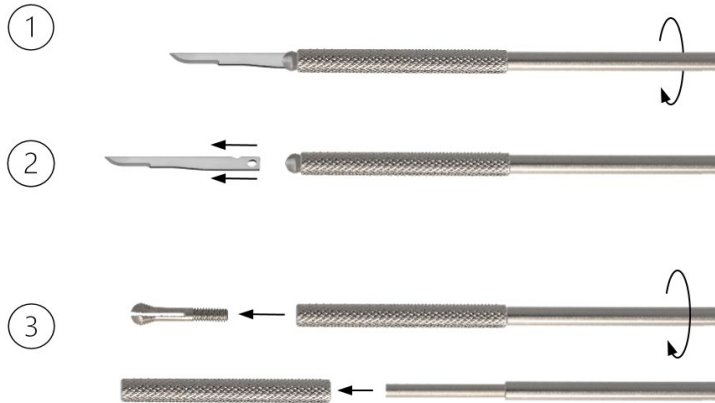





Demontering:

1. Lossa spännhylsan (1) genom att vrida handtaget (3) moturs samtidigt som du håller fast den räfflade muttern (2).
2. Ta bort skalpellbladet.
3. Demontera nu handtaget för återanvändning. Lossa spännhylsan (1) från handtaget genom att vrida handtaget ytterligare moturs. Ta sedan bort den räfflade muttern från handtaget.



SYMBOLER

	Se anvisningarna
	Partikod
	Artikelnr
	Antal per förpackning
	Icke-sterilt
	Varning
	Tillverkare
	Tillverkningsdatum
	CE-märkning enligt förordning (EU) 2017/745 för medicintekniska produkter med anmält organs identifikationsnummer
	Medicinteknisk produkt