

## NOTKUNARLEIÐBEININGAR (IS) SKURÐHÖKULBLAÐ OG SKURÐHÖKULHANDFÖNG



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG  
Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen an der Donau,  
Þýskaland  
Sími +49 7463 9956-0  
[sales@RUDOLF-med.com](mailto:sales@RUDOLF-med.com)  
[www.RUDOLF-med.com](http://www.RUDOLF-med.com)

D0839 / Rev C / ACR01447 / 2026-06-01



**Vinsamlegast lestu áður en endurmeðhöndlun fer fram og geymdu á öruggan stað**

### VARA

Þessar leiðbeiningar varða samsetningu og sundurliðun RUDOLF Medical skurðhnífblaða og skurðhnífstanga.

Þú ert að fá hágæða vöru, og rétt meðhöndlun og notkun hennar er lýst hér að neðan.

**Aðeins til faglegs notkunar:** Tækin eru ætluð eingöngu faglegum notendum (skurðlæknum, skurðstofuhjúkrunarfræðingum og tæknimönnum sem endurvinnna lækningatæki).

**Sjúklingahópur:** Engar takmarkanir gilda um sjúklingahópinn. Læknirinn getur metið, út frá sinni reynslu og fagþekkingu, hvort ávinningurinn vegur þyngra en áhættan í viðkomandi sjúklingahópi.



Eftirfarandi leiðbeiningar varða sundurliðun eftir skurðaðgerð og samsetningu eftir hreinsun og sóttgreinsun.

Nánari leiðbeiningar um endurvinnslu má finna í IFU D1494:



Tæki frá RUDOLF Medical eru afhent ósteríl og þarf að þrifa, sóttgreinsa og sterilísera fyrir fyrstu notkun og strax eftir hverja notkun. Verndarhettur og flutningsumbúðir skal fjarlægja fyrirfram.

Áður en sóttgreinsun er ráðlagt að meðhöndla vélræna hluta tækisins með viðhaldsolíu.

Alhliða sjónræn og virknileg skoðun á tækjunum skal fara fram fyrir hverja notkun.

### ÆTLAÐ NOTKUNARMARKMIÐ

Skurðhnífar og hnifar eru hannaðir til að gera skurð á húð og skera í gegnum vefi.

### MÓTBÆRI

Lækningatækin eru ekki ætluð til notkunar á miðtaugakerfinu né blóðrásarkerfinu.

### VIÐVÖRUNARMERKI OG VARÚÐARRÁÐ

- Gættu varúðar við notkun og meðhöndlun skurðhnífa; hætta er á meiðslum.
- Þegar valið er skurðhnífblað og -handfang, gakktu úr skugga um að þau séu samrýmanleg hvað varðar tengingu.
- Við samsetningu/sundurliðun forðist að beita skurðhnífblaðinu of miklum krafti eða þrýstingi, því það getur brotnað og valdið meiðslum.

### ÁÐUR EN HVERRRI NOTKUN: SJÓNÆN OG STARFSHEILDARKOUN

Skoðið eftir:

- Ytri skemmdir (t.d. inndjúp, burrar, sprungur eða skarpar brúnir)
- Rétt virkni
- Leifar hreinsiefnis eða sóttvarpa

## VÖRULÝSING

⚠ Skalpellblað getur aðeins verið parað saman við handfang af sama tengitípa.

### Skalpellhandföng fyrir blað með stutta klemmlengd


Hnífhandföng gerða 3, 3L, 3LA, 5, 5A, 7 og 7K hafa tengi fyrir hnífblað með stuttri klemmlengd.

### Skalpellhandföng fyrir blað með langa klemmlengd

Höfðin fyrir skurðhnífa gerða 4, 4L og 4LA hafa tengingu fyrir skurðhnífablöð með löngu klemma.


#### Samsetning:

1. Settu skurðhnífsblaðið með auganu (1) á tengið á skurðhnífshandfanginu (2).
2. Settu skurðhnífsblaðið í rillur tengingar handfangsins.
3. Þrýstið skurðhnífsblaðinu alveg inn í handfangstengið. Endi blaðsins smellir á sinn stað.

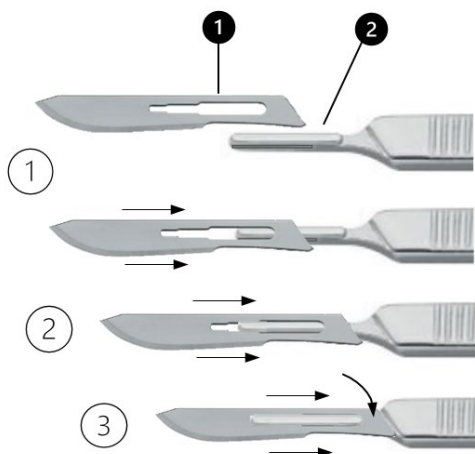

#### Afturköllun:

1. Ýttu sveigjanlega endanum á skurðhnífsblaðinu (1) út úr tengi handfangsins þar til hægt er að ýta því aftur í gegnum rillur tengisins (2).
2. Renndu skurðhnífsblaðinu aftur út úr rauf handfangsins þar til handfangið losnar úr auganu.
3. Taktu skurðhnífsblaðið úr handfanginu.

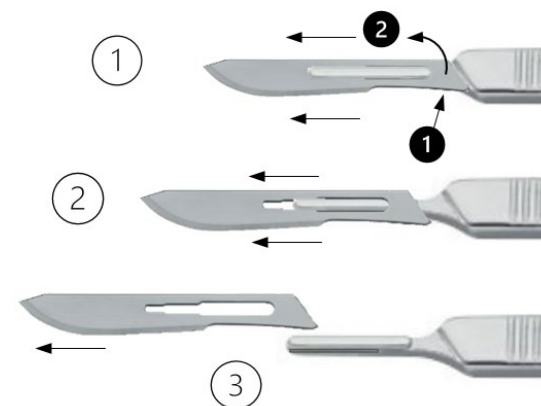

### Höfðingar fyrir skurðhníf í kerfi fyrir örskurðhnífa


Höndlar fyrir mini-skurðhnífblað hafa klemmutæki sem hægt er að klemma mini-skurðhnífblað í.

Þessir handföng eru þrískiptir og hægt er að taka þá í sundur. Þeir samanstanda af klemma (1), rilluðu möttli (2) og handfangi (3).




#### Samsetning:

1. Settu kornuðu möttuna (2) á handfangið (3).
2. Settu klemma (1) í gegnum finuðu möttuna inn í handfangið og skrúfaðu hana inn með klukkuhreyfingu með handfanginu.
3. Stingið enda skurðhnífsblaðsins alveg inn í klemma. Haltu klemmanuti og þrýstið skurðhnífsblaðinu með handfanginu.

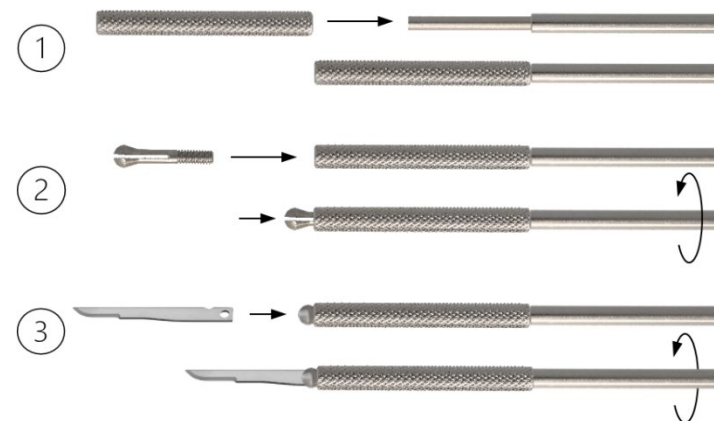





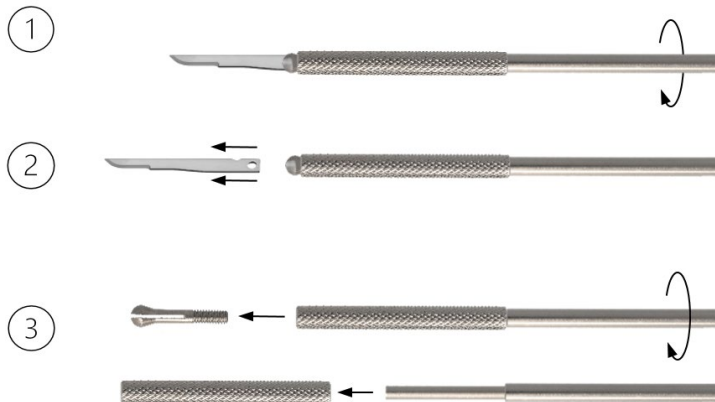





### Afturköllun:

1. Losaðu klemma (1) með því að snúa handfanginu (3) rangsælis á meðan þú heldur festingunni (2) fast.
2. Fjarlægið skurðhnífsblaðið.
3. Nú er handfangið tekið í sundur til endurvinnslu. Losaðu klemma (1) úr handfanginu með því að snúa handfanginu frekar í gagnstæða átt við klukku. Taktu síðan rillta möttuna úr handfanginu.



### TÁKN

	Sjá leiðbeiningar
	Lotunúmer
	Vörunr.
	Stk. á pakka
	Ósýklalyf
	Varúð
	Framleiðandi
	Framleiðsludagur
	CE-merking samkvæmt Reglugerð (ESB) 2017/745 um lækningatæki með auðkenningamúmeri tilkyntra aðila
	Lækningatæki